

足受板


*【禁忌・禁止】

〈使用方法〉

当社及びタカラベルモント製の高さ 32mm×板厚 9mm のサイドレールを使用する製品以外には、取り付けて使用しないこと。[安全性が保証できないため]

【形状・構造及び原理等】

1) 外観図

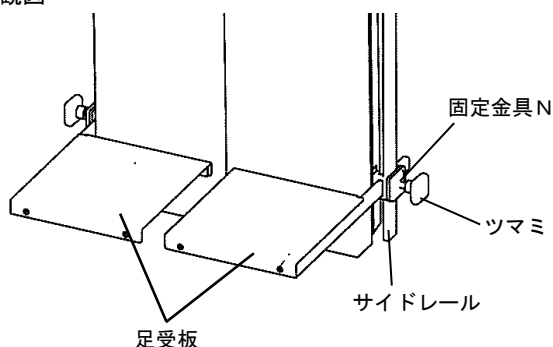

*2) 機器の仕様

- ①固定金具Nのツマミ操作により、手術台のサイドレールに着脱させることができます。
- ②固定金具Nのツマミ操作により、足受板の取付位置を調節できます。

〈動作保証条件〉

下記の条件にて使用すること。(ただし、結露しないこと)
周囲温度 10～40℃ 相対湿度 30～75% 気圧 700～1060hPa

【使用目的又は効果】

本機は手術台に取り付け、縦転時に患者の足を支える為に使用します。

*【使用方法等】

〈使用方法〉

機器の詳細な使用方法是付属の取扱説明書を使用前に必ず読むこと。

*【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ①サイドレールに足受板が固定金具Nで確実に固定されているか確認すること。確実に固定されずに使用されると、手術中に足受板が不意に落下し思わぬ事故の原因になります。

- ②足受板を着脱するときは必ず手術台を水平位にすること。水平位になっていないと、着脱の際に足受板が落下し、思わぬ事故の原因になります。
- ③足受板(片側)に許容負荷荷重(450N)以上の負荷を加えないこと。機器の破損の原因になります。
- ④お手入れは取扱説明書に従って実施すること。

【保管方法及び有効期間等】

〈耐用期間〉

- ・本機の耐用期間は 10 年です。(自己認証(当社データ)による)

※正規の使用方法、保守点検、消耗品などの交換を行った場合に限る。

- ・クッション部品は使用環境によって異なります。

*【保守・点検に係る事項】

詳細については取扱説明書の「保守点検」の項を使用前に必ずお読みください。

〈使用者による保守点検(日常点検)〉

頻度	内容
使用前	設置状況の確認
	外観状況の確認
	作動状況の確認
	その他の確認

*〈業者による保守点検〉

業者による保守点検を実施するときは、当社または当社の指定する業者、若しくは修理業者などの適切な有資格者に依頼すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

タカラメディカル株式会社

TEL : 06-6499-3461

本製品には取扱説明書がありますので、必ず確認してください。