

類別等：機械器具（58）整形用機械器具
一般医療機器 手動式整形外科用セメント除去器具 44597000
販売名：イノメッド・セメント・リムーバー

【警告】

加工・改造は絶対に行わないで下さい。[折損の原因となります]


【形状・構造及び原理等】

ステンレススチール又はポリアセタール重合体（デルリン樹脂）

1. セメント・オステオトーム（左）
2. セメント・リムーバー（右）



3. セメント・パッカー&トリマー

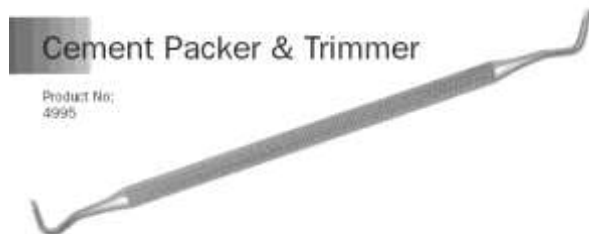

4. ポーズマン・セメント・トリマー



5. ロブ・セメント・キュレット



6. シークリス デルリン セメントスぺーサー



7. サラフ シャーハット セメント エクスサイザー



8. サラフ セメント トリマー



【使用目的又は効果】

セメント固定した人工関節を置換する際に整形外科用（骨）セメントを適用部位から除去するために用いる。

【使用方法等】

使用に先立ち、オートクレーブ又はエチレンオキシドガスにより滅菌して下さい。

- 滅菌方法及び滅菌条件

真空脱気ブリパキューム高圧蒸気滅菌

132℃ 4分間以上（推奨）

その他の滅菌方法・条件に関しては、各施設にて採用している方法（エチレン・オキシド滅菌・ホルマリン滅菌）に準じて下さい。

【使用上の注意】

- 使用前にキズ、割れ、サビ等の異常がないか確認し、異常が認められる場合は使用しないこと。
- 本製品は、リーマー等の器具で内筒部位が削れて金属部分の肉厚が薄くなることが予想されます。形状の変形などが確認された場合には使用を中止して下さい。
- 洗浄時に、金属ウール、金属タワシ等を使用しないでください。[切れ味が落ちます。]
- 切れ味の落ちた場合は、使用せず研磨などの処置として下さい。

【保管方法及び有効期間等】

長期間保管する場合は、高温・多湿を避け保管する。

【保守・点検に係る事項】

- 血液等汚れのついた製品は使用後速やかに洗浄して下さい。又、隙間に詰まった組織片は、使用後は必ず取り除いてください。[血液及び体組織の付着を防止するため。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

タクト医療株式会社

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-16-1

電話番号 03 (5644) 8711(代)

URL <http://tact-medical.co.jp>

製造国名：米国

製造業者名：Innomed, Inc. (イノメット社)

URL <http://www.innomed.net>