

類別等：機械器具（１）手術台及び治療台
一般医療機器 整形外科用手術台 35394000
販売名：イノメッド・ポジショナー

【警告】

加工・改造は絶対に行わないで下さい。[破損の原因となります]

【形状・構造及び原理等】

フロム・フィーマー&ティビア・トライアングル
本体：アルミ合金 パット部分：シリコン樹脂
2760-01[11インチ] 高さ 28cm 底辺 18.0cm 幅 23cm
2760-02[14インチ] 高さ 34cm 底辺 21.5cm 幅 23cm
2760-03[16インチ] 高さ 41cm 底辺 25.5cm 幅 23cm
* 上記の規格は概寸を表示しています。




【使用目的又は効果】

上肢又は下肢の整形外科的処置時に患者の身体の位置調整等を行い、正しい位置に固定する為に用いる。

【使用方法等】

フロム・フィーマー&ティビア・トライアングル

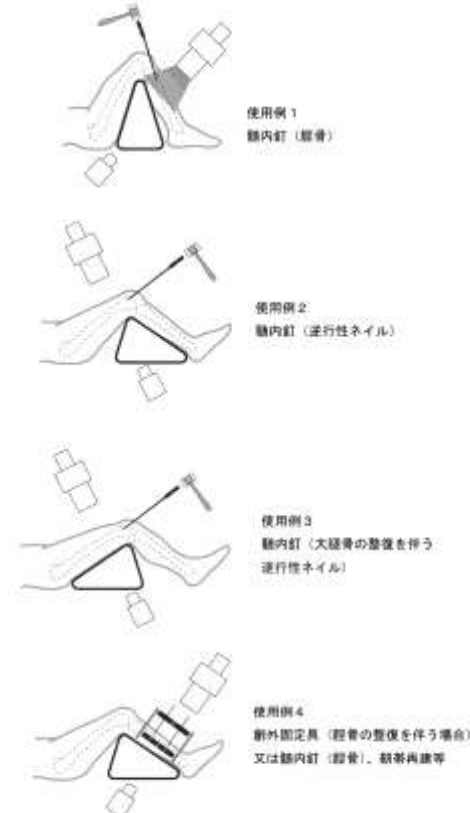

前記使用例を参考にして、本製品の設置を行って下さい。

【使用上の注意】

- 洗浄時に、金属ウール、金属タワシ等を使用しないでください。また、超音波洗浄器には不適です。[表面に傷が生じサビや腐食の原因になります。]
- 滅菌・洗浄によっては本製品のコーティングの変色等が生じることがあります。[使用に際しては問題ありません。]
- 本製品は、アルミ合金製ですので落下又は衝撃などにより変形が生じます。また、製品の変形によるストレス等のため溶接部位の破損が生じます。前記の症状を生じた場合には使用しないで下さい。
- 使用前にキズ、割れ、サビ等の異常がないか確認し、異常が認められる場合は使用しないで下さい。

【保管方法及び有効期間等】

長期間保管する場合は、高温・多湿を避け保管する。

【保守・点検に係る事項】

- パット及びストラップは、滅菌を重ねる毎に劣化及び変色していきますので、異常がある場合は新しい製品に交換してください。[製品寿命のため]
- 血液等汚れのついた製品は使用後速やかに洗浄してください。又、隙間に詰まった組織片は、使用後は必ず取り除いてください。[血液及び体組織の付着を防止するため。]
- 強アルカリ・強酸性洗剤は、本製品を腐食させる場合がありますので、洗浄の際は医療用中性洗剤をご使用下さい。[アルミ合金製のため]
- 洗浄の際には、長時間の浸漬洗浄は避けて下さい。また、洗剤が残らないように適切なすすぎを行い乾燥して下さい。[変色を防ぐため]
- 使用に先立ち、オートクレーブ又はエチレンオキサイドガスにより滅菌して下さい。(シリコン・パッド及びベルクロ・ストラップを装着したままでも滅菌は可能です。)
 - 滅菌方法及び滅菌条件
真空脱気プリバキューム高圧蒸気滅菌
132℃ 4分間以上(推奨)
その他の滅菌方法・条件に関しては、各施設にて採用している方法(エチレン・オキサイド滅菌・ホルマリン滅菌)に準じて下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

タクト医療株式会社
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-16-1
電話番号 03 (5644) 8711(代)
URL <http://tact-medical.co.jp>
製造国名：米国
製造業者名：Innomed, Inc. (イノメッド社)
URL <http://www.innomed.net>

類別等：機械器具（１）手術台及び治療台
一般医療機器 整形外科用手術台 35394000
販売名：イノメッド・ポジショナー

【警告】

加工・改造は絶対に行わないで下さい。[破損の原因
となります]

【形状・構造及び原理等】


ステンレススチール/ポリアセタール重合体（デルリン樹脂）/ポリエチレン

* ラテックス成分含有無

1. スタルバーグ・ヒップ・ポジショナー



2. ウィクソン・ヒップ・ポジショナー

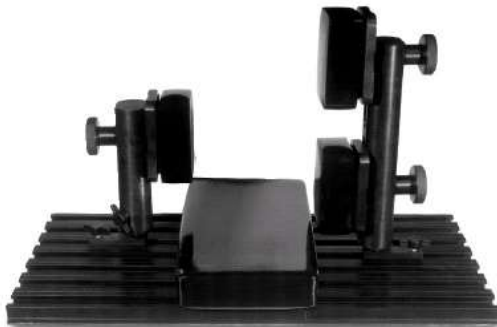

3. ウィクソン/スタルバーグ・アンテリアー・トランク・サポート



4. マルチアジャストメント・ヒップ・ポジショナー




【使用目的又は効果】

上肢又は下肢の整形外科的処置時に患者の身体の位置調整等を行い、正しい位置に固定する為に用いる。

【使用方法等】

1. スタルバーグ・ヒップ・ポジショナー

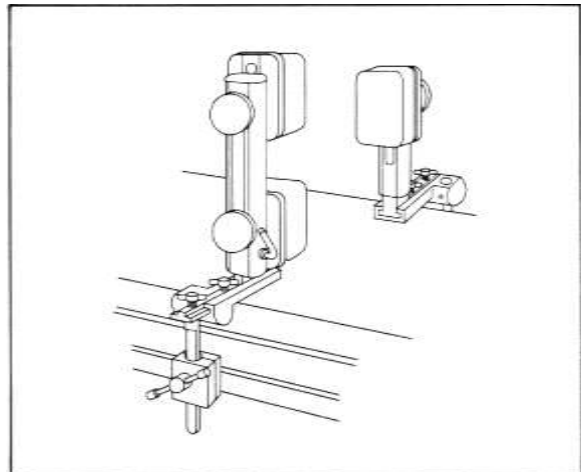

①手術台への設置方法(手術台に備え付けのアダプターを利用して、上図に従い直接取り付けを行います。)


◆取り付け方法◆



アップライト・バーを挿入後、スライディング・トラックに沿ってポストをスライドさせます。患者に合わせて幅を調節したら、ロッキング・ボルトを締め付け固定します。





ポストは、ローアジャストメントの範囲が可動です。

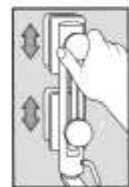

パッドの高さを調節し、適切な位置で固定します。


◆代表的な固定部位◆

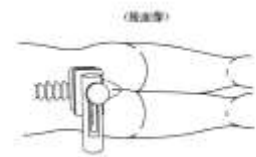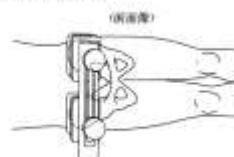

2. ウィクソン・ヒップ・ポジショナー

患者の腰の下に置き、上図に従い患者を側臥位の状態で固定します。（パット等の調整方法は前記参照のこと）

3. ウィクソン/スタルバーグ・アンテリアー・トランク・サポート

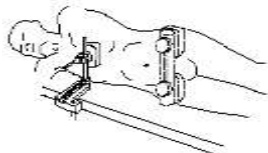

ヒップ・ポジショナーと併用して胸部を追加にて固定する際に使用する。（パット等の調節方法は、前記参照のこと）

【使用上の注意】

- 洗浄時に、金属ウール、金属タワシ等を使用しないでください。[表面に傷が生じサビや腐食の原因になります。]
- 使用前にキズ、割れ、サビ等の異常がないか確認し、異常が認められる場合は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

長期間保管する場合は、高温・多湿を避け保管する。

【保守・点検に係る事項】

- 薬液消毒等を実施した際に付着した薬液（イソジン等）は、手術後直ちに除去して下さい。[薬液（イソジン等）が固まりパット等の調整部位が動かなくなります。]
- パットは滅菌を行わないこと。パットの洗浄に関しては消毒用アルコール又はアルコールを含有する洗剤を使用して洗浄して下さい。
- 使用に際しては、なるべく滅菌を行わず薬液消毒にて消毒を行い使用して下さい。また、パッド等は高圧蒸気滅菌に対応していませんので注意して下さい。
- **パット以外の部品の滅菌方法について**（デルリン樹脂・ステンレススチール製部品）
滅菌方法 : 真空滅菌及び高圧蒸気滅菌
最低温度 : 132℃以上
滅菌サイクル : 6分以上
乾燥時間 : 0分以上

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

タクト医療株式会社
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-16-1
電話番号 03 (5644) 8711(代)
URL <http://tact-medical.co.jp>
製造国名 : 米国
製造業者名 : Innomed, Inc. (イノメット社)
URL <http://www.innomed.net>