

類別等：機械器具（58）整形用機械器具
一般医療機器 ドライバ及び拔出器 11345000

販売名：イノメッド・スクリュー・リムーバー

【警告】

加工・改造は絶対に行わないで下さい。[折損の原因
となります]

【形状・構造及び原理等】

【原理】

骨ネジを逆転させることで抜去する。

【原材料】

ステンレススチール（本体）
デルリン樹脂又はアルミニウム合金（ハンドル）

1. ユニバーサル スクリュードライバー セット




2. スター ビットドライバー



3. スクリュー エキストラクター セット



4. ロートン スクリュー エキストラクター

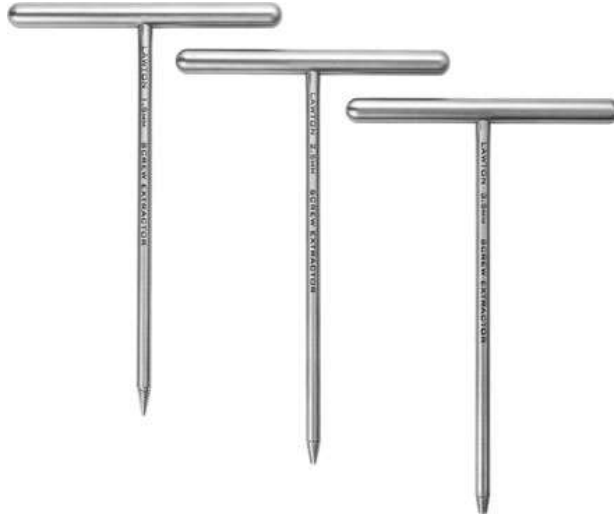

5. チェン スクリュー リムーバー



6. スクリュー リムーバー ロッキング プライヤー



【使用目的又は効果】


外科手術時に骨ネジを挿入又は除去する際に組み合
わせて用いる。

【使用方法等】

1. ユニバーサル スクリュードライバー セット及び 2. スター ビットドライバー
骨ネジに合ったドライバーを選択し、右又は左に回し骨ネジ
を締める又は緩める。

3. スクリュー エキストラクター セット

- スクリューのネジ山を Burnishing End 側にて削る。下左
図
➤ 注：深さ 1.5mm 以上の円柱の溝を作成してく
ださい。[Left Turn Thread End の先端が十分
にスクリューに噛合わない場合があります。]
- 削ったネジ山に Left Turn Thread End 側（螺旋状の
先端）を挿入し、逆回転にてスクリューを抜く。下右図

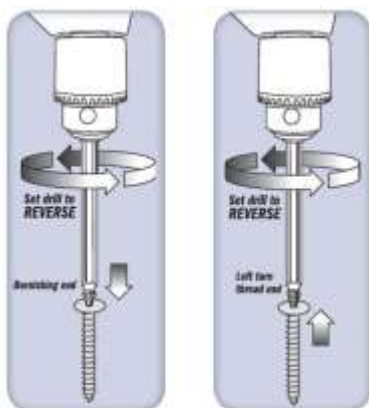

製造国名：米国

製造業者名：Innomed, Inc. (イノメット社)

URL <http://www.innomed.net>

5. チェン スクリュー リム-バル

骨ネジの周囲の骨を削り、骨ネジ摘出します。

6. スクリュー リム-バル ロッキング プライヤー



①のハンドルを開き、先端に抜去するスクリューを挟み回して抜去する。適度にロックしない場合は、②を回し調整して下さい。



抜去するスクリューを放す場合には、③のレバーを引いて下さい。

【使用上の注意】

- 使用前にキズ、割れ、サビ等の異常がないか確認し、異常が認められる場合は使用しないこと。
- 洗浄剤後は、水道水はなるべく使わず、蒸留水又はイオン交換水を使用しすぎを行って下さい。[成分に塩素、ヨウ素等が含まれていると、サビやシミの原因となります。]

【保管方法及び使用期間等】

長期間保管する場合は、高温・多湿を避け保管する。

【保守・点検に係る事項】

- 血液等汚れのついた製品は使用後速やかに洗浄してください。又、隙間に詰まった組織片は、使用後は必ず取り除いてください。[血液及び体組織の付着を防止するため。]
- 使用に先立ち、オートクレーブ又はエチレンオキシドガスにより滅菌して下さい。
 - 滅菌方法及び滅菌条件
真空脱気プリバキューム高圧蒸気滅菌
132℃ 4分間以上（推奨）
その他の滅菌方法・条件に関しては、各施設にて採用している方法（エチレン・オキシド滅菌・ホルマリン滅菌）に準じて下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

タクト医療株式会社

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-16-1

電話番号 03 (5644) 8711(代)

URL <http://tact-medical.co.jp>