

類別等：機械器具（58）整形用機械器具
一般医療機器 手動式整形外科用セメント除去器具 44597000

販売名：ミューラー・セメント・リムーバー・インスツルメント

【警告】

加工・改造は絶対に行わないで下さい。[折損の原因となります]


【形状・構造及び原理等】

本体：ステンレススチール

ハンドル部位：アルミニウム合金

先端のノミ又はフックによって、セメントを剥離する。

ミューラー・セメント・リムーバー・インスツルメント

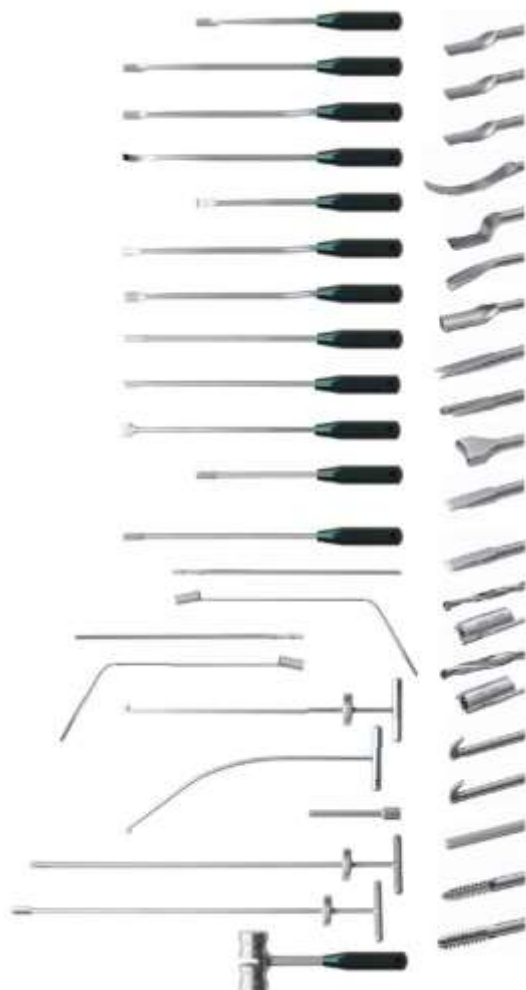

- ① ナローセメントリムーバーノミショート
- ② ナローセメントリムーバーノミロング
- ③ ナローオフセットセメントリムーバーノミ
- ④ アセタブラーチセル
- ⑤ オフセットチセル
- ⑥ フレアアングルチセル
- ⑦ ワイドチセル
- ⑧ V-スプリッター
- ⑨ セメントスプリットオステオーム
- ⑩ サドルパンチ
- ⑪ セメントリムーバーオステオームショート


- ⑫ セメントリムーバーオステオームロング
- ⑬ ドリル（スモール・ラージ）
- ⑭ ドリルガイド（スモール・ラージ）
- ⑮ ストレートセメントリムーバーフック
- ⑯ カーブセメントリムーバーフック
- ⑰ クロスバー
- ⑱ T-ハンドルコニカルタップ スモール
- ⑲ T-ハンドルコニカルタップ ラージ
- ⑳ スレッド付マレット

【使用目的又は効果】

人工股関節・人工膝関節の整形外科インプラントを除去時のセメントを除去する際に使用する。

【使用方法等】

セメント除去方法

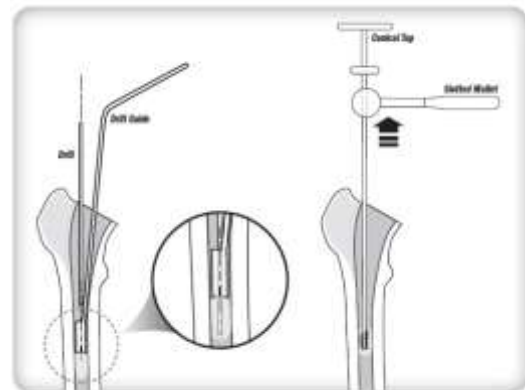

大腿骨ステムを抜去後、ドリルとドリルガイドを用いて穴を開ける。（上左図）次に、T-ハンドルコニカルタップを穴にねじ込み、スレッド付マレットを用いてセメントを除去する。（上右図）

次に、大腿骨近位部の残ったセメントをスプリッターを用いて、縦に崩し、近位中央部から遠位部に向かい除去する。大腿骨遠位部は、ゴージ等形状に合った物を用いセメントを崩しながら除去する。場合によってはセメントリムーバーフックを使用しセメントの遠位端を引っ掛け除去する。

【使用上の注意】

- 使用前にキズ、割れ、サビ等の異常がないか確認し、異常が認められる場合は使用しないこと。
- 洗浄時に、金属ウール、金属タワシ等を使用しないでください。[切れ味が落ちます。]
- 切れ味の落ちた場合は、使用せず研磨などの処置として下さい。

【保管方法及び使用期間等】

長期間保管する場合は、高温・多湿を避け保管する。

【保守・点検に係る事項】

- 血液等汚れのついた製品は使用後速やかに洗浄してください。又、隙間に詰まった組織片は、使用後は必ず取り除いてください。[血液及び体組織の付着を防止するため。]
- 使用に先立ち、オートクレーブ又はエチレンオキシドガスにより滅菌して下さい。

● 滅菌方法及び滅菌条件

真空脱気プリバキューム高圧蒸気滅菌

132℃ 4 分間以上（推奨）

その他の滅菌方法・条件に関しては、各施設にて採用している方法（エチレン・オキサイド滅菌・ホルマリン滅菌）に準じて下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

タクト医療株式会社

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-16-1

電話番号 03 (5644) 8711(代)

URL <http://tact-medical.co.jp>

製造国名：米国

製造業者名：Innomed, Inc. (イノメット社)

URL <http://www.innomed.net>