

販売名：イノメッド・カーパル・トンネル・リリース・システム

【警告】

- 本製品は、横手根靱帯の切除以外の目的に使用しないで下さい。[正中神経・尺骨神経等の重要組織を傷つける場合があります。]
- 加工・改造は絶対に行わないで下さい。[折損の原因となります]

【形状・構造及び原理等】

1. エバンス ユニバーサル カーパルトンネル ナイフ ガイド



全長：203mm プレートガイド幅：2mm/5mm

【原材料】

ステンレス・スチール

【原理】

本製品で他の組織を保護しながら切開する靱帯までプレートガイドを誘導する。


【使用目的又は効果】

手根管開放手術のために用いる手術器械

【使用方法等】


【使用方法】

- エバンス ユニバーサル カーパルトンネル ナイフ ガイド
手掌の皮膚を図に従って切開します。(ミニオープン法)

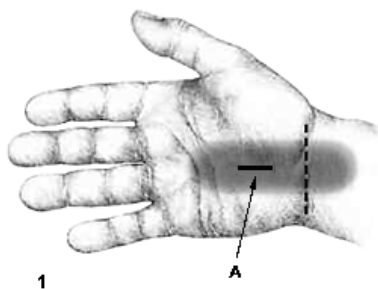

A: 切開部位 (手首のしわより約 2.54cm から手掌の中央のしわに沿って 1.5~2.0cm 程度切開する。)


開口部より横手根靱帯の遠位端を確認し、手根管内に本製品を挿入する。製品の先端をCの位置まで挿入し、ナイフガイドが横手根靱帯全体をカバーするように設置する。

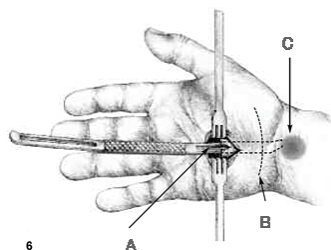

A: ナイフガイド B: 横手根靱帯の近位端

ナイフガイドに沿い、ハサミ又はナイフを用いて横手根靱帯を切除し、圧迫神経を開放する。(ナイフガイドは 2mm と 5mm の幅があります、使用するナイフ等により使い分けて下さい。)

(図は、ナイフの使用例)

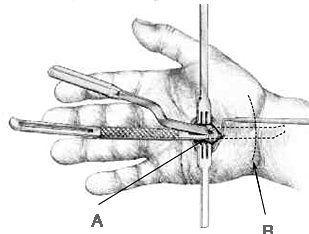

【使用上の注意】

- 洗浄時に、金属ウール、金属タワシ等を使用しないでください。
- 使用前にキズ、割れ、サビ等の異常がないか確認し、異常が認められる場合は使用しないこと。
- 洗浄剤後は、水道水はなるべく使わず、蒸留水又はイオン交換水を使用しすぎを行って下さい。[成分に塩素、ヨウ素等が含まれていると、サビやシミの原因となります。]

【保管方法及び有効期間等】

長期間保管する場合は、高温・多湿を避け保管する。

【保守・点検に係る事項】

- 血液等汚れのついた製品は使用後速やかに洗浄してください。又、隙間に詰まった組織片は、使用後は必ず取り除いてください。[血液及び体組織の付着を防止するため。]
- 使用に先立ち、オートクレーブ又はエチレンオキサイドガスにより滅菌して下さい。
 - 滅菌方法及び滅菌条件
高圧蒸気滅菌
121℃ 20 分間以上 (推奨)
その他の滅菌方法・条件に関しては、各施設にて採用している方法 (エチレン・オキサイド滅菌・ホルマリン滅菌) に準じて下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

タクト医療株式会社
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-16-1
電話番号 03 (5644) 8711(代)
URL <http://tact-medical.co.jp>
製造国名：米国
製造業者名：Innomed, Inc. (イノメッド社)
URL <http://www.innomed.net>