

販売名：イノメッド・カップライナー・エクストラクター

【警告】

加工・改造は絶対に行わないで下さい。[折損の原因となります]

【形状・構造及び原理等】

ステンレススチール合金

先端の爪又は刃の部分で把持又は切削する。

1. アセタブラー・カップ・エクストラクター



2. アセタブラー ライナー リムーバブル オステオーム



3. クトルナ カップ キャナル チゼル



4. スター・カップ・ライナー・デイスインゲージャー



5. ヒップ カップ ライナー リムーバブル ドリル



【使用目的又は効果】

人工股関節の整形外科インプラントの抜去に用いられる。

【使用方法等】

アセタブラー・カップ・エクストラクター使用方法

カップ ライナー一体型カップ のライナーの内側に、本製品の先端を挿入します。後方にあるハンドルを回すと先端の爪が出てライナーを固定します。スライドハンマーを取り付けカップ を抜去します。（カップ の抜去の際には、ノミ等でカップ と骨の固定力を低下させてから抜去して下さい。）




アセタブラー ライナー リムーバブル オステオーム使用方法

ポリエチレンライナーが専用の器具で抜去出来ない場合、本製品を用いて除去します。

クトルナ カップ キャナル チゼル

本製品をカップ と骨の隙間に挿入して、除去します。


スター・カップ・ライナー・デイスインゲージャー

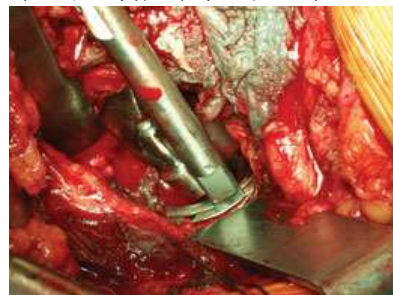

先端をカップのくぼみに当て、衝撃を加えます。反対側にも同じように衝撃を加え、カップを揺さぶります。数回衝撃を加えてことで、ライナーが緩みます。

ヒップ カップ ライナー リムーバブル ドリル

ライナーに先端のスレッドを押し当てドリリングをします。カップの内側に先端が到達したら、さらにライナーが浮いてくるまでドリリングを行って下さい。

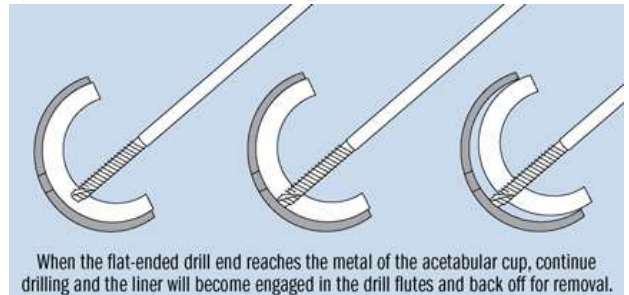

【使用上の注意】

- 使用前にキズ、割れ、サビ等の異常がないか確認し、異常が認められる場合は使用しないこと。
- 洗浄剤後は、水道水はなるべく使わず、蒸留水又はイオン交換水を使用しすぎを行って下さい。[成分に塩素、ヨウ素等が含まれていると、サビやシミの原因となります。]

【保管方法及び有効期間等】

長期間保管する場合は、高温・多湿を避け保管する。

【保守・点検に係る事項】

- 血液等汚れのついた製品は使用後速やかに洗浄してください。又、隙間に詰まった組織片は、使用後は必ず取り除いてください。[血液及び体組織の付着を防止するため。]
- 使用に先立ち、オートクレーブ又はエチレンオキシドガスにより滅菌して下さい。
 - 滅菌方法及び滅菌条件
 - * ステンレス製品
 - 真空脱気プリバキューム高圧蒸気滅菌
 - 132℃ 4分間以上（推奨）
 - その他の滅菌方法・条件に関しては、各施設にて採用している方法に準じて下さい。
- 本製品は複雑な構造を有する製品のため血液などが隙間に付着することが予想されます洗浄の際には血液溶解剤又は蛋白質分解酵素剤の前処理を行い洗浄、滅菌を行って下さい。[通常の洗浄では、隙間部分に付着した血液・体組織等が除去しきれない恐れがあります。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

タクト医療株式会社

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-16-1

電話番号 03 (5644) 8711(代)

URL <http://tact-medical.co.jp>

製造国名：米国

製造業者名：Innomed, Inc. (イノメット社)

URL <http://www.innomed.net>