

機械器具 75 脱疾治療用器具
一般医療機器 一般的名称：脱疾治療用ストラップ JMDN コード：30883000

タマガワ骨盤底筋サポーター

【警告】


1. 血行障害や心機能等の疾患を有する方は使用前に医師に相談すること。
2. 骨盤臓器脱(膀胱瘤、子宮脱、直腸脱等)の治療、妊娠中や出産直後で通院中の方は、ご使用前にかかりつけの医師に相談し、医師の指示に従って使用してください。

【禁忌・禁止】

- ・医師から不適當と判断された人
- ・使用素材に対する過敏症がある人

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

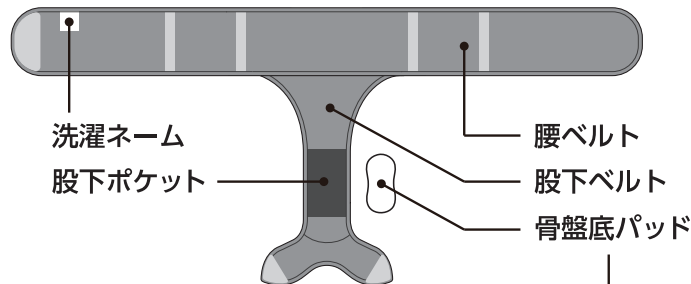

〈素材〉

- ・本体：ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
- ・骨盤底パッド：ポリエチレン、EVA


アーチ面：上側（身体側）
↑ 平らな面：下側 ↓

〈適応範囲〉

サイズ	骨盤回り
S-M	80～100cm
L-LL	95～115cm

サイズ計測位置(骨盤回り)

骨盤の一番出っ張っている骨から約5cm
下がった位置の周囲を計測してください。

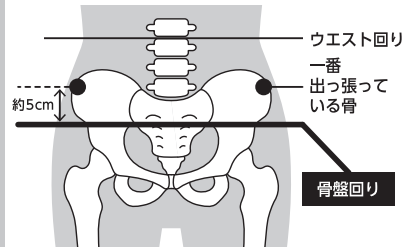

2. 原理


腰ベルトを装着し、股下ベルトを正面側へ引き上げて腰ベルトに面ファスナーで固定。
股下ベルトと骨盤底パッドが下垂した臓器を正常な位置に保持する。

【使用目的又は効果】


骨盤臓器脱の症状を有する患者が下着の上に重ねて履くことにより、下垂した臓器を正常な位置に保持する。

【使用方法等】 下着やスパッツ等の上に着用してください。


- 1** 骨盤の骨が一番出っ張っている位置に腰ベルトの上辺がくるように高さを合わせます。

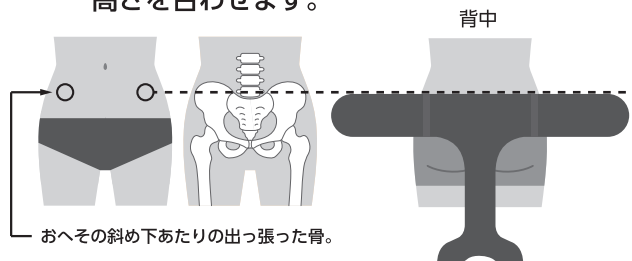

- 2** 腰ベルトをしっかり締めながら巻きつけ、とめます。

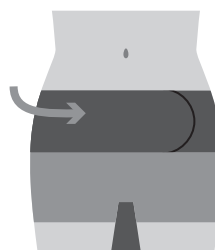

- 3** 股下ベルトを正面へ向かって引き上げ腰ベルトへとめます。

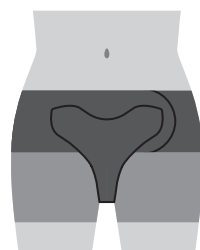

※骨盤底パッドは股下ポケットにあらかじめセットされています。

【使用上の注意】

- ・本品は着用している間の症状を緩和するものです。治療には医師への相談が必要です。
- ・初めのうちは1～2時間程度の短い時間でご使用いただき、痛みやかゆみ等の異常がないか確認して、徐々に使用時間を長くしてください。
- ・使用中、または使用後に痛み・かぶれ・しびれ・むくみ等、何らかの症状があらわれた時は、ただちに使用を中止し医師にご相談ください。
- ・本品は女性用です。
- ・本来の用途以外には使用しないでください。
- ・妊娠中、またはその可能性のある方はご使用をお避けください。
- ・就寝時は使用しないでください。
- ・骨盤底パッドは高温や衝撃で変形することがありますので、お取扱いにご注意ください。
- ・骨盤底パッドは保管状態により変色する場合がありますが、品質に問題はありません。
- ・押圧が強くなりすぎるため、自転車に乗る際は着用をお避けください。

〈お手入れ方法〉

- ・本体……水またはぬるま湯で軽く押し洗いしてください。
洗濯した後は形を整えて陰干ししてください。
- ・パッド…本体から取り出し、手洗いしたのちタオル等でやさしく水気を取り、直射日光の当たらない風通しの良い場所で平干ししてください。
変形の恐れがありますので洗濯バサミ等のご使用はおやめください。



〈洗濯時のご注意〉

- ・色移りを防ぐため、単品で洗ってください。
- ・面ファスナーをとめて洗濯してください。
- ・漂白剤は使用しないでください。
- ・ドライクリーニングはしないでください。
- ・長時間水に浸けることは避けてください。
- ・洗濯後は濡れたまま放置せず、すぐに干してください。
- ・アイロンは使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

乳幼児の手の届かない所に保管してください。

高温、直射日光を避けて保管してください。

2. 耐用期間

面ファスナーのつきが弱くなった際や、骨盤底パッドが収縮もしくは変形等により骨盤臓器脱への効果が得られなくなった際は買い替えが必要です。

【保守・点検に係る事項】

着用前に破れやほつれがないか確認してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】



製造販売業者
玉川衛材株式会社
〒102-0071

東京都千代田区富士見 1-8-19

玉川衛材(株)お客様相談窓口

TEL.03-4334-8857

受付時間 10:00～17:00(土・日・祝日を除く)

<https://www.tamagawa-eizai.co.jp>

RB2-T