

＊＊２００８年８月２０日改訂（第３版）

＊２００７年３月 １日改訂（第２版）

＊＊医療機器承認番号：２２００ＢＺＸ０１０６００００

＊機械器具 ６ 呼吸補助器

＊管理医療機器 空気・酸素マスク JMDN コード 35171000

酸素マスク

再使用禁止

【警告】


- ・本品使用中に異常が認められたときは、速やかに使用を中止し、適切な処置を施すこと。〔重篤な健康被害が発生するおそれがある。〕

＊＊【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・本品に改造等、再加工をしないこと。〔本品の損傷又は強度が変わることにより、患者への損傷を生じさせることがある。〕

＊＊【形状・構造及び原理等】

- ・本品は酸素マスクにチューブが接続されている。

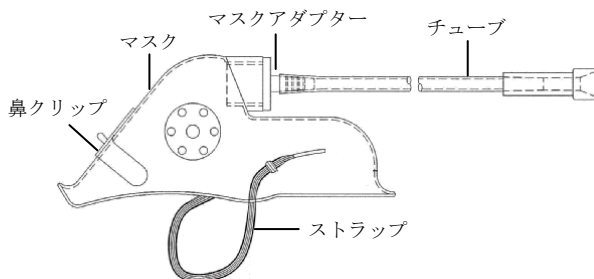

本品はポリ塩化ビニル(可塑剤：フタル酸ジオクチル)を使用している。

＊＊【使用目的、効能又は効果】

本品は患者の気道に酸素ガスを供給することを目的とし、鼻と口に設置して使用する。

＊＊【操作方法又は使用方法等】

1. マスクを患者の顔に被せ、鼻と口の中央に合わせます。ストラップは耳の下を通し、首の周りに位置させます。
2. 静かにストラップの端を引いて調節し、患者に違和感を与えないように適切に取り付けます。
3. 鼻クリップを鼻の曲線にしっかりと合うように調節します。
4. チューブの末端を酸素源と接続します。

使用方法に関連する使用上の注意

- ・使用に先立ち本添付文書を熟読し、その指示に従って本品を使用すること。
- ・併用する医療機器及び薬剤の添付文書、取扱説明書を熟読し、その指示に従って本品を使用すること。

＊＊【使用上の注意】

1. 使用注意

- ・マスクは変形させないこと。
- ・チューブとマスクアダプターはしっかりと接続すること。

2. 重要な基本的注意

- ・使用前に本品に破損、異常等が無いことを確認すること。万一、包装が破損、汚損又は開封されているものは使用しないこと。
- ・本品を本添付文書の指示に従わずに使用した結果生じた被害について、タカイ医科工業株式会社は一切責任を負わない。

3. その他の注意

- ・本品の包装開封後は直ちに使用し、使用後は医療廃棄物として安全に適切な処分をすること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿、殺菌灯等の紫外線を避けて清潔な状態で冷暗所に保管すること。

【包装】

１個／袋入り

＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：タカイ医科工業株式会社

東京都文京区湯島 2-31-25

TEL 03-3814-7761 (代)

製造元：Allied Healthcare Products Inc.

(アメリカ合衆国 ミズーリ州)

 **Takai**