

類別：機械器具 80 はり又はきゅう用器具
一般医療機器 一般的名称：家庭用貼付型接触粒 (JMDN コード 71026000)
販売名：スペース・オブ・ゲルマ

警告

誤飲を防ぐために下記注意を守ってください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師にご相談下さい。

- ・小児（6才以下）には使用しないで下さい。
- ・小児及び監督を必要とする方の手の届かない場所に保管してください。
(小児及び監督を必要とする方が手に取ると、誤って飲み込む恐れがあります。)

禁忌・禁止


1. 肌に異常のある場合は使用しないでください。症状が悪化する恐れがあります。
2. 目の周囲や粘膜に貼らないでください。炎症を起こす恐れがあります。

形状・構造及び原理等


(1) 本体の構造と各部の名称



本体

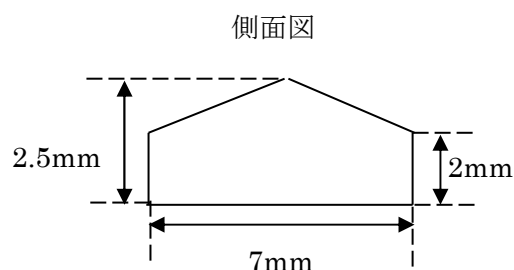

側面図

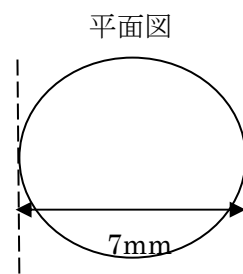

平面図

(2) 本体全体の寸法及び重量

寸法：直径約 7×厚み約 2.5 (mm)

重量：約 0.40 (g)

(3) 身体に接触する部分の組成

チップ：ゲルマニウム

(4) 構成

本体：チップ（接触粒） 4 個又は 10 個

添付文書（本書）

交換用粘着シート



(5) 原理

粘着シートの中央に粒状の硬質物を付し、身体のコリの部分に貼付することにより圧迫し、「コリの緩解」を目的とする。

コリの緩解を目的とし、一般家庭で使用する機器であること。

使用目的、効能又は効果

装着部位におけるコリの緩解

操作方法又は使用方法等

- (1) 肩、首すじ、腰などコリのある部分に絆創膏又は粘着性伸縮包帯等に本器を 1 個あて、貼付してください。
- (2) 貼り付ける前に、貼り付け箇所の汚れや汗をふきとり、清潔にしてください。
- (3) 2、3 日毎に貼りかえて、症状が緩和されるまで使用してください。
- (4) 本器はビニール袋に入れてあり、各自絆創膏又は粘着性伸縮包帯等に貼り付けて使用してください。

使用上の注意

- (1) 傷口に直接貼らないでください。
- (2) 本品の使用により発疹・発赤（腫脹）・かゆみ等の症状があらわれた場合には、ただちに使用を中止してください。
- (3) 同じところに繰り返し貼らず、2～3 日ごとに貼る位置をずらしてください。

貯蔵・保管方法及び使用期間等

- (1) 使用期間等
とくに定めはありません。
- (2) 再使用のために必要な処置
絆創膏又は粘着性伸縮包帯等の粘着力が弱くなったら、絆創膏又は粘着性伸縮包帯等からチップ部を取り外し、絆創膏又は粘着性伸縮包帯等にチップを取り付けてください。
- (3) 使用後および保管の注意事項
直射日光の当たらない涼しいところに保管してください。

保守・点検に係る事項

交換用粘着シートは、絆創膏又は弊社の指定品をお使いください。

包装単位

本体一箱：チップ（接触粒） 4 個又は 10 個入り

製造販売業者及び製造業者の名称及び住所

製造販売業者：タイヨウ株式会社

住所：神奈川県平塚市紅谷町 8-1 6-8 0 6

電話：0463-23-8819

製造業者：タイヨウ株式会社

住所：神奈川県秦野市平沢 3332-14