

機械器具(06) 呼吸補助器
一般医療機器 人工呼吸器用マスク 70564000
リヒトマスク


【警告】

滅菌・消毒をおこなうこと。
[相互感染を防止するために実施すること。]
本品は天然ゴム製品です。使用に当たっては
【使用上の注意】を参照すること。

【禁忌・禁止】

過去にアナフィラキシー症状様の経験がある医療関係者
及び患者への使用は禁止。

【形状・構造及び原理等】

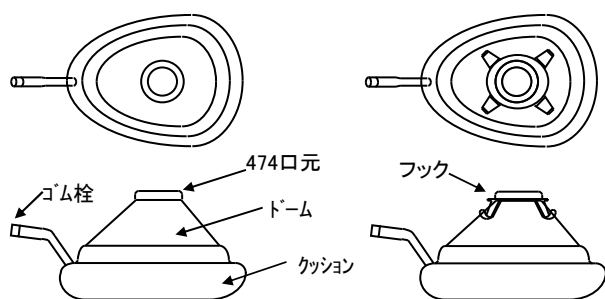

BL1003・BL1004・BL1005

BL1013・BL1014・BL1015

シリーズ別サイズ表

シリーズ	番号	全長(mm)	巾(mm)	フック	接続
リヒトマスクNo. 3	BL1003	125±10%	98±10%	-	22F
リヒトマスクNo. 4	BL1004	108±10%	88±10%	-	22F
リヒトマスクNo. 5	BL1005	95±10%	78±10%	-	22F
リヒトマスクNo. 3フック付	BL1013	125±10%	98±10%	有	22F
リヒトマスクNo. 4フック付	BL1014	108±10%	88±10%	有	22F
リヒトマスクNo. 5フック付	BL1015	95±10%	78±10%	有	22F

原材料：

クッション	天然ゴム	15Mドーム	アクリル
ドーム	ポリスチレン	ゴム栓	天然ゴム
474口元	天然ゴム	フック	真鍮(カドメッキ) ステンレス

【使用目的又は効果】

人工呼吸器の呼吸回路に接続し、患者の鼻、口をおおい、患者に
人工呼吸器からのガスを供給するためのマスクである。

【使用方法等】

- 患者のサイズにあったマスクを選択する。
- バンドにて固定が必要な場合は本品のフック付マスクを選択する。
- マスクを呼吸回路に接続する。
- マスクを患者の顔に装着する。
- 正しい位置に装着していることを確認する。

【使用上の注意】

使用注意：次の患者には慎重に適用すること

- 天然ゴムは、かゆみ、発赤、じん麻疹、むくみ、発熱、
呼吸困難、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状を
まれに起こすことがある。このような症状を起こした場合
には、直ちに使用を中止し、医師に相談すること。
- 天然ゴムと接触する機会の多い方々は天然ゴムアレルギー
発症のハイリスクグループと考えられるため、使用に関し
ては注意すること。

併用医療用具：下記の製品とは併用しない。

- 十分な接続が維持できない製品。
- 接続により閉塞をおこす製品。
- 離脱が困難な製品。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 高温多湿を避けて保管する。
- 直射日光を避け、通気性の良い場所に保管する。
- 水に濡れないように保管する。
- 蛍光灯下やオゾンが発生する機器の周辺等に保管しない。
- 過度な重みがかからないように配慮する。

2. 使用期限

本品の使用期限は1年を推奨します。ただし劣化や破損が認め
られる場合は、医療用廃棄物として処分してください。

【保守・点検に係わる事項】

1. 清掃方法（洗浄方法）

- 使用後はよく水洗いをする。
- 脱水し乾燥させる。他の製品等と接触しないようする。

2. 消毒方法

消毒薬は、消毒薬メーカーの推奨する使用方法により利用
すること。

3. 滅菌方法

- 洗浄方法に示すとおり洗浄および乾燥をおこなう。
- 滅菌はEOG滅菌とする。
- 滅菌パックに入れて滅菌すること。
- 金属や他の滅菌物と直接ふれないようにすること。

4. 保守・点検に係わる注意事項

- 紫外線滅菌、オートクレーブ滅菌はおこなわない。
- 油、油脂、ガソリン、キシレン等の有機溶剤と接触させ
ない。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者の名称：田中ゴム株式会社

電話番号：048-797-5681