

機械器具74 医薬品注入器
高度管理医療機器 加圧式医薬品注入器(JMDNコード:12504003)

クーデック®バルーンジェクター® (DEHPフリー)


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止。
- 再滅菌禁止。
- 再充填禁止。
- 脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含有する製剤、油性成分を含む医薬品、界面活性剤又はエタノール等の溶解補助剤を含む医薬品の投与時に使用しないこと〔薬液によりメスコネクターにひび割れが生じ、血液及び薬液漏れ、空気混入等の可能性がある。なお、ライン交換時の締め直し、過度な締め付け及び増し締め等は、ひび割れの発生を助長する要因となる〕。

【形状・構造及び原理等】

本製品は、留置したカテーテルに接続し、薬液（抗がん剤、局所麻酔剤、鎮痛剤等）を持続的に注入する加圧式医薬品注入器であり、薬液充填部はバルーン形状（ポンプ部）をしている。ポンプ部に流量コントロールのためのスパイラル装置（流量制御装置）、接続チューブを組み合わせ使用。本製品は持ち運び可能な携帯型ポンプである。

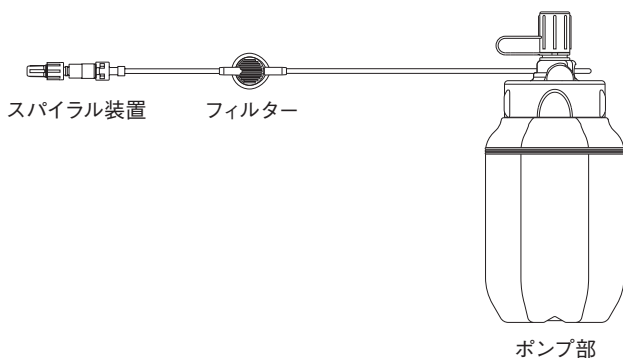

本製品はポリ塩化ビニル（可塑剤：トリメリット酸トリ（2-エチルヘキシル））を使用している。

<作動・動作原理>

本製品は薬液充填した後、バルーンの収縮力を駆動源として薬液を吐出するものである。
ポンプ部に充填した薬液は取り出せない製品である。

【使用目的又は効果】

本製品は医家向けの加圧式医薬品注入器で、滅菌済みのディスプレイ製品である。
医療機関の手術室、ICU、病室などにおいて患者の硬膜外腔、静脈などに留置したカテーテルに接続し、薬液（抗がん剤、局所麻酔薬、鎮痛剤等）の持続注入を行う。

【使用方法等】

1. 操作準備
本製品を準備する（ポンプ部容量、流量を選択する）。
患者側先端にカテーテルを取り付ける。
2. 薬液を充填する
 - 1) 薬液充填の手順
 - (1) シリンジに所定量の薬液を入れておく。
 - (2) ポンプ部の注入ポートを外し、逆止弁を介しゆっくりと薬液を充填し、蓋をする。
※ 輸液用連結管を使用して薬液を充填する場合は、ポンプ部のキャップを外し、輸液用連結管のオスコネクターを装着する。メスコネクターに市販のシリンジを装着し、シリンジの吸い子の往復操作によって、薬液を一方方向に注入する。
 - 2) 接続チューブの先端より薬液が流出することを確認する。（エア抜き）
3. 注入開始
接続チューブ先端を留置カテーテルなどに接続し注入を開始する。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 設定する流量に関しては、対象部位、患者の体格と年齢、使用者の経験及び技法を勘案して行うこと。
2. 接続部は締め付け器具等で過度に締めすぎないこと〔ひび割れが生じて液漏れのおそれがある〕。
3. 本製品の使用は、定められた手順により操作し、本体内部にたまった空気は必ず排出すること。
4. 薬液の充填時はガラス片等の異物の混入に注意すること〔注入ポートからの液漏れのおそれがある〕。
5. 薬液の充填はゆっくりと行うこと〔注入ポートからの液漏れのおそれがある〕。
6. 薬液の充填時は注入ポートに過度な負荷を加えないこと〔注入ポートからの液漏れのおそれがある〕。
7. 薬液の充填操作は無菌的に行うこと〔感染のおそれがある〕。
8. 薬液の充填容量は規定容量とすること〔規定容量より多く充填した場合、規定流量より低い流量で注入され、液漏れのおそれがある。また規定容量より少なく充填した場合、規定流量より高い流量で注入される〕。
9. 薬液の充填後は速やかに使用すること〔過小注入や注入停止のおそれがある〕。
10. 薬液充填後は注入ポートにキャップを必ずかぶせること〔注入ポートからの液漏れのおそれがある〕。
11. 本体、フィルター、コネクター等には有機溶剤（アルコール等）が付着しないようにすること〔注入停止や破損のおそれがある〕。
12. 本製品の表示流量は生理食塩水を用い、室温（23℃）で設定している。薬液の濃度、粘度、温度等により流量は変化するので注意すること。
13. 接続されるカテーテルの長さ、内径、挿入部位等が流量に影響を与える場合があるので注意すること。
14. ポンプ部とチューブ内に若干の薬液が残ることがある。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 高圧酸素室内では使用しないこと〔破損、過注入、液漏れのおそれがある〕。
2. 高い粘性又はエマルジョン状の薬液は使用しないこと〔流量制御部の細管やフィルターの目詰まりにより閉塞の原因となるおそれがある〕。
3. 神経ブロック、皮下または動脈への注入の場合、吐出流量が規定値よりも低下する、もしくは注入停止のおそれがあるので注意すること。
4. 本製品の使用前や使用中は定期的にかテーテル、チューブ、コネクターの接続状態やチューブの折れなど点検を行い、本製品が正常に動作することを確認する。
5. 結晶化する可能性がある薬剤を使用する際は、正常に注入が行われているかどうかを定期的に確認すること〔輸液経路が閉塞されるおそれがある〕。
6. 液漏れ、液が流出しない等、不具合が認められた場合、ただちに使用を中止すること〔薬液による周囲汚染のおそれがある〕。
7. 本製品と他の輸液システムを並行して使用しないこと〔他の輸液システムを接続し並行輸液を行った場合、本製品の仕様通りに動作しないおそれがある〕。
8. ポンプ部とラインの患者接続部の高低差をできる限り小さくすること〔流量変動のおそれがある〕。
9. 本製品を注射針などの鋭利な物で傷をつけないように注意すること。
10. 本製品はプラスチック製なので、無理な力を付加したり、過度な衝撃を与えないこと〔破損のおそれがある〕。
11. 本製品は落下等には注意すること〔衝撃により液漏れ、破損のおそれがある〕。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

1. 水のかからない場所に保管すること。
2. 温度、湿度、風通し、日光、紫外線、埃、塩分や硫黄などを含んだ空気などにより悪影響の生じる恐れのない場所に保管すること。
3. 振動、衝撃等、製品の安定状態に注意すること。
4. 化学薬品のそばやガスの発生するような場所に保管しないこと。

＜有効期間＞

使用期限は外箱及び滅菌包装に記載。（自己認証（当社データ）による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

大研医器株式会社

TEL 0725-51-2138

＜製造業者＞

大研医器株式会社