

機械器具 01 手術台及び治療台
一般医療機器 眼科用手術台 JMDNコード：37225000

患者ベッド1125


【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

1. 爆発性ガスによる爆発の危険性がある場所。
2. 可燃性麻酔薬、アルコール又はベンジン等の揮発性溶剤がある場所。

【形状・構造及び原理等】

【形状】

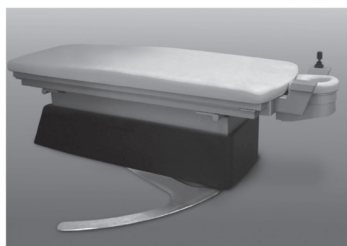

【外観寸法及び重量】

1. 寸法（幅）×（奥行）×（高さ）：680×2136×540-810mm
2. 重量：298kg

【電氣的定格】

- 定格電源電圧：交流230V
定格電源周波数：50Hz

【機器の分類】

- 電撃に対する保護の形式による分類：クラスI機器
電撃に対する保護の程度による装着部の分類：B形装着部
水の有害な侵入に対する保護の程度による分類：IP20

【性能及び安全性に関する規格】

1. 作動速度
 - (1) ノーマル：左右6mm/秒、前後14mm/秒、上下4mm/秒
 - (2) ターボ：左右12mm/秒、前後30mm/秒、上下8mm/秒
2. 最大搭載荷重：180kg

【使用目的又は効果】

眼科手術時に患者の身体を支持するためのベッドである。

【使用方法等】

1. 主電源スイッチをONにする。
2. コントロールパネル及び左コントロールパネルを用いてベッドを操作する。
3. 使用が終了したら、主電源スイッチをOFFにする。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. 本装置を多目的コンセントや移動式コンセントに接続しないこと。
2. 患者ベッド作動中は患者の頭部に注意を払うこと。
3. 患者ベッドを作動させる際には、患者、操作者等が挟まったり、圧迫されたりしないように注意すること。
4. 患者ベッドの作動は短時間に行うこと。最大パワーでの作動時間は2.5分である。2.5分を超えた作動の後、最低10分間の休止が必要になる。

【使用上の注意】

＜相互作用＞（他の医薬品、医療機器等との併用に関すること）

＜併用禁忌＞（併用しないこと）

本装置用でないアクセサリ類を使用しないこと。[システムの性能に影響をあたえ、患者へ危害をもたらす可能性がある。]

＜その他の注意＞

1. 本装置の開梱、設置、点検、修理並びに起動は、弊社のフィールドサービス担当者が実施する。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法・耐用期間[自己認証（当社データ）による]に関しては本製品の取扱説明書を参照すること。

【保守・点検に係る事項】

1. すべての修理、保守点検作業は、弊社フィールドサービス担当者又は弊社が認定した技術スタッフのみが行うこと。
2. 保守間隔
・フィールドサービス担当者によるシステム点検：半年に1回実施

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】

日本アルコン株式会社

【お問い合わせ窓口】

日本アルコン株式会社
電話番号：0120-825-266（メディカル統括部 学術情報部）