

*機械器具 39 医療用鉗子

*管理医療機器 *単回使用鉗子 *JMDNコード：10861002

グリスハーバー レボリューション[®] DSP 鉗子

再使用禁止

【禁忌・禁止】

<使用方法>

1. 本製品は、使用1回限りの製品である。一度開封した製品の再滅菌、再使用はしないこと。
2. 本製品は、アルコン[®]眼科用手術装置以外には使用しないこと。[「相互作用」の項参照]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*【製造販売業者】

日本アルコン株式会社

**【お問い合わせ窓口】

日本アルコン株式会社


電話番号：0120-825-266（メディカル統括部 学術情報部）

*【製造業者】

Alcon Grieshaber AG スイス

【形状・構造及び原理等】

本製品は、眼科手術にて用いる使用1回限りの滅菌済みの鉗子である。

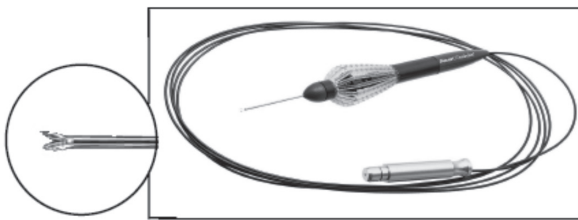

【使用目的又は効果】

眼科手術の際、病変組織、異物等を把持、又は圧迫もしくは圧挫等のために用いる器具

【使用方法等】

1. パッケージを開封し、内部のトレーを無菌的に取り出す。
2. 本体を内部のトレーから先端部分が周りに触れないように慎重に取り出す。
3. ファイバーコネクタの先端を光源に接続する。その際、コネクタが完全に接続されていることを確認すること。
4. 光源をオンにし、本製品が正確に作動するか確認する。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 本製品を使用する前に必ず正常に作動するか、又は異常がないかを確認すること。
2. 網膜への光障害の危険性を減らすため、光の強さと網膜に照射する時間を最小限にすること。

【使用上の注意】

相互作用（他の医薬品、医療機器等との併用に関すること）

【併用禁忌】（併用しないこと）

本製品は、アルコン眼科用手術装置以外の機械には使用しないこと。
[弊社製品以外の機械で使用するとシステムの性能に影響を与え、患者に危害を与えるおそれがある。]

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

高温、多湿、直射日光、水濡れを避けて保管すること。

<有効期間・使用の期限（耐用期間）>

包装の使用期限の欄に表示