

900355508

11-1 後囊ポリッシャー

**2017年5月改訂（第3版、新記載要領に基づく改訂）

医療機器承認番号：22000BZX01098000

*2008年12月改訂（第2版）

*機械器具 47 注射針及び穿刺針

*管理医療機器 *単回使用眼科手術用カニューレ *JMDNコード：34899032

ポリッシャー

（後囊ポリッシャー）

再使用禁止

【禁忌・禁止】


＜使用方法＞

1. 本製品は、使用1回限りの製品である。一度開封した製品の再滅菌、再使用はしないこと。
2. 本製品は、アルコン®眼科用手術装置以外には使用しないこと。[「相互作用」の項参照]

【形状・構造及び原理等】

本製品は、角度を持つ眼科手術用やすりであり、白内障手術の際、水晶体核除去後の後囊の研磨に使用する。

【製品外観図】

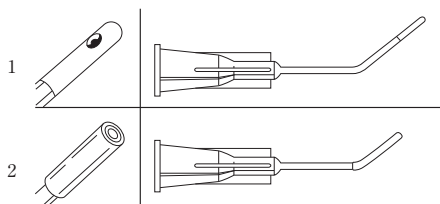

1. 後囊ポリッシャー 21G 0.3mm サイドポート（先端部粗表面）
2. 後囊ポリッシャー 27G テリースクイーズ

【使用目的又は効果】

眼科手術に使用するやすり

【使用方法等】

白内障手術装置付属の灌流ハンドピースに接続して使用する。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

本製品を使用する前に必ず異常がないかを確認すること。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

本製品を使用する際には、装置の調節を必要とする場合があるため、使用する手術装置が適切に設定されていることを確認すること。

＜相互作用＞

（他の医薬品、医療機器等との併用に関すること）

＜併用禁忌＞（併用しないこと）

本製品は、アルコン®眼科用手術装置以外の機械には使用しないこと。[弊社製品以外の機械で使用するシステム性能に影響を与え、患者に危害を与える恐れがある。]

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

高温、多湿、直射日光、水濡れを避けて保管すること。

＜有効期間・使用の期限（耐用期間）＞

包装の使用期限の欄に表示

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】

日本アルコン株式会社

**【お問い合わせ窓口】

日本アルコン株式会社

電話番号：0120-825-266（メディカル統括部 学術情報部）

**【製造業者】

Alcon Laboratories, Inc. アメリカ合衆国