

## 機械器具 39 医療用鉗子

管理医療機器 単回使用鉗子 JMDNコード：10861002

## グリスハーバー リフレックス™ DSP 鉗子

## 再使用禁止

## 【禁忌・禁止】

## &lt;使用方法&gt;

1. 再使用禁止。
2. 再滅菌禁止。

## 【形状・構造及び原理等】


## \* &lt;形状・構造・構成ユニット&gt;

## [形状・構造]

本品は、インサート、チューブ、ハンドル（バスケットを含む）及び補強材（25ゲージプラス、25ゲージプラス ロング、27ゲージプラスのみ）で構成されている、眼科手術にて用いる使用1回限りの滅菌済み鉗子である。本品には、23ゲージ、補強材付きの25ゲージ（25ゲージプラス及び25ゲージプラス ロング）、補強材付きの27ゲージ（27ゲージプラス）のゲージサイズがある。25ゲージの鉗子のみ、25ゲージプラスより長いシャフトを備えた25ゲージプラス ロングがある。

## 【外観図】

(代表例：ILM鉗子25ゲージプラス)

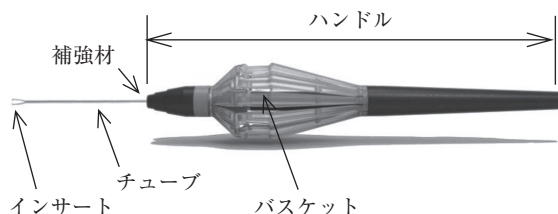

## 【体に接触する部分の組成】

インサート：ステンレス鋼

チューブ及び補強材：コバルト／クロム／ニッケル／モリブデン合金

## \* &lt;原理・機能&gt;

本品は、ハンドルのバスケットを手動で握るとバスケットが前方に伸び、チューブ及び補強材（備えている場合）が前方にスライドすることで、インサートが閉じ、握った状態からバスケットを放すとバスケットとともにチューブ及び補強材（備えている場合）が後方にスライドすることでインサートが自動的に開く。いかなる方向からバスケットを操作しても、インサートを開閉することができる。

## \* 【使用目的又は効果】

眼科手術（特に網膜硝子体手術）にて組織等を把持、圧迫又は支持するために用いること。

## 【使用方法等】

## \* &lt;使用方法&gt;

1. インサート、チューブ、補強材が周りに触れないように本品を包装から慎重に取り出す。
2. 本品を後眼部及び網膜に到達させるため、バスケットを握り、インサートが閉じた状態でトロカールカニューラを介して本品を眼内に挿入し、使用する。
3. バスケットを握り、インサートが閉じた状態で本品を眼内から抜去する。

## \* 【使用方法等に関する使用上の注意】

1. 本品とゲージサイズが同じアルコン社のバルブなしトロカールカニューラ、またはゲージサイズが同じもしくは径がより大きいアルコン社のバルブ付トロカールカニューラを使用すること。
2. 本品への過負荷は機能に影響を及ぼすようなインサートの故障、湾曲、捻じれ及び/又は破損の原因となる可能性がある。
3. 本品に損傷が見られたり、不良品が届いた場合は、弊社問合せ窓口へ連絡すること。

## \* 【使用上の注意】

## &lt;重要な基本的注意&gt;

1. 本品にはコバルト（Co）が含まれているが、使用目的に従って適切に使用した場合は安全である。

## 【保管方法及び有効期間等】

## &lt;保管方法&gt;

高温、多湿、直射日光、水濡れを避けて保管すること。

## &lt;使用期間&gt;

包装の使用期限の欄に表示

## 【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

## &lt;製造販売者の氏名又は名称等&gt;

## 【氏名又は名称】

日本アルコン株式会社

## \* 【電話番号】

0120-825-266

## &lt;海外の製造業者の氏名又は名称等&gt;

## 【氏名又は名称】

Alcon Grieshaber AG

## 【輸入先（製造元）の企業名（英語）】

Alcon Grieshaber AG

## 【輸入先（製造元）の国コード】

215

## 【輸入先（製造元）の国名】

スイス