

GEMマイクロクリップ用鉗子

【警告】

〔使用方法〕

本品は未滅菌品である。
必ず適切な方法で滅菌してから使用すること。
〔【保守・点検に係る事項】の項参照〕

【禁忌・禁止】

〔使用方法〕

- ・本品を曲げ、研磨、切削、打刻(刻印)等の二次的加工(改造)することは、破損の原因となるので絶対に行わないこと。


〔不具合の原因となる〕

- ・本品はGEMマイクロクリップ専用の鉗子であり、それ以外のクリップ、ステープルには使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

〔形状・構造〕

1.形状

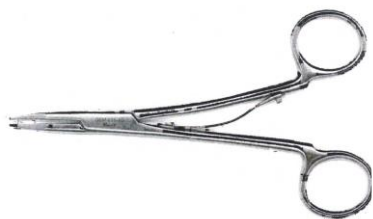

2.原材料:ステンレス鋼

3.原理等



GEMマイクロクリップを先端に把持し血管をクリッピングするために使用する

【使用目的又は効果】

この鉗子はチタニウム製マイクロクリップを血管にしっかり包含させ、血管を損傷することなく完全に閉塞することを目的としたものである。体内用動脈瘤クリップとしてだけでなく、体内用止血クリップ、体内用血管クリップとして使用する際に用いる鉗子である。


【使用方法等】*

- 1.鉗子を垂直に立てマイクロクリップカートリッジに先端を挿入し引き抜きながらクリップを引き出す。
- 2.専用鉗子を垂直に持ち上げクリップが正しく装着されていることを確認すること。




〔注意〕クリップの不完全な装着と脱落を防ぐために

- ① 鉗子にクリップを装着する際に鉗子のグリップ部を把持しないこと。
- ② 鉗子の先端はカートリッジのクリップに垂直に挿入すること。

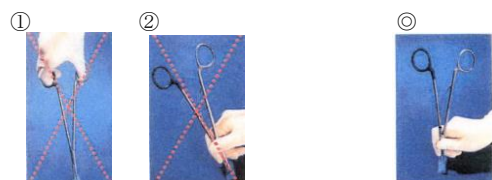

- 3.装着したクリップと鉗子先端を閉塞する血管の表面に持っていく。

- 4.血管を閉塞するために専用鉗子のグリップ部をしっかり締める。その際ずれを防ぐためにクリップ先端をしっかり締める。

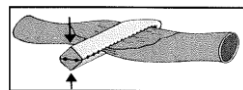

- 5.専用鉗子のグリップ部を緩め鉗子を外しクリップの取り付けと止血が完全かどうか結紮部位の確認をする。

【使用上の注意】

- 1.本製品はGEMマイクロクリップを使用する際の専用鉗子である。それ以外の用途では使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 1.清潔で良好な乾燥状態を保てる場所で保管する。
- 2.滅菌した状態で保管する場合、滅菌有効期限を管理する。

【保守・点検に係る事項】

- 1.洗浄、消毒、滅菌
 - 1)汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐため、付着した血液、体液、組織、薬品等は直ちに洗浄し、消毒すること。
 - 2)汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、その適正濃度と取り扱いの方法を守ること。中性洗剤を推奨すること。
 - 3)超音波洗浄装置等の洗浄装置で洗浄する場合、稼動部分は開放し、汚れが落ちやすい状態でバスケット等に収納、洗浄すること。
 - 4)金属タワシ、クレンザー(磨き粉)等は、器具表面を損傷するので使用しないこと。
 - 5)仕上げすぎには、精製水・脱イオン水・濾過水等の使用を推奨する。
 - 6)洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。
 - 7)使用前の滅菌には鋼製小物に適した滅菌方法にて処理をすること。オートクレーブ滅菌を推奨する。

【包装】

GEM615-1G マイクロクリップ用鉗子:15cm
GEM620-1G マイクロクリップ用鉗子:20cm

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕

ダイアデム工業株式会社
〒319-2251
茨城県常陸大宮市姥賀町582-7
TEL:0295-53-5126

〔製造業者〕

シノビス マイクロ カンパニーズ アライアンス社 米国

-製品問合せ先- **

株式会社 クラウンジュン・コウノ
〒101-0022 東京都千代田区神田駿河台2-2 TEL:03-5577-7015