

GEMカップラー用鉗子

【警告】

〔使用方法〕

本品は未滅菌品である。

必ず適切な方法で滅菌してから使用すること。

(【保守・点検に係る事項】の項参照)

【禁忌・禁止】

〔使用方法〕

- ・本品を曲げ、研磨、切削、打刻(刻印)等の二次的加工(改造)することは、破損の原因となるので絶対に行わないこと。

〔不具合の原因となる〕

- ・本品はGEMカップラー専用の鉗子であり、それ以外には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】


〔形状・構造〕

1. 形状



2. 原材料:ステンレス鋼

3. 原理等

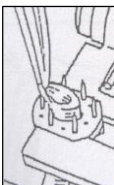


GEM微小血管縫合器カップラーに血管を把持し、カップラーリングピンに刺通するために使用する。

【使用目的又は効果】

この鉗子は微小血管縫合器カップラーで血管を縫合するときに血管を損傷することなく把持し、カップラーリングピンに刺通することを目的とし、カップラーリングピンの元まで完全に刺通できる、血管縫合用に使用する際に用いる鉗子である。

【使用方法等】

1. 鉗子を垂直に立て、血管壁と内膜層の一断端を把持する。

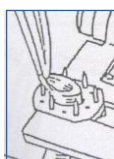

①

2. 血管縫合器カップラーリングを通し、カップラーリングピンにしっかりと元まで刺通する。



②



③

〔注意〕カップラーリングピンに不完全な刺通を防ぐために

- ① 鉗子を垂直にし血管壁と内膜層をしっかり把持すること。

- ② 鉗子掴み部分はカップラーリングピンに血管壁と内膜層が根元まで完全に刺通するまでは把持していること。

【使用上の注意】

1. 本製品はGEM微小血管縫合器カップラーを使用する際の専用鉗子である。
それ以外の用途では使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 清潔で良好な乾燥状態を保てる場所で保管する。
2. 滅菌した状態で保管する場合、滅菌有効期限を管理する。

【保守・点検に係る事項】*

1. 洗浄、消毒、滅菌

- 1) 汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐため、付着した血液、体液、組織、薬品等は直ちに洗浄し、消毒すること。
- 2) 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、その適正濃度と取り扱い方法を守ること。中性洗剤を推奨する。
- 3) 超音波洗浄装置等の洗浄装置で洗浄する場合、稼動部分は開放し、汚れが落ちやすい状態でバスケット等に収納、洗浄すること。
- 4) 金属タワシ、クレンザー(磨き粉)等は、器具表面を損傷するので使用しないこと。
- 5) 仕上げすぎには、精製水・脱イオン水・濾過水等の使用を推奨する。
- 6) 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。
- 7) 使用前の滅菌には鋼製小物に適した滅菌方法にて処理すること。高圧蒸気滅菌器を推奨する。

【包装】

GEM4183C カップラー用鉗子

1本入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名及び名称等】

〔製造販売業者〕

ダイアデム工業株式会社

〒319-2251

茨城県常陸大宮市姥賀町582-7

TEL:0295-53-5126

〔製造業者〕

シノビス マイクロ カンパニーズ アライアンス社 (米国)

-製品問合せ先- * *

株式会社 クラウンジュン・コウノ * *

〒101-0022 東京都千代田区神田駿河台2-2 TEL:03-5577-7015

グンゼメディカル 株式会社 * *

〒530-0003 大阪市北区堂島2-4-27 TEL:06-4796-3151