

2016 年 9 月 12 日 作成（第一版）


届出番号 27B3X00160100001

機械器具 71 視力補正用眼鏡 一般医療機器 眼鏡 35065000

【禁忌・禁止】

- ・眼鏡を掛けたまま歩いたり、車の運転をしないこと。

【形状・構造及び原理等】

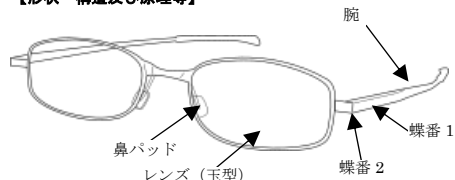

レンズ度数：+1.00～+3.50

【使用目的、効能又は効果】

眼鏡レンズ組と眼鏡フレームからなる視力補正用眼鏡（老眼鏡）である。

【操作方法又は使用方法等】

- ・手元の文字等を見る際に使用する。
- ・折りたたまれている時は説明書に従い装用出来る様に展開する。

【使用上の注意】

- ・この眼鏡は、手元の文字を見やすくするための視力補正用眼鏡なので、掛けたまま歩いたり、車の運転はしないこと。
- ・眼鏡の掛けはずしは、両手で眼鏡の腕を持って顔の正面で行うこと。掛ける際は、目を突く恐れがあるので、眼鏡の腕を十分に開いてゆっくり行うこと。
- ・形くずれや歪みの原因になるので、片方の眼鏡の腕のみを持って無理に外さないこと。
- ・近視、乱視、遠視の方には、合わないので使用しないこと。
- ・こめかみに当たる部分と鼻パッドはよく拭き取ってから使用すること。
- ・高温（60℃以上）での使用はしないこと。
- ・整髪料、化粧品等が眼鏡に付いた時は、劣化・変質・変化の原因となる可能性があるので、すみやかに拭き取ること。
- ・眼鏡の掛け具合が悪く鼻や耳に無理な負担が掛かる時は、顔に合うフレームを選ぶこと。
- ・フレームが肌に触れる箇所にかゆみ、かぶれ、湿疹など異常がある時、又は異常が現れた時は、眼鏡の使用をやめ、医師に相談すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- ・眼鏡ケースに入れ、直射日光の当たる場所は避けて室内で保管する。
- ・レンズにキズを付ける恐れがあるので、硬い金属等と一緒にしないこと。

【取り扱い上の注意】

- ・フレームを強く曲げると折れることがあるので、しないこと。
- ・炎天下の自動車内には放置しないこと。
- ・眼鏡は、レンズ、フレームとも高温（60℃以上）にさらされたり、急激な温度変化に合うと変形したり、表面層のはがれ、ひび割れを生じることがある。また、熱によってフレームの型くずれ及び素材の劣化による破損の原因になるのではないこと。
- ・眼鏡を置く時は、レンズの凸面が上向きにすること。下向きにするとキズの原因になるのではないこと。
- ・眼鏡が濡れた時は、水あとがしみになって取れにくくなるので、ティッシュペーパーや眼鏡拭きで拭き取ること。
- ・各部素材は、経年変化や摩擦・ゆるみ等のため、変色・変形したり折れたり、表面層のはがれやヒビ割れによる素材の露出が起こる場合がある。

【保守・点検に係わる事項】

- ・蝶番ねじがゆるんだときは、ドライバーでしめること。
- ・ゴミ・ホコリ等、汚れが付着した時は、中性洗剤を薄めた液に浸し指先で汚れを落とした後、柔らかい布で軽く拭くこと。
- ・ゴミやホコリが付着した時は、まず水洗いしてから拭くこと。カラ拭きは傷の原因になるのではないこと。

【包装】

ケース入り眼鏡 1 個

【製造販売業者及び製造者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：田河製作所

大阪府大阪市生野区新今里 7-4-23

TEL:06-6751-2522

製造業者：that company called if

この説明書は切り取って保管して下さい。

【使用方法】

上図①の様にメガネの両腕を起こし、続いて上図②の様に両腕を倒します。必要であれば、パッド（鼻にあたる部分）を調整します。

【使用上の注意】

この眼鏡は手元の文字を見やすくする事を目的に作られています。運転や歩行、遠方視や防護の目的には使用しないで下さい。

【取り扱い上の注意】

変形や破損の恐れがあるので、無理な開閉や強い力を加えないで下さい。レンズ面を拭く時は、汚れの付いていない眼鏡拭きで、やさしく拭いて下さい。眼鏡の掛け外しは必ず両手で行って下さい。

レンズの入替は出来ません。眼鏡ケースや眼鏡拭きは別途ご用意下さい。パッド（鼻に当たる樹脂）、モダン（耳にかける樹脂）は紛失されないようご注意ください。

材質/フレーム: 合金 レンズ: アクリル 企画: 英国 フレーム: 中国

本品に関する表示 ※A4版が必要な場合は販売元にお申し出下さい

一般医療機器：視力補正用眼鏡

一般的名称：眼鏡

販売名：コンパクトレンズ

製造販売届出番号：27B3X00160100001

製造販売元：田河製作所 TEL06-6751-2522

大阪市生野区新今里 7-4-23

製造元：that company called if.