

類別 機械器具 (76) 医療用吸入器
一般医療機器 加熱式ネブライザ (12716000)

加熱式ネブライザ DH-Pro

【禁忌・禁止】

- ・使用する前に、電源コードの電源プラグ部、電源コネクタ部に水分が付着していないことを確認してから使用すること。
- ・吸入チューブは同一患者にのみ使用し、他の患者と共有しないこと。
- ・本品をストーブやヒーター等の高温になる熱源のそばには置かないこと
- ・本体内部が損傷することがあるので、本体両側にある排気口に水を掛けたりしないこと。

【使用目的又は効果】

本品は、加温・加湿したエアロゾルミストを発生させる装置です。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成


(1) 構成品：

- ・ 本体
- ・ 吸入チューブ
- ・ 排水チューブ
- ・ Y 字型チューブ
- ・ 電源コード

2. 外観




3. 各部名称

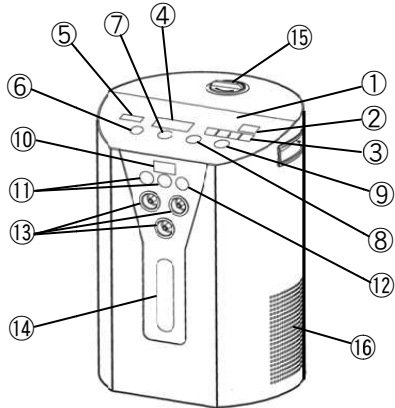

・上面及び前面

①	操作パネル	⑨	自動排水
②	温度表示	⑩	作動時間
③	警告灯	⑪	タイマー設定
④	流量表示	⑫	おやすみモード設定
⑤	水質レベル	⑬	吸入チューブ取付口
⑥	オン/オフ	⑭	貯水窓
⑦	流量切替	⑮	注水口
⑧	キーロック	⑯	排気口(側面両側)

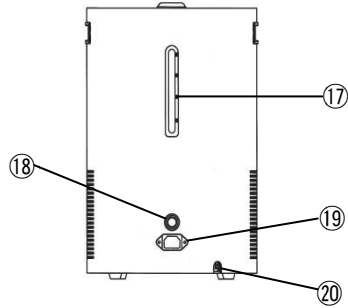

・背面

⑰	水目盛ウインドウ	⑱	電源プラグ差込口
⑲	電源スイッチ	⑳	排水口

3. 作動原理

給水し貯留した水は、ヒーター電極により加熱され、加湿されたエアロゾルミストを発生させる。エアロゾルミストは吸入チューブ差込口(排出口)まで送出されるので、専用の吸入チューブで吸入します。

4. 電氣的定格

- ・ 電撃に対する保護の形式による分類：クラスⅠ機器
- ・ 交流・直流の別：交流
- ・ 定格電圧：AC100V 50/60Hz
- ・ 消費電力：360VA

5. 寸法・重量

- ・ 寸法(mm)：265(W)×245(D)×380(H)
- ・ 重量：8kg

【使用方法】

本品の使用においては、あらかじめ取扱説明書を確認すること。

(1)電源コードの電源プラグ部を本体背面にあるプラグ差込口へしっかりと差し込み、電源コネクタ部を定格電圧に沿ったコンセントに差し込みます。

(2)前面にある3つの吸入チューブ取付口の防塵用軟質ゴムキャップを取り外し、吸入チューブを差し込み本体背面にある電源スイッチをオンにします。

(3)上面にある注水口蓋を開け、精製水または蒸留水を注水します。注水できる最高水量は1,850mlです。注水が終わったら注水口蓋を閉めます。

(指定された水質以外は使用しないでください)

(4)操作パネルのオン/オフスイッチをタッチすると、操作パネルの温度、流量モニター、水質モニター、タイマーが点灯します。

(5)操作パネルのタイマー設定スイッチ「△(プラス)」または「▽ (マイナス)」で吸入時間を設定します。時間設定完了後、残りの時間がカウントダウン方式で表示されます。

(6)カウントダウンタイマーが[0:00]になると吸入終了です。

(7)吸入が終了したら電源スイッチを切り、電源コネクタ部をコンセントから抜きます。

取扱説明書を必ずご参照下さい

【使用上の注意】

- (1)本品の使用時は喫煙禁止。また、火元近くでの使用は厳禁です。
- (2)本品は必ずまっすぐに立てた状態で使用してください。輸送の際は、必ず装置内の水を排水してください。
- (3)使用時には本品の周辺、特に排気口付近に不要物を置かないでください。排気口がつまり、装置温度が高くなり故障の原因となります。
- (4)使用時に吸入チューブがねじれないよう注意してください。
- (5)設置場所は、直射日光を避け、必ず換気の良い場所で使用してください。
- (6)本品を使用させる方が分解して修理をすることはおやめください。
- (7)本品を使用する際は本体が水などで濡れないようご注意ください。
- (8)連続使用時間は8時間以内です。8時間を経過したら電源を切り、1時間以上停止してください。

【保管方法及び有効期限】

(1)保管方法

高温、多湿、直射日光を避け室温(日本薬局方:1～30℃)で保管。

(2)有効期間

ヒーター電極 : 約 10,000 時間(当社自己認証による)。

(3)耐用年数

本体 5 年間(当社自己認証による)。

【保守・点検に係る事項】

＜業者による保守点検事項＞

- ・【使用方法】及び【保管方法及び有効期限】に従い使用・保管される場合、特定の保守点検事項はない。
- ・ヒーター電極交換は販売店へ依頼して下さい。

＜使用者による保守点検事項＞

- ・取扱説明書に従って使用 1 週間後、または水質レベルが水質の低下を表示した場合は貯水されている水を交換して下さい。
- ・本品に異常が確認された場合は、使用を中止し、販売店へご連絡ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者の名称 : 株式会社タイウ

住所 : 〒536-0025 大阪府大阪市城東区森之宮 2-4-29

電話番号 : 06-6969-2421

製造業者名 : 株式会社タイウ

取扱説明書を必ずご参照下さい