

類別 機械器具 (47) 注射針及び穿刺針
一般医療機器 生検用穿刺器具 (70216000)

ベクスコア アスピレータ

【警告】

・有資格者以外は、本品を使用しないでください。

【禁忌・禁止】


- ・本品は、10cc 及び 20cc 以外の注射器を装着して使用することはできません。
- ・本品は、EOG 滅菌、γ 線滅菌、オートクレーブ滅菌等はしないでください。本品が破損する可能性があります。

【使用目的又は効果】

組織採取を目的として、生検針に装着して穿刺するために用いる穿刺器具である。

【形状・構造及び原理等】

1. 本品は、10cc 及び 20cc の注射器を装着して、組織を吸引するために使用します。
2. 構造
本製品は、以下のものから構成される。
 - ① ハンドル 1
 - ② レールバー
 - ③ ハンドル 2
 - ④ シリンジホルダー
 - ⑤ フランジ固定用板バネ
3. 外観形状及び名称

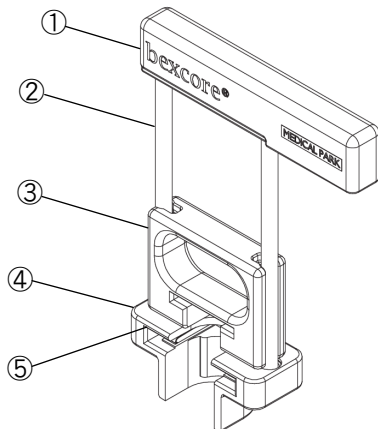

番号	名称	機能および動作
1	ハンドル 1	使用時の持ち手
2	レールバー	ハンドル 2 をスライドさせるパイプ
3	ハンドル 2	指を入れて注射器のプランジャーを引きます
4	シリンジホルダー	注射器のフランジを差込み固定
5	フランジ固定用板バネ	フランジを固定するための板バネ

【原材料】

番号	名称	原材料
1	ハンドル 1	樹脂(ポリカーボネート)
2	レールバー	金属(ステンレス鋼)
3	ハンドル 2	樹脂(ポリカーボネート)
4	シリンジホルダー	樹脂(ポリカーボネート)
5	フランジ固定用板バネ	金属(ステンレス鋼)

【寸法(mm)】

・100(W) × 25(D) × 142(H)

【重量】

・65g

【装着可能注射器】

・10cc もしくは 20cc

【使用方法】

1. 使用前の準備
 - 1) 使用説明書を十分に読んでから使用してください。
 - 2) 本製品に損傷がないか確認してください。
 - 3) 本製品は未滅菌で供給されるので、使用方法に従って洗浄してください。
 - 4) EOG 滅菌や、ガンマ線滅菌、オートクレーブ等での滅菌操作はしないでください。本製品が損傷や破損する恐れがあります。
2. 使用方法
 - 1) 包装を開封する前に、目視で本製品に損傷がないかを確認します。
 - 2) 包装から本製品を取り出す時は、ゴム手袋等を装着してから取り出して下さい。
 - 3) 注射器(別途ご準備ください)を本製品に取り付けます。
 - 4) 注射器に注射針を取り付けます。
 - 5) ハンドル 2 に指をかけて吸引します。
 - 6) 吸引後、注射器を本製品から取り外します。
 - 7) 本製品を洗浄後、保管します。
3. 使用後の保管及び管理方法
本製品は、再使用可能なため、使用後は適切に洗浄して保管して下さい。
4. 洗浄方法
 - 1) 使用後は、本製品に付着した血液や体液等を、ガーゼ等で除去します。
 - 2) ガーゼに精製水を含ませ、本製品の表面を拭きます。
 - 3) 濡れた本製品の水分を拭き取り、二次洗浄としてイソプロピルアルコール(消毒液)を使用して、本製品の表面を拭きます。
 - 4) 1)から 3)の工程を、最低 2 回以上繰り返します。
 - 5) 洗浄は常温で行ってください。

【使用時の注意】

1. 本製品に損傷がある場合は、使用を中止し発売元に連絡してください。
2. 10cc 及び 20cc 以外の注射器を装着して使用することはできません。
3. 注射針の取扱いには十分に注意して扱ってください。
4. 使用した注射針、注射器は、行政の指示に従って処理してください。
5. 有資格者以外は、本製品を使用しないでください。

【保管方法及び有効期限】

1. 保管方法
使用後の洗浄が終了したら、水に濡れないよう注意し、日光、蛍光灯、紫外線殺菌装置等の光や、化学薬品の保管場所でガスの発生する場所、高温、多湿を避けて清潔な場所で保管してください。
2. 有効期限
本製品は滅菌品ではありませんので、有効期間はありますが、破損がある場合は、直ちに使用を中止してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造業者：MedicalPark Co., LTD (大韓民国)

製造販売業者：株式会社タイウ

(住所) 大阪府大阪市城東区森之宮 2-4-29

(電話番号) 06-6969-2421

取扱説明書を必ずご参照下さい