

類別:機械器具 55

一般的名称:手動式生体用洗浄器

販売名:電気保温洗浄器


【警告】

- ・清拭・消毒をしないと感染の原因になることがあるので
機器の洗浄、消毒を十分行うこと。
- ・やけどを避けるため、タンク内の液体を使用する前に必ず
液温を確認すること。

【禁忌・禁止】

- ・機器の改造。
- ・不具合(異常)状態での使用。
- ・未整備状態(定期点検や日常点検をしてない状態)での使用。

【形状・構造等】

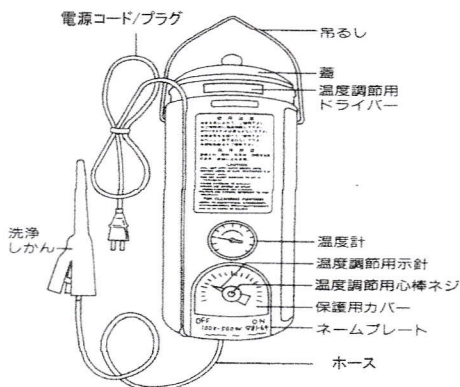

- ・本体寸法 直径155mm 高さ415mm
- ・製品総重量 1600g
- ・定格電源入力 AC100V 500W 50/60Hz

【性能】

- ・ヒーター AC100V 500W
- ・昇温時間(38度設定)
18分以内(5L液温10℃標準温度設定時)
- ・タンク容量 5L

【使用目的】

産婦人科、泌尿器科、耳鼻咽喉科などにおける
衛生洗浄、治療、または排便後、痔、生理時等の
各洗浄や宿便、便秘の温水浣腸などの使用を目的
としたものである。


【使用方法】

1. 必ず容器内に3L以上水、又は薬液を先に入れること。
2. 本体容器を高さ1.2m～2mの位置に固定し、必ず容器を
水平状態に設置すること。
3. それから電源プラグを入れること。
4. 温度調節用示針を38℃前後の位置に設定すること。
5. 加温後、温度計の示す温度と設定温度が合っているか
確認すること。
6. 使用直前に容器内の保温液を手で触れて適温を確認してください。
その際、洗浄しかんのホースに残留している液体(200cc程)を
充分に出し切って確認すること。

【使用上の注意】

1. 水分(薬液)などを容器内に入れる際、本体の外側
(特に温度調節部)は水や薬液で濡らさないこと。
・濡れた場合は速やかに使用を中止し乾燥させること。
2. 本体容器内に65℃以上の熱湯(薬液)を入れないこと。
・容器本体を65℃以上の環境に入れると安全回路の
温度ヒューズが切れて使用不能となるため。(要修理)
3. お湯を使うときは、やけどに注意し、使用すること。
・温度計の示す温度と洗浄しかんから出る薬液が異なる
ことがありますので、薬液に手で触れること。
4. 金属腐食性の強い消毒液(ポビドンヨード(イソジン液)、
次亜塩素酸ナトリウム)などは絶対に使用しないこと。
・本体の金属部分の動作機能に支障をきたすため。
5. 空焚きをしないこと。
・本体の温水を捨てる時は、先に電源を切ること。

【動作原理】

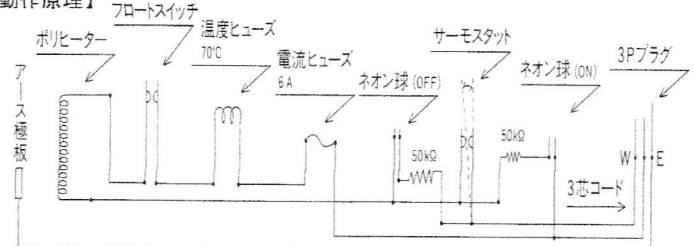

取扱説明書を必ずご参照下さい。

【貯蔵・保管方法及び使用期間】

1. 保管環境 温度…… -10℃～50℃
 湿度…… 30%～80% (結露していないこと)
2. 保管場所については次の事項に注意してください。
 - ・水のかからない場所に保管すること。
 - ・気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などによる悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
 - ・傾斜、振動、衝撃(移動運搬時を含む)などにおいて安定状態に注意すること。
3. 耐用年数……7 年
(尚、洗浄しかん、ホースに関しては消耗品として扱うこと。)

【取扱上の注意】

1. 毎日使用後は、水又は薬液を完全に排水し、本体容器、洗浄しかんなどの清拭・消毒を行うこと。
 - ・ガス滅菌を使用する場合は65℃以下で行うこと。
 - ・オートクレーブは使用不可。
2. 故障した場合は、勝手にいじらず「故障中」などの適切な表示を行い、修理は専門家に任せること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

有限会社 ダイアモンド電気

住所：東京都新宿区高田馬場 4-32-6

電話：03-5331-3351 FAX：03-5331-5330

製造業者の氏名：

有限会社 ダイアモンド電気

住所：東京都新宿区高田馬場 4-32-6

取扱説明書を必ずご参照下さい。