

再使用禁止

ストローマン技工用インプレッション

**【禁忌・禁止】

適用対象(患者)

- ・ 本品の配合成分及び類似成分に対して過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

使用方法

- ・ 再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

本品は、印象採得に使用する器具である。

形状、構造

(1) アナログ印象

(1) TL 用

I) synOcta 用

印象 キャップ	048. 017V4	048. 013	048. 093V4
ポジショ ニング シリンダ ー	048. 070V4	048. 095	
印象 ポスト	048. 010	048. 090	048. 091
固定ピン	048. 073V4		

II) synOcta クローズドトレイ用

印象 ポスト	048. 862	048. 870	048. 864	048. 871
-----------	----------	----------	----------	----------

III) synOcta オープントレイ用

印象 ポスト	048. 866	048. 869
-----------	----------	----------

IV) ソリッドアバットメント用

ポジシ ョニン グ シリ ンダ ー	048. 060V4	048. 061V4	048. 062V4	048. 065	048. 066
----------------------------------	------------	------------	------------	----------	----------

V) バイト印象用

バイトレ ジスト レーシ ョン エイド	048. 940V4	048. 941V4
---------------------------------	------------	------------

(2) BL 用

* I) クローズドトレイ/オープントレイ用

印象 ポスト	025. 2201	025. 4201		
	025. 2202	025. 2205	025. 4202	025. 4205
	025. 0057	025. 0058	025. 0060	025. 0061

II) セメンテーションアバットメント用

印象 キャップ	025. 2203-04	025. 2204-04	025. 2220-04	
------------	--------------	--------------	--------------	--

	025. 4203-04	025. 4220-04	025. 4204-04	025. 4230-04
--	--------------	--------------	--------------	--------------

III) マルチベース用

印象 キャッ プ	025. 2231-04	025. 2241-04	025. 4241-04	025. 4261-04
印象 ポスト	025. 2232	025. 2242	025. 2206	025. 4242
	025. 4262	025. 4206		

IV) SRA 用

印象 ポスト	025. 2245	025. 2246	025. 0013	025. 0014
	025. 2243	025. 2244	025. 0011	025. 0012

V) バイト印象用

バイトレ ジスト レーシ ョン エイド	025. 2208-04	025. 2212-04	025. 4208-04	025. 4212-04
---------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

(3) NN 用

印象 キャップ	048. 016	048. 122V4
------------	----------	------------

(4) SC 用

* I) クローズドトレイ/オープントレイ用

印象 ポスト	025. 0062	025. 0020	025. 0021	025. 0022
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

** (5) BLTF 用

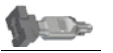
I) クローズドトレイ/オープントレイ用

印象 ポスト	065. 4310	065. 4810	065. 0154	
	065. 0150	065. 0151		
	065. 0031	065. 0033	065. 0032	065. 0034
	065. 0152	065. 0153		
	065. 0146	065. 0148	065. 0147	065. 0149

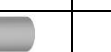
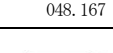
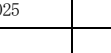
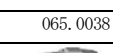
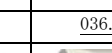
必ずマニュアル等を参照してください

**** (6) TLTF 用**

I) クローズトレイ/オープントレイ用

印象 ポスト	<u>036. 0002</u>	<u>036. 1002</u>	<u>036. 2002</u>	<u>065. 0143</u>
				
	<u>065. 0144</u>	<u>065. 0145</u>	<u>036. 0000</u>	<u>036. 0001</u>
				
	<u>036. 1000</u>	<u>036. 1001</u>	<u>036. 2000</u>	<u>036. 2001</u>
				
	<u>065. 0140</u>	<u>065. 0137</u>	<u>065. 0141</u>	<u>065. 0138</u>
				
	<u>065. 0142</u>	<u>065. 0139</u>		
				

**** 2) デジタル印象**

スキャン ボディ	<u>048. 168</u>	<u>048. 169</u>	<u>025. 2915</u>
			
	<u>025. 4915</u>	<u>025. 0000</u>	<u>025. 0001</u>
			
	<u>048. 167</u>	<u>025. 0025</u>	<u>065. 0035</u>
			
	<u>065. 0038</u>	<u>036. 3220</u>	
			

原理

本品をインプラント又はアバットメント等に固定して印象を採得することにより、インプラント又はアバットメントの位置、あるいは対合歯の咬合面を正確に再現することができる。

固定方法にはスナップオンタイプとスクリュー固定タイプがあり、また、印象採得には印象材を用いる場合とデジタル的に採得する場合とに対応することができる。

原材料

POM、アルミニウム合金、純チタン グレード 4、チタン合金、PEEK

【使用目的又は効果】

本品は、印象採得に使用する器具である。

【使用方法等】

1. 併用医療機器

本品はストローマン社が指定するインプラントコンポーネンツ並びに併用手術器具とのみ併用すること。インプラント接続部の略称 (NN、RN、WN、NC、RC、RB、WB 等) と一致する構成品と組み合わせて使用する。

****2. 使用前準備**

- ・ 本品は使用前に洗浄・滅菌を行う。(印象キャップ、ポジショニングシリンドーおよびバ이트レジストレーションエイドは滅菌しないこと。)
- ・ 印象ポストとスクリューは個別に滅菌する。
- ・ 滅菌後の製品は保管せず、直ちに使用する。

種類	温度	暴露時間
<u>プレバキューム式高圧蒸気滅菌</u>	<u>132℃～134℃</u>	<u>3 分以上</u>

(製造業者推奨)

**** 3. 使用方法**

1) アナログ印象

(1) TL 用

I) syn0cta 用

インプラントに印象キャップをはめ、ポジショニングシリンドーを挿入する。印象ポストを用いるときは直接スクリューで固定する。固定ピンはライニング時に用いられる。

II) syn0cta クローズトレイ用

インプラントはインプラントに直接、アバットメントレベルはアバットメントに固定し、その後、キャップをはめ込む。

III) syn0cta オープン用

アバットメントに直接固定する。

IV) ソリッドアバットメント用

ソリッドアバットメントのフラット面に合わせてポジショニングシリンドーをかぶせる。

V) バイト印象用

直接インプラントにはめ込む。

(2) BL 用

I) クローズトレイ/オープントレイ用

インプラント等に印象ポストをスクリューどめする。クローズトレイ法の場合は、その後、キャップをはめ込む。

II) セメンテーションアバットメント用

印象キャップを直接セメンテーションアバットメントにはめ込む。

III) マルチベース用

印象キャップを直接マルチベースアバットメントにはめ込む。又は印象ポストをスクリューどめする。

IV) SRA 用

クローズトレイ法の場合、印象ポストを直接 SRA にはめ込み、キャップを取り付ける。また、オープントレイ法の場合は印象ポストをスクリューどめする。

V) バイト印象用

直接インプラントにはめ込む。

(3) NN 用

印象キャップを直接インプラント等にはめ込む又はスクリューどめする。

(4) SC 用

I) クローズトレイ/オープントレイ用

インプラント等に印象ポストをスクリューどめする。クローズトレイ法の場合は、その後、キャップをはめ込む。

**** (5) BLTF 用**

I) クローズトレイ/オープントレイ用

インプラント等に印象ポストをスクリューどめする。クローズトレイ法の場合は、その後、キャップをはめ込む。

**** (6) TLTF 用**

I) クローズトレイ/オープントレイ用

インプラント等に印象ポストをスクリューどめする。クローズトレイ法の場合は、その後、キャップをはめ込む。

2) デジタル印象

スキャンボディを直接インプラント等にスクリューどめする。

****<使用方法等に関連する使用上の注意>**

- ・ プラスチックに適さない薬品による滅菌や乾熱滅菌は行わないこと [プラスチックの変性や溶解の危険性がある]
- ・ 使用前に必ず機器を点検してください。損傷、変形、腐食、または変色した部品は使用しないでください。
- ・ 印象コンポーネントに付属のスクリューのみを使用すること。
- ・ スキャン・スプレーを使用する場合は、スキャンボディと技工用アナログにかからないように注意すること。スキャナの中あるいは患者の口腔内でスキャン・スプレーを使用しないこと。
- ・ 吸引や誤飲を防ぐために、SCS ドライバーとスクリューが正確に締結されていることを確認する。
- ・ スキャンボディの口腔内での使用は1時間以内にとどめること。
- ・ 使用する前に洗浄で消毒されていることを確認すること。
- ・ 洗浄剤と消毒液は歯科用に適したものをを使用すること。
- ・ 使用する洗浄液や消毒液メーカーのマニュアル等に従うこと。
- ・ 歯科用インプラントが印象コンポーネントをねじ込んだり外したりするのに十分安定していることを確認すること。

スキャンボディを口腔外で使用する場合は、追加として次の手段を遵守する必要がある。

- ・ スキャンボディを洗浄するため圧縮空気を使う。もし、その後スキャンボディが洗浄でない場合は、歯科用に適した洗浄剤を使用する。

****【使用上の注意】**

- 重要な基本的注意
 - ・ 本品を口腔内で使用する場合は、必ず吸引や誤飲を予防するための手段を用いること。
- 相互作用 (他の医薬品・医療機器等との併用に関すること)
 - 併用禁忌 (併用しないこと)
 - ・ ストローマン社以外の製品と併用しないこと。

****【保管方法及び有効期間等】**

- 保管方法
 - ・ 常温・常湿で直射日光を避け、清潔な場所で保管すること。
- 使用期限
 - ・ 直接の被包に記載。

必ずマニュアル等を参照してください

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ストローマン・ジャパン株式会社

連絡先：0120-689-930

外国製造業者：Institut Straumann AG（ストローマン社）

外国製造業者国名：スイス連邦