

再使用禁止  
(スクリュータップ)

ZAGA 補綴用ツール

【禁忌・禁止】

適用対象（患者）

次の患者には適用しないこと

- ・ 本品の配合成分及び類似成分に対して過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

使用方法

- ・ スクリュータップは再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 概要


本品は、歯科インプラント用の補綴物の設計、製作、装着・固定などの目的に用いる器具である。Hex ドライバー、ラチェットレンチ、リムーバルドリル及びリムーバルガイドは再使用が可能であり、スクリュータップは単回使用である。

2. 形状、構造


1) Hex ドライバー




2) スクリュータップ

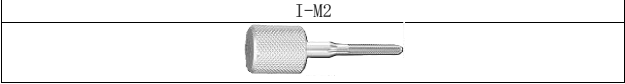

3) ラチェットレンチ

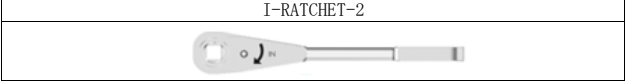

4) スクリューリムーバー

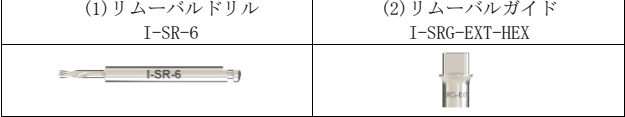

3. 原材料

ステンレス鋼、ポリフェニルスルホン、高速度工具鋼、炭化タングステン、チタン

4. 原理

1) Hex ドライバー

インプラントに接続する補綴物の締め付けなどを行う。

2) スクリュータップ

破損したインプラント内部のねじ山を再形成する。

3) ラチェットレンチ

インプラント外科手術に用いる構成品の固定や取り外しなどの際に手動で回転力を加える。

4) スクリューリムーバー

インプラント内部の接続部を保護しながら破損したスクリューを除去する。

【使用目的又は効果】

本品は、歯科インプラント用の補綴物の設計、製作、装着・固定などの目的に用いる器具である。

【使用方法等】

1. 術前準備

本品は使用前に必ず滅菌を行う。滅菌後の製品は保管せず直ちに使用する。

推奨する滅菌方法は以下のとおりである。

| 滅菌方法           | 標準的滅菌条件   | 乾燥時間  |
|----------------|-----------|-------|
| ブレバキューム式高圧蒸気滅菌 | 132℃ / 4分 | 最低20分 |

スクリュータップは単回使用である。

2. 使用方法

1) Hex ドライバー

本品を補綴物に接続し、手動で回転させることでねじ止めして固定する。

2) スクリュータップ

インプラント内部のねじが破損したとき、インプラントに挿入し内部のねじ山を再形成する。

3) ラチェットレンチ

手術器具と組み合わせ、手動で回転させて構成品の締め付け、緩め、取り外しを行う。

4) スクリューリムーバー

リムーバルガイドをインプラントの接続部に固定し、ガイドチャネルを通してリムーバルドリルを挿入することで、インプラントから破損したスク

リューを除去する。

リムーバルドリルは、十分な灌流下において逆回転モードに設定し600～800rpmで回転させる。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ・ 包括的な患者評価と術前診断を行い、十分に治療計画を行った上で本品を使用すること。不適切な咬合付与、過剰な応力の発生等につながる不適切な設計を避けること。
- ・ 使用する洗浄液や消毒液メーカーの取扱説明書等に従うこと。
- ・ 併用するコンポーネントの添付文書及び取扱説明書を参照すること。
- ・ 本品を他社製品と併用しないこと。

2. 使用中の注意

- ・ 患者が部品を誤飲しないように注意すること。
- ・ Hex ドライバーは、アバットメント及びアバットメントスクリューの正しい締め付けトルクを適用すること。
- ・ リムーバルドリルは、ハンドピースに確実に取り付けて使用し、摩擦による過熱に注意すること。

3. その他の注意

- ・ 使用前に手術器具の状態を確認し、腐食、変形、損傷、刃こぼれ、摩耗等がある場合は、器具を交換すること。
- ・ 再使用可能な構成品は使用後に洗浄・滅菌を行ってから保管する。
- ・ 骨や軟組織の治癒に影響を及ぼす可能性のある局所的または全身的要因（口腔衛生不良、糖尿病の制御不能、ステロイド療法中、喫煙者、付近の骨の感染症、口腔顔面放射線療法を受けた患者など）を持つ患者を治療する場合は、特別な注意を払うこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ・ 直射日光を避け、常温、常湿で清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ストローマン・ジャパン株式会社

連絡先：0120-689-930

外国製造業者：Southern Implants (Pty) Ltd

外国製造業者国名：南アフリカ共和国