

特定保守管理医療機器

コンバーMT

【警告】

<使用方法>

- 昇降、リクライニング、チルト等の操作時は周囲に十分に注意し、また、下空間に人や物が入り込んでいないか十分に確認してください。
[動作部に挟まれたり、接触したりしてケガをする恐れがあります]
- 昇降(電動)操作中は、シート、バックサポート、レッグサポートなどの下に、手や足を入れないでください。
[動作部に手や足を挟んでケガをする恐れがあります]
- ストレッチャー時、ヘッドサポート部およびレッグサポート部に絶対に腰掛けしないでください。
[倒れたり、壊れたりしてケガをする恐れがあります]
- サイドフェンスやシートベルト(オプション品:TB-552)を使用していても、患者が麻酔等による無意識状態にある時は、乗っている患者から目を離さないでください。
[患者が無意識に動き、落下してケガをする恐れがあります]


【禁忌・禁止】

<使用方法>

- 本器の最大使用体重は 120kg です。それ以上の方の使用は絶対にしてしないでください。
[動作不良が発生したり、破損したりする恐れがあります]
- 電子治療機器（マイクロ波治療器、超音波治療器、高周波電位治療器など）を本器周辺で使用する場合は、昇降(電動)操作をしないでください。
[同時に使用した場合、誤動作や故障の原因になります]
- フットスイッチ(オプション品：TB-554)を接続した状態では、手術室内で使用しないでください。
[フットスイッチ(TB-554)の IP 保護等級が、手術室内での使用に適合していません]

【形状・構造及び原理等】

1.形状・寸法

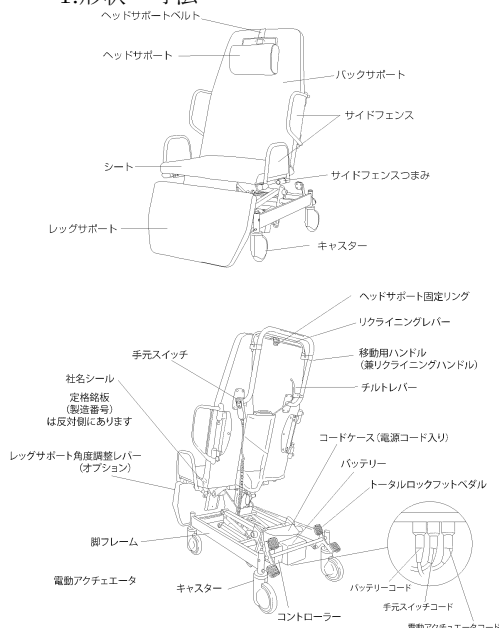

品 番：TB-500

全 高：550～900mm（ストレッチャー時）

1,400～1,750mm（チェア時）

奥行き：1,830mm（ストレッチャー時）

1,200mm（チェア時）

全 幅：709mm（サイドフェンス使用時）

2.電気的定格

定格電源電圧：AC100V（内蔵バッテリーあり）

電源周波数：50/60Hz

電源入力：100V 3A

3.付属品（オプション品）

本器と組み合わせて使用できる付属品（オプション品）には次のものがあります。

- ・イルリガートルスタンドホルダー（TB-550）
- ・酸素ボンベホルダー(TB-551)
- ・シートベルト(TB-552)
- ・MT用カバー(TB-553)
- ・フットスイッチ(TB-554)
- ・角度調整レッグサポート(TB-555)

※付属品（オプション品）の取り扱いについては、本器の取扱説明書をご覧ください。

4.原理

電動の駆動源による昇降機能と、リクライニング及びチルト機能を有する、患者を乗せての移動が可能な診療・処置台である。

【使用目的又は効果】

本器は、診療または処置のために用いる汎用の診療・処置台である。いくつかの基礎機能（昇降、傾斜等）を備えている。診療室又は手術室において用いる。電動式、手動式を含む。

* 【使用方法等】

※詳細は取扱説明書を参照して下さい。

1.操作方法

1)キャスター

4 輪ロック、4 輪フリー、走行制御の三機能があります。

2)高さ調整機能

手元スイッチで操作します。

取扱説明書を必ずご参照ください。

3)充電の仕方

手元スイッチのオレンジランプやあかランプが点灯したら、充電する必要があります。

(1)コントローラー横の埋め込みプラグに電源コードのコンセントを差し込みます。

(2)電源コードのプラグを AC/100V、アース付きコンセントに差し込んでください。

4)リクライニング操作の仕方

リクライニングレバーで操作します。

5)サイドフェンスの調整

(1)上げる時

カチッと音がして固定される位置まで上げてください。

(2)下げる時

サイドフェンスを支えながら調整つまみを引き、サイドフェンスを下ろしてください。

6)ヘッドサポートの高さ調整

マジックテープで調整します。

7)チルト機構

チルトレバーで操作します。

2.使用環境条件

温度：5～40℃

湿度：30～75%RH（結露しないこと）

気圧：700～1,060hPa

【使用上の注意】

※詳細は取扱説明書を参照して下さい。

1.移動時以外は、トータルロックペダルを踏み込み、キャスターを確実に固定してください。

[不意に本機が動き出し、ケガや思わぬ事故の原因になります]

2.坂道など傾斜のある場所での使用は十分に注意し、傾斜の強い坂道は、必ずバックサポートが下り側になるようにして走行させてください。

また、傾斜地での駐車は絶対にしないでください。

[不意に本機が動き出し、ケガや思わぬ事故の原因になります]

3.ストレッチャー状態、チェア状態にかかわらず、人が乗っている場合は、落下防止のため必ずサイドフェンスを上げてください。

[落下して、ケガをする恐れがあります]

4.昇降を連続して2分間以上しないでください。

[電動機が加熱し、破損する恐れがあります]

5.電源は必ず AC100V のコンセントを使用してください。

6.本器に異常が発見された場合は、速やかに使用を中止してください。

7.分解や改造をしないでください。

【保管方法及び有効期間等】

1.保管環境

温度：-15～60℃

湿度：10～85%RH（但し結露しない別紙 2-②

気圧：700～1,060hPa

2.耐用年数

本器の耐用年数は5年です。

（耐用年数は自己認証(当社データ)による）

【保守点検に係る事項】

※詳細は取扱説明書を参照して下さい。

1.お手入れ

本器への水分の付着や湿気は、さびや異音の原因になりますので避けると共に、付着した場合には直ちにふき取るようにしてください。

2.清拭について

清拭掃除は、水で薄めた中性洗剤にひたした布をよく絞って使用し、乾いた布でふき取ってください。

3.点検

本器は、使用になる場所や条件、また長時間の使用によって変化することが考えられます。本器、取扱説明書の「点検」の記載に従って保守点検を実施して下さい。

保守点検には、「使用前の日常点検」、「定期点検」があります。また、使用年数により定期的に交換が必要な「定期交換部品」があります。

耐用年数を超えてなお使用する場合は、必ず部品交換を含む総合的な修理をしてください。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

タカノ株式会社

****TEL:0265-85-3150**

販売業者

