

コンバー i

【警告】

<使用方法>

- 昇降、リクライニング等の操作時は周囲に十分に注意し、下空間に人や物が入り込んでいないか十分に確認してください。
[動作部に挟まれたり、接触したりしてケガをする恐れがあります]
- 昇降操作やリクライニング操作中は、シート、バックサポート、レッグサポートなどの下に、手や足を入れないでください。
[手や足を挟んでケガをする恐れがあります。乗っている人にも十分注意してください]
- ストレッチャー時、バックサポート部やレッグサポート部に絶対に腰掛けしないでください。
[倒れたり、壊れたりしてケガをする恐れがあります]
- 本製品の最大使用体重は 100kg です。それ以上の方の使用は絶対にしないでください。
[動作不良が発生したり、破損したりする恐れがあります]
- 転落防止の為、乗っている方から目を離さないでください。
[転落してケガをする恐れがあります]
- チェア状態での運搬は、昇降の最低位置で行ってください。ストレッチャー状態での運搬は、極力低い位置で行ってください
[転倒してけがをする恐れがあります]


【禁忌・禁止】

<使用方法>

- 専用のオプション部品以外を外付けして使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

*1.形状・寸法

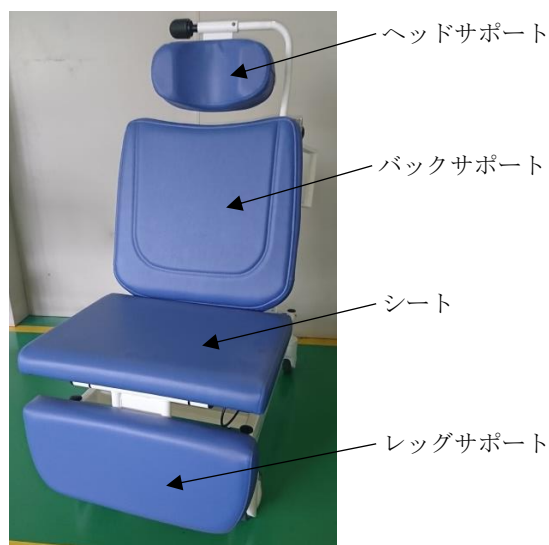

品 番: TB-601
全 高: 465～705mm (ストレッチャー時)
1,180～1,420mm (チェア時)
奥行き: 1,540mm (ストレッチャー時)
1,060mm (チェア時)
全 幅: 570mm

2.付属品 (オプション品)

本製品と組み合わせて使用できる付属品 (オプション品) には次のものがあります。

・顕微鏡取付支柱 (TB-650)

※付属品 (オプション品) の取り扱いについては、本製品の取扱説明書をご覧ください。

取扱説明書を必ずご参照ください。

3.原理

手動による昇降機能を有し、患者を乗せての移動が可能な眼科診療・処置用椅子である。

【使用目的又は効果】

本製品は、手動による昇降機能などを有する眼科診療、処置用椅子である。

【使用方法等】

※詳細は取扱説明書を参照して下さい。

1.操作方法

1)キャスター

4 輪ロック、4 輪フリー、走行制御の 3 つの機能が
あります。

2)高さ調整機能

(1)高さ調整①レバーを引き上げてください

(2)高さ調整②レバーを引き上げてください（この
時点で高さ調整①レバーを離しても構いません）

(3)高さ調整②レバーを引き上げたまま、本体クッ
ション面を上下させてください。

(4)止めたい高さで高さ調整②レバーを離してくだ
さい。

3)リクライニング

ヘッドサポートパイプを持ち、反対の手で移動用
ハンドルとリクライニングレバーを握り、動かし
たい方に動かします。

4)ヘッドサポートの調整

(1)ヘッドサポートの高さ調整は、ヘッドサポート
パイプを持ち、ヘッドサポート高さ調整グリップ
を緩めて調整してください。

(2)ヘッドサポートの前後調整は、ヘッドサポート
パイプを持ち、ヘッドサポート前後調整グリップ
を緩めて調整してください。

(3)ヘッドサポートの角度調整は、ヘッドサポート
パイプを持ち、ヘッドサポート角度調整グリップ
を緩めて調整してください。

2.使用環境条件

温 度：5～40℃

湿 度：30～75%RH（結露しないこと）

【使用上の注意】

※詳細は取扱説明書を参照して下さい。

<使用方法>

1.移動時以外は、トータルロックペダルを踏み込み、
キャスターを確実に固定してください。

[不意に本機が動き出し、ケガや思わぬ事故の原因
になります]

2.坂道など傾斜のある場所での使用は十分に注意し、
傾斜の強い坂道は、必ずバックサポートが下り側
になるようにして走行させてください。

また、傾斜地での駐車は絶対にしないでください。

[不意に本機が動き出し、ケガや思わぬ事故の原因に
なります]

3.本製品に異常が発見された場合は、速やかに使用を
中止してください。

4.分解や改造をしないでください。

【保管方法及び有効期間等】

1.保管方法

温 度：－10～50℃

湿 度：10～85%RH（但し結露しない事）

2.耐用期間

本製品の耐用期間は5年です。

（耐用期間は自己認証(当社データ)による）

【保守・点検に係る事項】

※詳細は取扱説明書を参照して下さい。

[使用者による保守点検事項]

1.お手入れ

本製品への水分の付着や湿気は、さびや異音の原因
になりますので避けると共に、付着した場合には直
ちにふき取るようにしてください。

2.清拭、消毒について

1)清拭掃除は、水で薄めた中性洗剤にひたした布をよ
く絞って使用し、乾いた布でふき取ってください。

2)消毒が必要な場合は、洗浄消毒液の一例として下記
溶液をご使用ください。

・0.2～0.5%塩化ベンザルコニウム水溶液

・0.2～0.5%塩化ベンゼトニウム水溶液

・0.1～0.5%クロールヘキシジン水溶液

上記の薬液等を湿らせた布で清拭してください。

3.点検

ご使用になる場所や条件、また長時間の使用によっ
て変化することが考えられます。本製品、取扱説明
書の「点検」の記載に従って保守点検を実施して下
さい。

[業者による保守点検事項]

1.1年に一度を目安に定期点検を業者にご相談くださ
い。

2.使用年数により定期的に交換が必要な「定期交換部
品」があります。耐用期間を超えてなお使用する場
合は、必ず部品交換を含む総合的な修理をしてくだ
さい。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

タカノ株式会社

**TEL 0265-85-3150

販売業者

取扱説明書を必ずご参照ください。