

機械器具 42 医療用剥離子
一般医療機器 婦人科用剥離子（JMDNコード 70955000）


加藤式自己擦過法器具

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

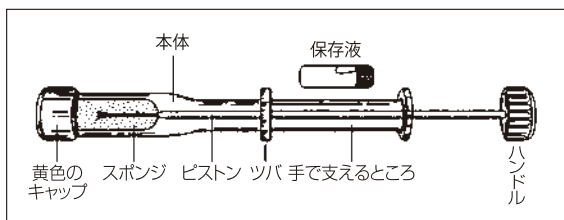

1) 構成

スポンジ：ポリエステル系ウレタンホーム
ピストン・キャップ：スチレン系エラストマー
本体・ハンドル：デンカABS GR500
保存液：50% エタノール

2) 本体の寸法（腔に入るところ）

長さ：75mm 直径：14mm

先端のキャップを取り腔内にツバが外陰部に達するまで挿入し、ピストンを押しスポンジを露出させます。その状態でピストンを5～6回まわし、スポンジ部で細胞を擦過する。
採取後、もとのようにピストンを引き、腔より取り出し保存液を注ぎ入れ、キャップをはめる。

【使用目的、効能又は効果】


細胞学的診断に供する粘膜細胞組織を子宮から採取するために用いる器具です。
この器具は、子宮頸がんの早期発見、早期治療を目的として家庭で手軽にがんの検査が受けられるよう考案したものです。

【品目仕様等】

滅菌保証水準（SAL）： 10^{-6}

【操作方法又は使用方法等】

ご使用に当たっては、取扱説明書をよくお読みください。

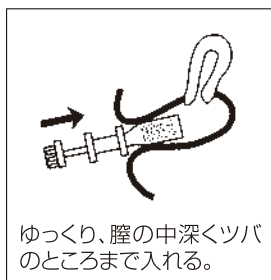

ゆっくり、腔の中深くツバの
のところまで入れる。



押すとスポンジが子宮に
当たりますので、そのまま
ハンドルを6回まわす。

- 本体のキャップを外し、ゆっくり腔の中深くツバのところまで入れる。
- ハンドルを押すと、スポンジが子宮に当たりますのでそのままハンドルを5～6回まわし、スポンジで子宮頸部の細胞を採取します。

【使用上の注意】

- ※子宮内に避妊器具等を装着されている方は医師に相談して使用して下さい。
- ※個人差がありますから生理が終わってから使用して下さい。
- ※提出される当日、または前日に採取して下さい。
- ※手をきれいにしてから使用して下さい。
- ※妊娠中の方は使用しないで下さい。
- ※使用前の性交、腔内洗浄は避けて下さい。
- ※使用前の入浴は避けて下さい。
- ※使用目的以外に使用しないで下さい。
- ※器具を丁寧に扱って下さい。ゆっくり腔に挿入し、ゆっくり出して下さい。
- ※万一使用後に体調の変化がある場合は医師に相談して下さい。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

保管方法 温度・湿度の高いところや、直射日光の当た
る所は避けて下さい。
小児の手の届かない所に保管して下さい。
使用有効期限 滅菌後3年

【包装】

1セット/袋

【主要文献及び文献請求先】

- 新 太喜治ほか：子宮癌集団検診における
加藤式自己採取法の検討
産婦人科の世界、第29巻
第8号；947・1977.
- 野田 定、加藤才子：子宮頸癌集団検診における
加藤式自己採取法の検討、2004

『文献請求先』

●大成メディカル株式会社
大阪府茨木市藤の里2丁目11番6号
電話 072-640-2125

【製造販売業者及び製造業者の氏名 又は名称及び住所等】

製造販売業者・製造業者

●大成メディカル株式会社

〒567-0054
大阪府茨木市藤の里2丁目11番6号
電話 072-648-3601

取扱説明書（裏面）を必ずご参照ください