

セルソフト®

再使用禁止


【警告】

- ・キャップを取り外した状態で、膈内へ挿入して下さい。
- ・子宮内に避妊器具等を装着されている方は医師に相談すること。

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・妊娠中及び妊娠期間終了後 3 ヶ月は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

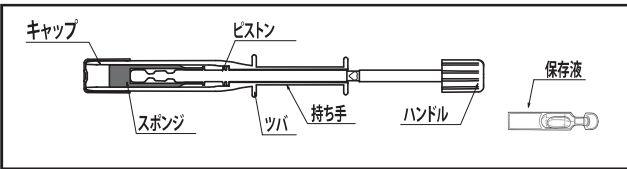

1. 構成

器具本体：ポリエチレン
ハンドル：ポリエチレン
キャップ：ポリエチレン
ピストン：ポリエチレン
保存液：エタノール 50%
スポンジ：ウレタン加工品

2. 原理


先端のキャップを取り、器具先端が子宮口に当たるまで挿入し、ピストンを押し、スポンジを露出させる。
その状態で、ハンドルを 6 回程度回し、スポンジ部で細胞を採取する。（回す方向は、左右どちらでも可。）
採取後、もとのようにピストンを引き、膈より取り出し、保存液を注ぎ入れ、キャップを閉める。

【使用目的又は効果】

細胞学的診断に供する粘膜細胞組織を膈内から採取するために用いる器具です。

【使用方法等】

ご使用に当たっては、取扱説明書をよくお読みください。

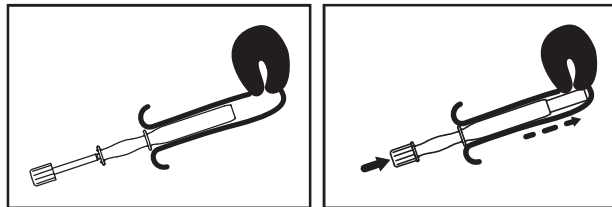

1. 本体のキャップを外し、ゆっくり膈の中深く、ツバの所まで入れる。
2. ハンドルを押すと、スポンジが子宮口に当たるので、そのままハンドルを 6 回程度回し、スポンジで膈内の細胞を採取する。（回す方向は、左右どちらでも可。）

【使用上の注意】

- 検査精度上、生理の出血が完全に止まってから使用する。
- 提出される当日、または前日に採取する。
- 使用前によく手を洗う。
- 妊娠中の方は使用しない。
- 24 時間以内の性交、膈内洗浄は避ける。
- 使用直前の入浴は避ける。
- 使用目的以外に使用しない。
- 器具を丁寧に扱い、ゆっくり膈に挿入し、ゆっくり取り出す。
- 万一使用後に体調の変化がある場合は、医師に相談する。
- 子宮内に避妊器具等を装着されている方は医師に相談する。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：温度・湿度の高い所や、直射日光の当たる所は避ける。
小児の手の届かない所に、保管する。
使用期限：3 年（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者・製造業者

大成メディカル株式会社

〒567-0054 大阪府茨木市藤の里 2 丁目 11 番 6 号

電話番号：072-648-3601

取扱説明書を必ずご参照ください



大成メディカル株式会社