

機械器具61 歯科用ハンドピース  
一般医療機器 歯科技工用電動式ハンドピース 70746000  
エンゼル Pocket Motor PENTA

## 【禁忌・禁止】

## 「使用方法」

- 以下のような歯科技工用切削器具(以降は「バー」という)は使用しないこと。  
「バー破損、飛び出しによるけがのおそれ」
- 振れ、曲がり、傷などがみられるもの
- シャンク部に摩耗が見られるもの
- バーの製造販売業者が指定する許容回転速度を守ること。「バー破損、モーターハンドピースの飛び出しによるけがのおそれ」


## 【使用方法等に関連する使用上の注意】

使用中の回転数変更は研磨材が破損する恐れがあるので、行わないこと。  
破損を避けるため、無理な角度や過度の圧力をかけて使用しないこと。

## 【使用目的又は効果】

本品は、モーターを内蔵し、歯科技工で用いる歯科用バー、リーマー等の回転器具を接続し、技工物などの加工(研削・研磨)を行う。

## 【形状・構造等】

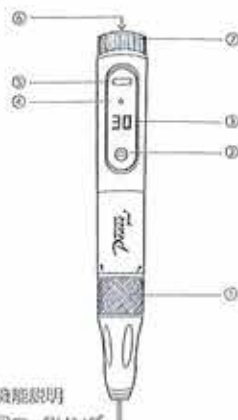

## 機能説明

- ①ロックリング
- ②パワーボタン(回転/停止スイッチ)  
※2回続けて押すとリッグラリー表示が点滅します。
- ③液晶画面(回転数・充電残量表示)  
※バッテリー残量が少なくなると「Lo」と表示されます。  
※「Lo」の表示が出続ける場合は残存の温度が下がるまでご使用をお控え下さい。  
※エラー時は「Er」と表示されます。
- ④充電インジケータランプ  
※充電時(赤ランプ点灯)、充電完了時(青ランプ点灯)
- ⑤充電差込み口(5V USB)  
※急速充電タイプは対応せず、5V 1~2A程度のアダプターをご使用ください。  
また充電しながらのご使用は推奨しません。
- ⑥1回押すたびに回転方向が切り替わります。
- ⑦回転速度調整  
右に回すと回転速度UP、  
左に回すと回転速度DOWNとなります。

## 【使用方法等】

1. ハンドピースのビットがしっかりと固定されているかを確認してください。
2. 一番下の部分を1回押すたびに回転方向が切り替わります。
3. 回転速度の調整は下のリング部分を右に回すと回転速度がUPし、左に回すと回転速度がDOWNとなります。

## 【充電方法】

1. バッテリー残量が少なくなると液晶画面に「Lo」と表示されます。
2. 付属のUSBケーブルを使用し、充電させてください。
3. 充電時は赤ランプが点灯し、充電完了時には青ランプが点灯します。
4. 充電しながらのご使用は推奨いたしません。

## ●充電時間:3.5時間(フル充電)

## ●連続回転時間:5時間(無負荷時)

## 使用環境条件

- ・温度: 0℃~40℃
- ・湿度: 35%~70%
- ・気圧: 1.060hPa(アンダー)
- ・環境: 引火性の物から遠ざけ、必ず換気をしてください

## 【保管方法及び有効期間等】

## 「保管方法」

水分、腐食性薬剤及びこれらの蒸気、並びに衝撃や外部圧を避け保管すること。

## 【製造販売業者および製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者: 合同会社 WSPTジャパン  
〒341-0024  
埼玉県三郷市三郷1-20-18  
TEL 048-954-5636

販売業者: 大栄歯科産業株式会社  
〒550-0003  
大阪市西区京町堀1丁目10番17号  
TEL 06-6441-3332

| 入力電圧               | 回転速度                 | バッテリー容量      |
|--------------------|----------------------|--------------|
| DC5V               | MAX32,000RPM         | 1200mAh      |
|                    |                      |              |
| 対応ビット直径<br>φ2.35mm | ハンドピース長さ<br>22mm     | L全長<br>168mm |
| 充電時間<br>約3.5時間     | 連続使用時間<br>約5時間(無負荷時) |              |

## 【使用上の注意】

1. 使用前にハンドピース先端部分を清掃してください。
2. ハンドピースを交換する際は、電源を切ってください。
3. ビットを差し込む際は、ビットの振動や落下を防ぐため、ハンドピースの底まで差し込んでください。
4. 曲がったり、変形したり、壊れたりしているビットは差し込まないで下さい。
5. 異常な振動や音が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。
6. 回転部分には触れないでください。
7. 安全のため、使用の際は子供から遠ざけてお使いください。