

機械器具61 歯科用ハンドピース  
一般医療機器 歯科技工用電動式ハンドピース 70746000  
エンゼル Smart Motor Cubo

## 【禁忌・禁止】

## 「使用方法」

- ・以下のような歯科技工用切削器具(以降はバーという)は使用しないこと。  
「バー破損、飛び出しによるけがのおそれ」
- ・振れ、曲がり、傷などがみられるもの
- ・シャンク部に摩耗が見られるもの
- ・バーの製造販売業者が指定する許容回転速度を守ること。「バー破損、モーターハンドピースの飛び出しによるけがのおそれ」

## 【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 使用中の回転数変更は研削材が破損する恐れがあるので、行わないこと。
- 破損を避けるため、無理な角度や過度の圧力をかけて使用しないこと。

## 【使用目的又は効果】

本品は、モーターを内蔵し、歯科技工で用いる歯科用バー、リーマー等の回転器具を接続し、技工物などの加工(研削・研磨)を行う。

## 【形状・構造等】

## 【使用方法等】

1. コントロールボックスの電源が切れていることを確認してください。
  2. コントロールボックスにハンドピースを接続してください。
  3. ハンドピースのビットがしっかりと固定されているかを確認してください。
  4. 片手でハンドピースを持ち、もう一方の手でコントロールボックスの電源ダイヤルスイッチを回してください。
  6. ハンドピースの速度を変更する場合はダイヤルを時計回りに回すと、回転速度が上がり、反時計回りで下がります。
  7. 使用後は速度を0に戻し、コントロールボックスの①電源ボタンを1秒間長押しして電源をOFFにしてください。
- ※注) 本製品は精密機器です。本書の使用 방법에従いご使用ください。

## 【充電方法】

1. コントロールボックスの電源が切れていることを確認してください。
  2. 付属のUSBコードを使用し、接続口へ接続してください。
  3. ディスプレイの電池マークが点滅したら充電が開始されます。
  4. 電池ランプが4つ点灯したら充電完了です。
- 充電時間: 3.5時間(フル充電)
  - 連続回転時間: 8時間(無負荷時)
- ※作業によって使用可能時間は異なります。
- バッテリー残量ランプ表示が1つ点灯になってからの充電をお勧めします。
  - 充電ランプ表示の目安
    - ・ランプ4つ … 充電がフルの状態(100~90%)
    - ・ランプ2~3つ … 継続使用が可能な状態(90~30%)
    - ・ランプ1つ … そろそろ充電が必要な状態(30%未満)
- ※ご使用期間及び使用頻度により異なります。

## 使用環境条件

- ・温度: 0℃~40℃
- ・湿度: 35%~70%
- ・気圧: 1.060hPa(アンダー)
- ・環境: 引火性の物から遠ざけ、必ず換気をしてください

## 【保管方法及び有効期間等】

## 「保管方法」

水分、腐食性薬剤及びこれらの蒸気、並びに衝撃や外部圧を避け保管すること。


## 【製造販売業者および製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者: 合同会社 WSPTジャパン  
〒341-0024  
埼玉県三郷市三郷1-20-18  
TEL 048-954-5636

販売業者 大栄歯科産業株式会社  
〒550-0003  
大阪市西区京町堀1丁目10番17号  
TEL 06-6441-3332

## 【使用上の注意】

1. 使用前にハンドピース先端部分を清掃してください。
2. ハンドピースを交換する際は、電源を切ってください。
3. ビットを差し込む際は、ビットの振動や落下を防ぐため、ハンドピースの底まで差し込んでください。
4. 曲がったり、変形したり、壊れたりしているビットは差し込まないで下さい。
5. 異常な振動や音が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。
6. 回転部分には触れないでください。
7. 安全のため、使用の際は子供から遠ざけてお使いください。

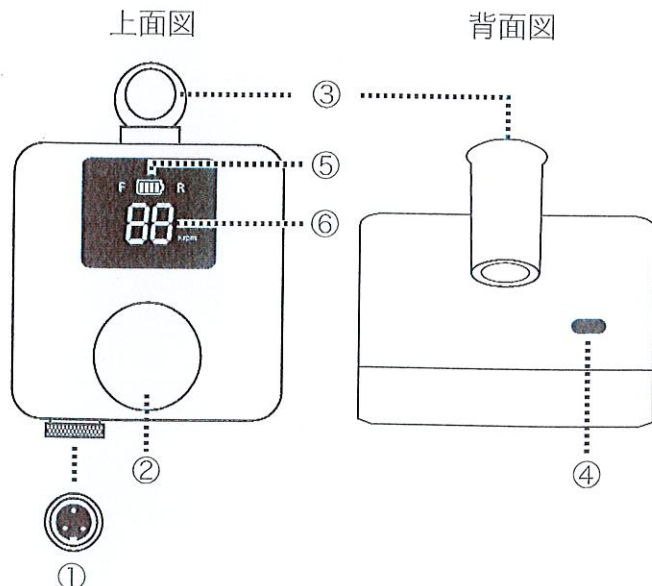

- ① ハンドピースインターフェイス
- ② スピード調整ダイヤルスイッチ  
(ON/OFF、スピード調整、一時停止)、  
F(フォワード)/R(リバース)長押しで切り替え
- ③ ハンドピースホルダー
- ④ USBコード接続口(電源入力口)
- ⑤ パワーディスプレイ(電池残量表示ランプ)
- ⑥ スピードディスプレイ