

機械器具61 歯科用ハンドピース
一般医療機器 歯科技工用電動式ハンドピース 70746000
エンゼル Portable Motor BELTE

【禁忌・禁止】

「使用方法」

- ・以下のような歯科技工用切削器具(以降はバーという)は使用しないこと。
「バー破損、飛び出しによるけがのおそれ」
- ・振れ、曲がり、傷などがみられるもの
- ・シャンク部に摩耗が見られるもの
- ・バーの製造販売業者が指定する許容回転速度を守ること。「バー破損、モーターハンドピースの飛び出しによるけがのおそれ」


【使用方法等に関連する使用上の注意】

使用中の回転数変更は研削材が破損する恐れがあるので、行わないこと。
破損を避けるため、無理な角度や過度の圧力をかけて使用しないこと。

【使用目的又は効果】

本品は、モーターを内蔵し、歯科技工で用いる歯科用バー、リーマー等の回転器具を接続し、技工物などの加工(研削・研磨)行う。

【形状・構造等】

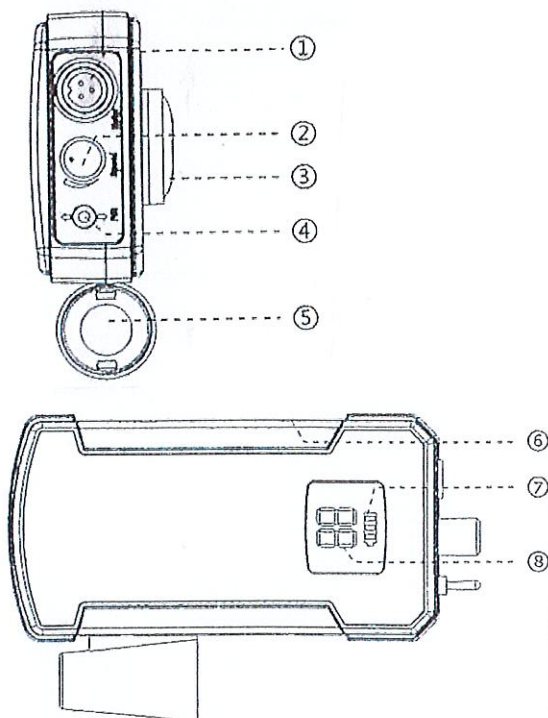

- ①ハンドピースインターフェイス
- ②スピード調整ダイヤルスイッチ
(ON/OFFスイッチ機能付き)
- ③ベルトフック
- ④F(FORWARD)/R(リバース)切り替え及び一時停止スイッチ
- ⑤ハンドピースフォルダー
- ⑥ACアダプター接続口(電源入力口)
- ⑦パワーディスプレイ(電池残量表示ランプ)
- ⑧スピードディスプレイ

【使用方法等】

1. コントロールボックスの電源が切れていることを確認してください。
 2. コントロールボックスにハンドピースを接続してください。
*コントロール側⇔ハンドピース側のコネクタ部分の形状を合わせる必要があります。
必ず接続口の向きをご確認ください。
 3. ハンドピースのビットがしっかりと固定されているかを確認してください。
 4. コントロールボックスの①電源ボタンを一秒間長押し、電源を入れてください。
 5. 片手でハンドピースを持ち、もう一方の手でコントロールボックスの電源ダイヤルスイッチを回してください。
 6. ハンドピースの速度を変更する場合はダイヤルを時計回りもしくは反時計回りに回転し、速度を調節してください。
 7. 使用後は速度を0に戻し、コントロールボックスの電源ボタンを1秒間長押しして電源をOFFにしてください。
- ※注) 本製品は精密機器です。本書の使用方法に従いご使用ください。

【充電方法】

1. コントロールボックスの電源が切れていることを確認してください。
 2. 付属のUSBコードを使用し、INへ接続してください。
 3. ディスプレイの電池マークが点滅し FAX 048-954-5637
 4. 電池ランプが3つ点灯しましたら充電完了です。
- 充電時間: 3時間(フル充電)
 - 連続回転時間: 10時間(無負荷時)
- ※作業によって使用可能時間は異なります。
- バッテリー残量ランプ表示が1つ点灯になってからの充電をお勧めします。
 - 充電ランプ表示の目安
 - ・ランプ3つ ... 充電がフルの状態(100~90%)
 - ・ランプ2つ ... 継続使用が可能な状態(90~30%)
 - ・ランプ1つ ... そろそろ充電が必要な状態(30%未満)
- ※ご使用期間及び使用頻度により異なります。

使用環境条件

- ・温度: 0℃~40℃
- ・湿度: 35%~70%
- ・気圧: 1.060hPa(アンダー)
- ・環境: 引火性の物から遠ざけ、必ず換気をしてください

【保管方法及び有効期間等】

「保管方法」

水分、腐食性薬剤及びこれらの蒸気、並びに衝撃や外部圧を避け保管すること。

【製造販売業者および製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者: 合同会社 WSPTジャパン
〒341-0024
埼玉県三郷市三郷1-20-18
TEL 048-954-5636

販売業者: 大栄歯科産業株式会社
〒550-0003
大阪市西区京町堀1丁目10番17号
TEL 06-6441-3332

【使用上の注意】

1. 使用前にハンドピース先端部分を清掃してください。
2. ハンドピースを交換する際は、電源を切ってください。
3. ビットを差し込む際は、ビットの振動や落下を防ぐため、ハンドピースの底まで差し込んでください。
4. 曲がったり、変形したり、壊れたりしているビットは差し込まないで下さい。
5. 異常な振動や音が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。
6. 回転部分には触れないでください。
7. 安全のため、使用の際は子供から遠ざけてお使いください。