


特定保守管理医療機器

ホームトラクション

【禁忌・禁止】

- ・患者に異常を発見した際は直ちに使用を中止すること。
- ・医師の指示以外の使用をしないこと。

【形状・構造及び原理等】

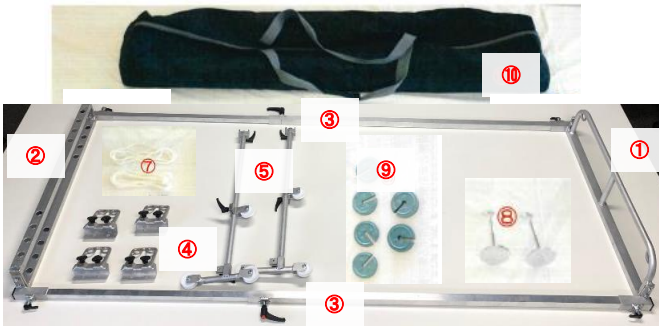

- ①頭側フレーム ②足側フレーム ③長さ調整フレーム ④抑制ジャケット固定金具
⑤滑車(長) ⑦牽引ロープ ⑧重鎮吊り金具 ⑨重鎮
⑩キャリーバック

構造

全長: 約1200mm～2100mm (適正調整幅)

重さ: 約10Kg

【使用目的又は効果】

- ・本品は治療時に変動なし(静止)牽引力を作用させる非能動型牽引装置である。
- ・本品は乳幼児用股関節の牽引療法に使用する牽引装置である。

【使用方法】

- ・対応するベット等に本装置を設置する。
 - ・滑車を経由して、適切な重鎮を付けたロープ等で身体の対象部位に牽引し固定する。
 - ・その他必需品を用意する。
- (抑制ジャケット、対抗牽引パンツ、組み合わせ使用する医療機器
販売名: スピードトラック 届け出番号: 13B1X00207000018)
・詳細はホームトラクション取扱説明書および医師の指示による

【使用上の注意】

- ・医師の指導に従って牽引時の重鎮の重さ、包帯の巻き方を行ってください。
- ・スピードトラック(トラックバンド)の締付(圧迫)による鬱血にご注意ください。
- ・長時間使用による床ずれ・圧迫にご注意ください。
- ・部品の誤飲(乳幼児の手が届く場所に置かないでください。)
- ・取扱い説明書及び医師の指示に従ってください。
- ・使用時は過度の負荷をかけないでください。
- ・締結部の固定箇所は必ずご確認ください。
- ・使用中は継続して管理、監督をして下さい。

【保管方法及び保証期間等】

- ・高温・多湿、直射日光のあたる場所を避け、室温で清潔な場所に保管すること。
 - ・保証期間: 1年間
- ※第三者の修理、天災による破損、不適切な使用及び故意による破損は除外となります。
付属品も除外

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

- ・使用前、使用後に正常に作動することを確認下さい。
- ・使用前、使用後に破損箇所がないことを確認下さい。

【業者による保守点検事項】

- ・本装置を安全に使用するにあたり、弊社及び弊社承認の業者による年1回の定期点検を実施して下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者: 株式会社たかふね工業

住 所: 〒454-0808

愛知県名古屋市中川区九重町6-17

電 話 番 号: 052-361-7551 FAX 052-361-7550

製 造 業 者: 株式会社たかふね工業