


器 51 医療用嘴管及び体液誘導管

一般医療機器 精液注入用子宮カテーテル 34077000 (JMDN コード)

セルフシリンジ

【禁忌・禁止】再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

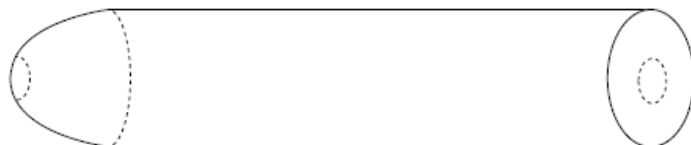

材質 : シリコン 内径 : 2mm 外径 : 7mm 長さ : 60mm $\pm$ 5mm
寸法公差 : $\pm$ 0.2mm 硬度 : HS = 50 $\pm$ 5

【使用目的、効能又は効果】

1. 本品は腔内に挿入し、先端の開口部より精液を子宮内に注入する。
2. 本品は単回使用である。

【使用方法】

1. 本品の使用に際しては、必ず付属のシリンジを使用する。
2. 本品を開封後、シリンジと正しく接続する。
3. 本品の先端開口部から精液をゆっくりと吸引する。
4. 本品の先端部を腔内に挿入する。
5. 精液をゆっくりと注入する。
6. 精液の注入後、本品をゆっくりと抜去する。

【使用上の注意】

1. 単回使用に限り、再使用を行わないこと。
2. 開封は使用直前に行うこと。
3. 万が一、包装が破損している場合、又は本品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
4. 使用に際して不安がある場合、使用前に専門医に相談すること。

【保管方法及び使用期間等】

使用期間 : 製造から 5 年間。

保管方法 : 直射日光を避け、水漏れのない環境で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

法 人 名 : 武内製薬株式会社

住 所 : 東京都品川区東五反田 1-10-10 オフィス T&U

許可番号 : 13B3X10269