


機械器具 55 医療用洗浄器
一般医療機器 歯科用口腔洗浄器(12304020)

POINT UNIT2 シリンジ

【警告】

・ノズルがホルダーにロックされていることを確認すること。

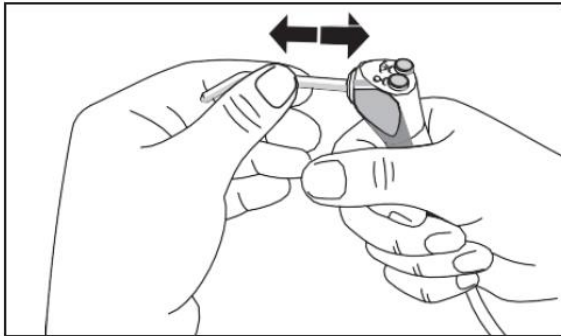

【形状・構造及び原理等】

1. 外観図



2. 水及びエアーの許容範囲

水の一次圧力(許容範囲): 0.08~0.2 MPa
水の二次圧力(最高): 0.2 MPa
空気の一次圧力(許容範囲): 0.25~0.30 MPa
空気の二次圧力(最高): 0.30 MPa

3. 動作環境

周辺温度: 0~40℃
相対湿度: 10~85%
気圧: 700~1060 hPa

4. 動作原理

歯科用ユニットより供給された水及びエアーは、水ボタン、エアーボタンを操作して、ノズル先端より水またはエアーを噴射する。エアーボタンと水ボタンを同時に押した場合、スプレー水を噴出する。

【使用目的又は効果】

創面清掃の目的で処置する部位(窩洞やう窩)を洗浄し、歯及び残留充填材等の破片又は壊死性物質及び感染性物質を除去するために歯科治療で使用するよう特別に設計された器具で、能動型医療機器に接続し使用する。

【使用方法等】

- (1) シリンジをメインチューブに接続する。
- (2) 水ボタンを押すと水が噴出する。
- (3) エアーボタンを押すとエアーが噴出する。
- (4) 同時に押すとスプレー水を噴出する。
- (5) 水ボタンとエアーボタンの押し込み量により、水及びエアーの流量調節が可能である。

【使用上の注意】

1. 本品を使用する前に、取扱説明書をよく読むこと。
2. ノズルが確実に装着されているのを確認すること。
3. ノズルを患者に使用する前に、必ず滅菌すること。新しいノズルを使用する際も、前もって滅菌すること。
4. 取り扱いには十分注意し、使用前にノズルの表面に異物や染みがないか確認すること。
5. ノズルは廃棄前に滅菌し、医療廃棄物として廃棄すること。
6. 本製品をしばらく使用しなかった場合、使用前に必ず装置が正常かつ、安全に作動することを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管環境

温度: 0~45℃
湿度: 10~85%
大気圧: 700~1060hPa

2. 耐用期間


正規な保守点検を実施した場合に限り、製造出荷後 7 年とする(自己認証)。

【保守・点検に係わる事項】

点検項目	点検頻度
ノズルの接続状態	毎回、使用前
シリンジのメインチューブに接続状態	毎回、使用前
水・エアーสプレーの状態	毎回、使用前
汚れ、薬品等の除去	使用后


1. シリンジの洗浄と滅菌

流水でシリンジの洗浄が可能である。
ノズルを分離し 132℃(270°F)で 5 分間滅菌する。

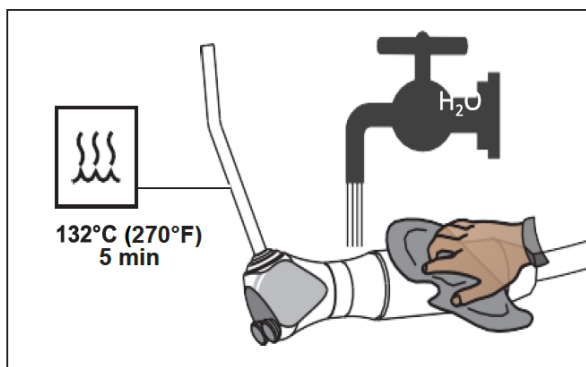

2. ノズルの分離

リング形のロック解除ボタンを押しながらノズルを抜く。

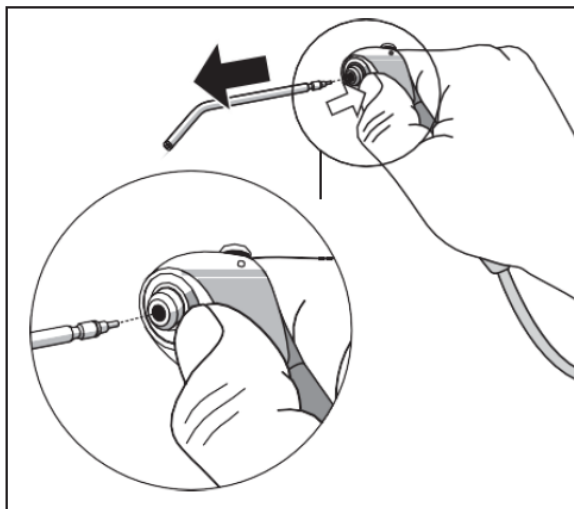

業者による保守点検が必要な場合はお問い合わせ先にご連絡ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

株式会社ダブリューエスエム

〒921-8154

石川県金沢市高尾南 2-33-101

wsm@wsmcert.com

TEL:076-209-0942 FAX:076-205-5572

外国製造業者:

ハンリムオスラムインプラント株式会社

HALLIM OSLAM IMPLANT Co., Ltd. (大韓民国)