

## SLP リューザブルサーミスタセンサ

## 【禁忌・禁止】

## 併用医療機器


- ・磁気共鳴画像診断装置 (MRI 装置) との併用  
[MRI 装置への吸引、故障、破損、熱傷等が起こる恐れがある。]
- ・除細動器  
[故障、破損、熱傷等が起こる恐れがある。]
- ・可燃性麻酔ガス及び高濃度酸素存在下では使用しない事。  
[爆発または火災を引き起こす恐れがある。]

## 使用方法

- ・痛みや痒みなどの異常を感じた場合は使用を中止する事。

## 【形状・構造及び原理】

## 1. 外観形状及び寸法

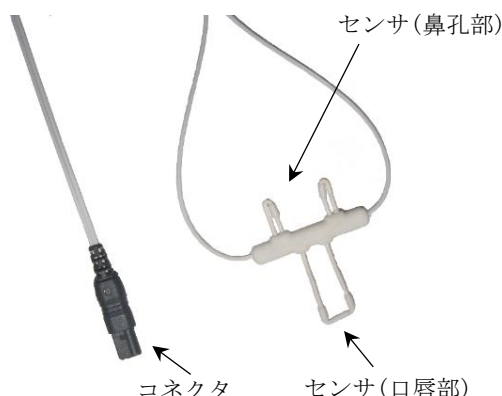

| 品番   | 長さ (cm) |
|------|---------|
| 1468 | 90      |
| 1470 | 200     |

## 2. 原理

呼吸の気流による温度変化により、抵抗値が変動する。

## 【使用目的及び効果】

本品は、被検者の鼻口部に装着し、呼吸による気流を検出する睡眠評価用センサである。

## 【使用方法等】

1. 被検者の装着部分を洗浄消毒する。
2. センサの鼻孔部を前に曲げ、センサ本体を少し離して丸く曲げる。
3. センサの口唇部を上唇の中心に合わせる。
4. ワイヤを被検者の耳の上から顎下に引き、留め具を調整し、ワイヤを調整する。
5. 適宜、ワイヤを医療用テープで固定する。
6. コネクタを、本品を使用する睡眠評価装置に接続する。
7. 使用後は清掃し、十分乾燥させたのち、絡まないように緩く巻いて室温で保管する。
8. 併用医療機器

| 販売名          | 認証番号             |
|--------------|------------------|
| エンブラ N 7000  | 21500BZY00548000 |
| エンブレッタ MPR   | 228AFBZX00023000 |
| エンブラ Dx シリーズ | 302ALBZX00023000 |

## 【使用上の注意】

- ・ワイヤが被検者の首に巻き付かない様に、ワイヤの取り回しには気を付ける事。
- ・皮膚に傷や炎症がある場合は使用しない事。
- ・損傷した本品は使用しない事。

## 【保管方法及び有効期間】

## 1. 保管方法

- ・高温、多湿、直射日光、ほこりの多い場所を避け室温で保管する事。
- ・塩分、硫黄分などを含んだ空気に晒されない事。

## 2. 保管環境

- ・温度: -20 ~ +60℃
- ・湿度: 5 ~ 95 % (結露しない事)

## 3. 有効期間

6 か月 [自己認証 (当社データ) による]

## 【保守・点検に係る事項】

- ・使用前及び使用後に、中性洗剤で清掃する事。
- ・清掃後、糸くずの出ない布で拭き取り、十分に乾燥させる事。
- ・消毒液に浸したりしない事。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- ・製造販売業者  
チェスト株式会社  
03-3813-7200

- ・製造業者  
SLP Ltd. (イスラエル)