

フィンガークリップセンサ 8000AA

【禁忌・禁止】

＜適用患者＞

- ・次の患者には使用しないこと。
体重 30kg 未満

＜併用医療機器＞


- ・次の装置とは併用しないこと。
磁気共鳴画像診断装置（MRI 装置）

＜使用方法＞

- ・本品を装着する際には、センサをテープや絆創膏などで指に巻き付けることは絶対にしないこと。[指の血流を妨げるため、低温火傷になることがある]
- ・本品を長時間装着すると、装着部が低温火傷、発赤、かぶれなどになることがある。痛みやかゆみなどの異常を感じた場合には使用を中止し、担当の医師に相談すること。

【形状・構造及び原理等】

〔形状〕

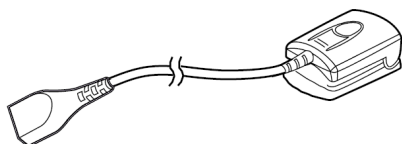

〔原理〕

患者の手足の指などに装着し、赤外線及び赤色線の透過により、脈動している血液（動脈血）内にある還元ヘモグロビン及び酸化ヘモグロビンの比率を吸光度及び反射度にて計測する。

【使用目的又は効果】

小児又は成人患者の手指、足指の部分に使用し、皮膚を通して光を照射し、動脈組織血中のオキシヘモグロビン及びデオキシヘモグロビンによって吸収される光量を検知するために用いる。親機で信号が受信され、結果が表示される。

【使用方法等】

使用準備


- 1) 本品を親機に接続する。

使用時

- 1) センサ部を押し広げる
- 2) センサ部に指を奥まで入れる。

使用後

- 1) 親機より取り外す。

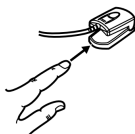

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・センサの取り付け及び接続は確実にすること。[本品が正しく接続されていない場合、測定が不正確になることがある]
- ・本品を使用する時は、ラジオ、テレビ、携帯電話などの電波を放射する機器から 1.5m 以上離すこと。[本品の性能、機能を損なうことがある]
- ・直射日光の当たる場所や暖房器具の近くには放置しないこと。
- ・水滴のかかる場所や湿気の多い場所には置かないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

高温、多湿な場所、直射日光の当たる場所、ほこりが多い場所、水がかかる場所を避けること。また、塩分、イオウ分等が含まれる空気にさらされないようにすること。

〔耐用期間〕

1 年 [自己認証(当社データ)による]

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

お手入れ方法

- ・消毒用エタノールをしみ込ませた柔らかい布で汚れを拭き取る。また、コード類も同様に消毒用エタノールをしみ込ませた柔らかい布で汚れを拭き取る。
(ベンジンやシンナーなどの溶剤は使用しないこと)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：チェスト株式会社
TEL：03-3813-7200

製造業者：NONIN MEDICAL INC.
アメリカ