


## スマートベンチレータ Vivo 50 の付属品 リークポート付呼吸管

### 【禁忌・禁止】

- ・使用前、使用中及び使用後には適切な点検を行うこと。
- ・点検や使用中に異常が認められたときは使用を中止し、適切な処置を行うこと。[患者の安全確保のため]

### 【形状・構造及び原理等】

[形状]

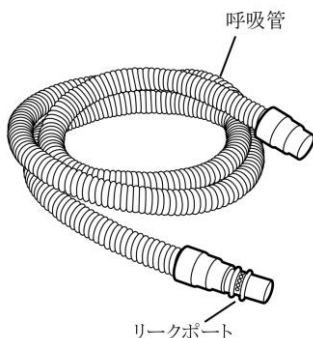

材質: ポリエステル、シリコン (呼吸管)  
ポリカーボネート (リークポート)

### 【使用目的又は効果】

本品及び装置本体の取扱説明書、添付文書を参照すること。

### 【使用方法等】

本品及び装置の取扱説明書を参照すること。

### 【使用上の注意】

<基本的な注意事項>

- ・本品はスマートベンチレータ Vivo 50 に接続し使用する
- ・使用する前に呼吸管及び装置本体の取扱説明書及び添付文書を読み、内容を充分理解して使用すること。
- ・異常が認められる場合は使用しないこと。
- ・直射日光が当たる場所には置かないこと。
- ・使用する前にリークポートの確認を行うこと。[塞がっていると窒息する恐れがある]
- ・フルフェイスマスクを使用する場合は、必ず安全弁を使用すること。又、使用前に動作を確認すること。[塞がっていると窒息する恐れがある]
- ・呼吸管をベッドの上に放置しないこと。[寝ている時に頭や首に巻き付くことがある]
- ・装置が停止している場合は、患者から呼吸回路を取り外すこと。[塞がっていると窒息する恐れがある]
- ・呼吸管内部に水が貯留した場合はこれを取り除くこと。
- ・酸素療法装置からの呼吸管を呼吸回路に接続している場合は、装置を停止させる前に酸素療法装置からの呼吸管を外して装置を停止させること。引き続き酸素療法を行う場合は、装置を呼吸回路から外した後、再度行うようにすること。[装置内部や呼吸回路中に酸素が充満し、火災の原因となることがある]
- ・廃棄する場合は地域の環境規制に従い行うこと。

### \*【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- ・直射日光の当たる場所で保管しないこと。
- ・ほこり等のない場所に保管すること。

<推奨使用期間>

- ・6ヶ月

### 【保守・点検に係る事項】

- ・新しい患者への使用前には必ず滅菌するか新しいセットを使用すること。リークポートは新しいものを使用すること。

<洗浄>

- ・中性洗剤を入れたぬるま湯に浸す。
- ・ブラシなどで汚れを落とす。
- ・ぬるま湯でよくすすぐ。
- ・水分を拭き取るなどして、十分に乾燥させる。

<消毒>

- ・次の消毒液が使用できる。

Aniosyme  
Gigasept<sup>®</sup>FF  
Steranios  
Sporox<sup>®</sup>II

- ・消毒前は洗浄すること。
- ・消毒の前後は水で十分にすすぐこと。

<滅菌>

- ・呼吸管は次の滅菌が行える。  
(リークポートは滅菌できないため必ず取外すこと。)  
オートクレーブ 126℃ 15分 20回まで

<処置後>

- ・必ず劣化等が見られないことを確認すること。

本品及び装置本体の取扱説明書、添付文書も参照すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: チェスト株式会社  
TEL: 03-3813-7200

製造業者: Breas Medical AB  
スウェーデン