

患者体位固定用天板 Type-T

【禁忌・禁止】

天板の患者とアクセサリーの合計積載重量が 100Kg 以上で使用しないこと。[不具合が生ずる恐れがある]


【形状・構造及び原理】

1. 構成

本品は、以下の各部により構成される。

- 1) ベースプレート
- 2) トッププレート
- 3) ガイドレール
- 4) 足置台
- 5) 固定バンド

2. 各部の名称

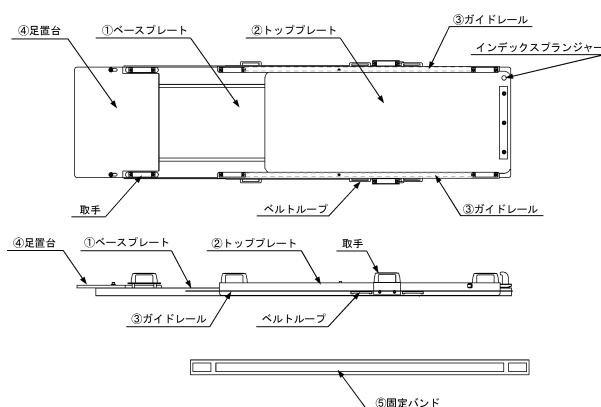

3. 本体寸法及び質量

タイプ	長さ	幅	高さ	質量
標準	1,880 mm	531 mm	88 mm	約 13.7 kg
1,700	1,700 mm	531 mm	88 mm	約 12.6 kg

※寸法および重量は足置台を含む

4. 原理

トッププレートはベースプレート上にあるレールをガイドとして移動可能であり、インデックスブランジャーにより固定される。(ベースプレート端で固定)

インデックスブランジャーはレバーを引き上げながら回転させると内蔵ピンが解除され、トッププレートが移動可能となる。取手は、撮影台、治療台及びビストレッチャー間の患者移動時において、患者を乗せた状態で本品を水平にスライドしながら移動できるよう装備される。

5. 動作環境条件

- ・温度：10～40℃
- ・湿度：30～85%（結露・氷結のないこと）
- ・気圧：700～1060hPa

【使用目的又は効果】

本品は、画像診断時や放射線治療に際し撮影台、治療台などの上に載せて、患者の腹部及び骨盤部を適切に位置決め、固定する支脚器なしの患者体位固定具である。

連続的画像診断または連続的放射線治療で容易に再現性のある位置決めをするため、スライド機能を有する天板が配置されている。また、患者を乗せた状態で本品ごと移動できるよう取手が装備される。

【使用方法等】

- (1) 本品を撮影台、治療台及びビストレッチャーなどの上に載せる。
- (2) ベルトループ及び取手を使用して、固定バンドで撮影台、治療台及びビストレッチャーなどに固定する。
- (3) 患者の体幹部がトッププレート上に位置するように乗せ、必要な処置を実施できるように適切なポジショニングを行う。トッププレートを移動する場合はインデックスブランジャーのロックを解除し移動する。
- (4) 撮影台、治療台及びビストレッチャー間の移動の際には、固定バンドを撮影台、治療台及びビストレッチャーなどから取り外し、本品と患者を固定する。
- (5) 撮影台、治療台の横にストレッチャーを配置し、取手を掴んで本品をストレッチャー上に水平にスライドしながら移動する。
- (6) CT 室などに搬送し使用する際には、取手を掴んで撮影装置天板上に本品を移し替える。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- 1) 使用前に本品の外観上の損傷、取手のぐらつきなどの異常が無いことを確認すること。
- 2) 患者を乗せ水平移動等する際は、患者が滑り落ちることが無いよう固定バンドで固定し、撮影台、治療台及びビストレッチャー等から本品を完全に浮かせることなく、スライドさせるように取手 4 ヶ所以上で静かに移動させること。
- 3) 撮影台、治療台及びビストレッチャー等に搭載する場合は、本品がテーブル等からずれないように固定バンドを利用して固定すること。

**【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 1) ガイドレールとの隙間や、トッププレート及びベースプレート等との隙間に衣服及び手や指等の身体の一部を挟みこまないように注意すること。
- 2) 移動の際には、撮影台、治療台上の凹凸部及び突起部への接触または干渉に注意し、本品を破損させないように注意すること。
- 3) 患者への処置時、撮影台、治療台及びビストレッチャー間の移動時、およびストレッチャーによる搬送時においては、適宜、

インデックスブランチャーにて適切な位置にトッププレート
をロックした状態とすること。

- 4) 本品については、試験による MR 安全性評価を実施して
いない。

<併用注意>

本品を搭載する撮影台、治療台及びストレッチャーは、表面が平
坦な構造のものとし、ベースプレート裏面に破損を与えない構
造のものとすること。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

保管に際しては、ベースプレートを下側にして、水平を維持でき
るようにして保管すること。

<耐用期間>

7年：[自己認証（当社データ）による]
指定された保守点検を実施した場合

【保守・点検に係る事項】

<使用者による保守点検事項>

- 1) 点検項目
 - ・目視確認
 - ・クリーニング
 - ・動作確認
- 2) 点検頻度
 - ・使用前後

【製造販売業者及び製造業者の指名又は名称等】

製造販売業者：株式会社千代田テクノル

製造業者：吉田電材工業株式会社