


スイングウェッジ アタッチメント

【形状・構造等】

下記成分により構成される。

1. 形状

写真の様な成型品

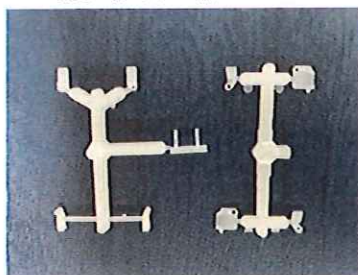

①前歯用

②臼歯用

2. 成分

PP 樹脂、

【性能、使用目的、効能又は効果】

1. 性能

歯科パターン成型品

融点

: 120 度

2. 使用目的

義歯製作時、審美的要求や操作性を考慮する時、クラスプに代わる維持装置のプラスチックパターンで、埋没焼却後鑄造して用いる。

【操作方法又は使用方法等】

1. 使用方法

- 1) 義歯の着脱方向を決定し、サベイングをする。
- 2) ワックスアップしたフレームに 2 つあるパターンの一方(小さい方)を植立し鑄造する。
- 3) 埋没焼却する際、従来品は樹脂が泡状に膨張し埋没材を破壊することがありましたが、本製品は発泡しないため、安心してヒートショック法にも御使いただけます。
- 4) 鑄造した金属フレームの軸受けに 1 ミリの矯正線を通し、もう一方のパーツを軸に通し、パターンの窪みに軟性ワックスを盛り、回転運動を繰り返しながら、歯牙の遠心面歯茎部の印象を採り、それを鑄造します。
- 5) 鑄造したパーツを軸に戻し一体化した後、レジンを重合し一体化します。
- 6) 歯科医師、歯科技工士以外は使用しないで下さい。
- 7) 本品を使用するにあたり、理解が困難な場合は、事前に弊社の実技研修等を受講するか、研修用テキストを別途購入してください。

2. 重要な基本的注意

- 1) 加熱したインスツルメントを直接パターンにつけると、溶けてしまう場合があります。
- 2) 切断や長さの調節はハサミで簡単に行なえます。皮膚等に付けないよう注意してお取り扱い下さい。
- 3) 研修等受講した後に臨床採用されることをお勧め致します

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- 1) 高温多湿の場所を避けて保管すること。
- 2) 直射日光に直接あたる場所に長期間放置すると、変形する可能性があります。
- 3) 開封後に保管する場合は、缶等の光を遮断する場所に保管してください。
- 4) 歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理して下さい。

2. 使用期限

特に定めない。

【包装】

4 組入り

【製造業者又は輸入販売業者の氏名又は名称及び住所等】

製造・販売元 チョーワ株式会社

住所 〒316-0002

茨城県日立市桜川町3丁目9番10号

電話番号 0294-32-2581