


1. 警告

- ・ 光生物学的反応による既往歴のある人あるいは光感作性のある薬を服用されている人には、光線をあてないこと
- ・ 埋め込み型心臓ペースメーカー及び小型電気製品を使用しないように指導を受けている人には本製品による治療をしないこと。
- ・ 本品は強力な可視光線を発生するので、人の目に向けて照射しないこと。[目を損傷する可能性がある。]
- ・ 口腔内軟組織への照射は避けること。[熱症の可能性がある。]
- ・ 光感作治療中の患者（8-メトキシソラレン、ジメチルクロロトラサイクリンの使用を含む）への使用をしないこと。
- ・ 歯科用医療従事者のみの使用に限り、記載の目的以外に使用しないこと。
- ・ 本製品は改造しないこと。
- ・ 本製品を落下させないこと。
- ・ ACアダプタから充電をする際はしばらく接続した後、ACアダプタ本体が発熱していないかよく観察すること。
- ・ ライトチップ先端の照射部分に緩みがないことを確認して使用すること。

2. 形状・仕様等

2.1 形状

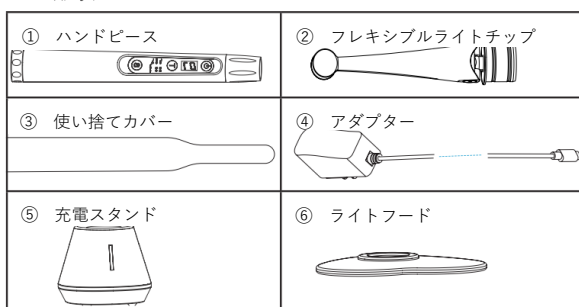

2.2 仕様

寸法：217 mm×132 mm×90 mm

重量：600g

出力：2500mW/c m²±5%

光幅：420nm ～ 515nm

電撃に対する保護の形式による分類：クラス II

バッテリー

電池：リチウムイオン電池

電池容量：2600mAh

電池電圧：3.7V

電池充電電圧：5.0V

動作環境

気温：10℃ ～ 40℃

湿度：80%以下

気圧：70kPa ～ 106kPa

3. 使用目的

LEDライトより420nm ～ 520nmの可視光線を発生させ、コンポジットレジン及びボンディング材に照射し、重合させるために使用する機器。

4. 使用方法等

使用前準備

- ・ フレキシブルライトチップの取り付け
フレキシブルライトチップがハンドピースのスロット位置に合っていることを確認し、「カチッ」としっかりと固定されるまで差し込む。
- ・ 使い捨てカバーの取り付け
使い捨てカバーを取り出し、フレキシブルライトチップからハンドピースにそっと挿入する。
- ・ ライトフードの取り付け
フレキシブルライトチップがライトシールドのスロット位置に合っていることを確認し、差し込む。
- ・ 充電
ハンドピースを充電スタンド奥まで差し込む。アダプタを充電スタンドとコンセントに差し込むと充電スタンドの電源LEDが緑色に点灯する。
充電中はLED画面に「CH」と表示され、LEDがゆっくり点滅する。充電が完了すると点滅が止まり「FH」と表示される。
バッテリー残量によるが、フル充電には約4時間かかる。
充電残量が15%未満の場合は「L0」の表示となる。

使用方法

1. 起動

- ・ バッテリーがいっぱいになっていることを確認する。
- ・ 起動していない状態でメインスイッチを0.5秒以上長押しすると本機器が起動する。
- ・ 起動した状態でメインスイッチを押すと照射が開始される。
- ・ 照射中にメインスイッチを押すと照射が停止する。
- ・ 動作中は5秒ごとにブザーが鳴り、カウントダウンが終了すると照射は自動的に終了する。
- ・ セレクトキーとメインスイッチを長押しすると電源が切れる。
- ・ スタンバイ状態の場合、8分後に自動的に電源が切れる。

2. 時間／モードの選択

モード選択

- ・ 【モード変更】スタンバイ状態でセレクトキーを押す。
 - ・ 【照射力変更】スタンバイ状態でセレクトキーを長押しする。
 - ・ 【照射時間変更】スタンバイ状態でタイムキーを長押しする。
- 電源起動時は最後に使用したモードになる。
※モードについての詳細は使用説明書をよく読むこと。

【照射時間設定】

スタンバイ状態で「T」タイムキーを押すと、時間の選択ができる。照射力により設定可能な照射時間が異なる。
※時間設定についての詳細は使用説明書をよく読むこと。

5. 使用上の注意

詳細については使用説明書を参照すること。

5.1 使用上の重大な注意

- ・ 口腔内粘膜への長時間照射は避けること。
- ・ 重合材料への重合中はLEDチップ先端が接触しないように注意する。
- ・ LEDチップから照射される光線を直視しないこと。
- ・ 網膜等に疾患がある人は、専門医と相談の上、保護眼鏡を使用するなど適切な方法で目を保護するように配慮すること。
- ・ 故障したときは、専門家に修理を任せること。
- ・ 消毒をする際には、本製品からUSBアダプタを外すこと。
- ・ 本製品を使用する際には、使用者及び患者共に適切な方法で目を保護すること。
- ・ 白内障手術の既往歴がある人は保護眼鏡を使用するなど適切な処置をしない限り本製品を使用したり光を当てたりしないこと。
- ・ 光量が減少する恐れがあるため、先端LEDチップは常に清潔にすること。

6. 保管方法及び有効期間等

6.1保管方法

- ・ 直射日光や高温、多湿な場所を避けて保管すること。
- ・ 水のかからない場所に保管すること。
- ・ 機器の安定を常に確保すること。
- ・ 移動させるときは、衝撃が加わらないよう注意すること。
- ・ 歯科医療従事者以外の人が触れないよう、適切な場所に保管すること。
- ・ 環境温度範囲：-20℃～+55℃；
- ・ 相対湿度範囲： 20% ～ 80 %
- ・ 大気圧範囲：70kPa ～ 106kPa

7. 保守・点検に係る事項

詳細については使用説明書を参照すること。

7.1清掃及び除菌

- ・ 本体の清掃は滅菌を行わないこと。
- ・ ライトチップは75%のアルコール、持ち手部分は清水又は消毒液を含ませた柔らかい布で拭き取り除菌を行う。清水または消毒剤で洗浄してください。揮発性や溶解性のあるクリーナーは使用しないこと。
消毒後、ライトチップ先端の照射部分に緩みがないことを確認すること。

8. 業者による保守点検事項

本製品が正常に作動しない場合、修理点検を要すると判断された場合、製造販売業者の保守点検を受けること。

9. 廃棄

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しているため、廃棄の際は販売店又は製造販売業者まで返送すること。

10. 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者の名称：

株式会社チームフォーチューン

東京都杉並区高円寺北二丁目20番7号 三貴丸ビル

03-5327-4100 03-5327-4081

受付時間 9:30～17:00（土日・祝祭日を除く）

TEL：03-5327-4100

FAX：03-5327-4081

製造業者名称：

株式会社チームフォーチューン デンタル事業部