


1. 警告

- 本品は強力な可視光線を発生するので、人の目に向けて照射しないこと。[目を損傷する可能性がある。]
- 口腔内軟組織への照射は避けること。[熱症の可能性はある。]
- 本製品を以下の患者に使用しないこと。
 - 光生物学的反応による既往歴のある人あるいは光感作性のある薬を服用されている患者
 - 植込み型心臓ペースメーカ又は植込み型除細動器を使用している患者
 - 光感作治療中の患者（8-メトキシソラレン、ジメチルクロロテトラサイクリンの使用を含む）

2. 形状・仕様等

2.1 形状

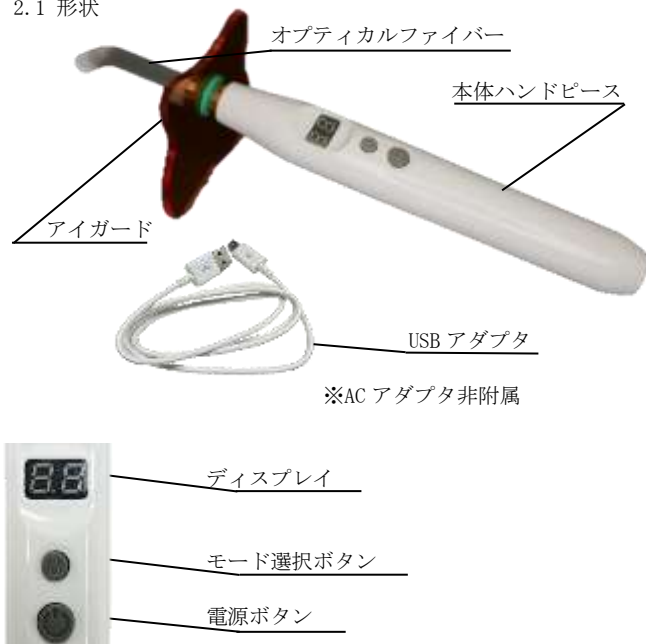

2.2 仕様

寸法：180 mm×27 mm×23 mm

重量：111g

出力：1600mW

電撃に対する保護の形式による分類：クラス II

バッテリー

電池：リチウムイオン電池

電池容量：1500mAh

電池電圧：3.7V

電池充電電圧：4.2V

充電時間：約3時間 ※ACアダプタによって異なる

使用可能回数：1回の充電で5秒照射を約400回使用できる

光幅：420nm ～ 480nm

動作環境

気温：-5℃ ～ 40℃

湿度：80%以下

気圧：75kPa ～ 106kPa

3. 使用目的

LEDライトより420nm ～ 480nmの可視光線を発生させ、コンポジットレジン及びボンディング材に照射し、重合させるために使用する機器。

4. 使用方法等

詳細については使用説明書を参照すること。

4.1 使用方法

- 梱包箱から取り出して本体にオプティカルファイバーとアイガードを装着する。
- USBアダプタにACアダプタ（非附属品）を接続し充電する。
- 充電後、電源ボタンを一度押して起動し、モード選択ボタンを押して照射時間、照射モード、UV照度をセットする。
- 再度電源ボタンを押し、重合材料に照射する。

4.2 モード選択

- モード選択ボタンを長押しすることで選択するモードを変更する。
- 短く押すことでモードを選択する。

4.3 各モード説明

- 照射時間
照射する時間を最小5秒、最大40秒から5秒間隔で選択する。

(2) 照射モード

照射するモードを下記の3つから選択する。

表示	モード	モード説明
F1	パワーモード	最大出力で照射し続ける。
F2	スロースタートモード	出力が徐々に上昇し、照射5秒で最高出力に到達する。
F3	パルスモード	最高出力での照射と0.2秒の休止を繰り返す。

(3) UV照度

照射する光の強度を下記の3つから選択する

表示	モード	モード説明
P1	UV照度 弱	1600mW/cm ² で照射する。
P2	UV照度 中	1800mW/cm ² で照射する。
P3	UV照度 強	2000mW/cm ² で照射する。

5. 使用上の注意

詳細については使用説明書を参照すること。

5.1 使用上の重大な注意

- 口腔内粘膜への長時間照射は避けること。
- 重合材料への重合中はLEDチップ先端が接触しないように注意する。
- LEDチップから照射される光線を直視しないこと。
- 網膜等に疾患がある人は、専門医と相談の上、保護眼鏡を使用するなど適切な方法で目を保護するよう配慮すること。
- 故障したときは、専門家に修理を任せること。
- 消毒をする際には、本製品からUSBアダプタを外すこと。
- 本製品を使用する際には、使用者及び患者共に適切な方法で目を保護すること。
- 白内障手術の既往歴がある人は保護眼鏡を使用するなど適切な処置をしない限り本製品を使用したり光を当てたりしないこと。
- 光量が減少する恐れがあるため、先端LEDチップは常に清潔にすること。
- 歯科用医療従事者のみの使用に限り、記載の目的以外に使用しないこと。
- 本製品は改造しないこと。

使用説明書を必ずご参照ください

- ・ 本製品を落下させないこと。
- ・ モバイルバッテリー等に接続して使用する際は充電しながらの使用を控えること。
- ・ ACアダプタから直接電源を供給する際はしばらく使用した後、ACアダプタ本体が発熱していないかよく観察すること。

6. 保管方法及び有効期間等

6.1 保管方法

- ・ 直射日光や高温、多湿な場所を避けて保管すること。
- ・ 水のかからない場所に保管すること。
- ・ 機器の安定を常に確保すること。
- ・ 移動させるときは、衝撃が加わらないよう注意すること。
- ・ 歯科医療従事者以外の人が触れないよう、適切な場所に保管すること。

7. 保守・点検に係る事項

詳細については使用説明書を参照すること。

7.1 清掃及び滅菌 オプティカルファイバーは121℃以下でのオートクレーブ滅菌が可能である。

推奨滅菌温度・時間

温度	時間
121℃	20分

- ・ 本製品の表面は中性洗剤を水でうすめ、柔らかな布に含ませて清拭すること。
- ・ 照射口に付着した材料はアルコールで除くこと。傷が付く恐れがあるため、金属製のインスツルメントや鋭利で先のがったものは使用しないこと。
- ・ 消毒剤やその他液体が製品内部に入らないようにすること。

8. 業者による保守点検事項

本製品が正常に作動しない場合、修理点検を要すると判断された場合、製造販売業者の保守点検を受けること。

9. 廃棄

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しているため、廃棄の際は販売店又は製造販売業者まで返送すること。

10. 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等

製造販売業者の名称：

株式会社チームフォーチューン

☎0120-992-301

受付時間 9:30～17:00（土日・祝祭日を除く）

TEL：03-5327-4100

FAX：03-5327-4081

製造業者名称：

株式会社チームフォーチューン デンタル事業部

使用説明書を必ずご参照ください