

機械器具 55 医療用洗浄器
一般医療機器 歯科用口腔洗浄器
JMDN コード：12304020


販売名 ミニライト シリンジ 一般医療機器

【警告】

- 1) 奥までノズルを挿入し、スクリューをしっかりと閉めること。ノズルを強く引き、抜ける場合はノズルを挿入し直すこと。やり直しても、ノズルが抜けるものは使用しないこと。[ノズルが口腔内に落下し、飲み込む恐れがある]
- 2) 1 分以上連続で使用する際は、ヒーターを OFF にすること。[ノズル、先端カバー部が熱くなり、火傷の恐れがある]
- 3) ヒーターを ON にした状態でエア어의 ON-OFF を頻繁に繰り返さないこと。[発熱が大きくなり火傷の恐れがある]

1. 形状・仕様等

1.1 形状

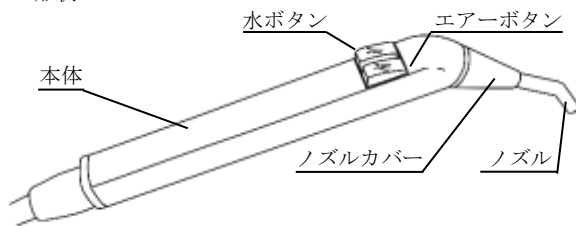

1.2 型式

型式名	角度	温水機能
<MLS-3>	あり	なし
<MLS-3D>	なし	あり

1.3 仕様

水	圧	2.5bar
給 水 量		110 Cc/min
エ ア ー 圧		4.5±0.1bar
給 気 量		10 NL/min

1.4 使用環境

周 辺 温 度	10 ～ 40℃
気 圧	700 ～ 1060hPa

1.5 動作原理

独立に構成された水、エア어의管路がノズルを通り、エアボタン、水ボタンの操作によってバルブの開閉がなされ、ノズルから水、エアー、霧が噴出される。

2. 使用目的又は効果

歯科治療において、切削時の口腔内の清掃及び切削粉の除去、補綴物の乾燥・清掃、歯牙の冷却・乾燥等に使用するものである。

3. 使用方法等

詳細については使用説明書を参照すること。

3.1 取り付け・接続

本機器と歯科ユニットとの接続は専門の担当者（当社又は当社指定の業者）が行う

3.2 使用方法

- (1) ノズル、ノズルカバーを本体と接続する。
- (2) エアボタンを押すことでエアーを、水ボタンを押すことで水をノズル先端から噴射する。
- (3) エアボタンと水ボタンを同時に押すことでスプレー水を噴射する。
- (4) 水及び空気の噴射量は各ボタンを押す強さで調節する。

4. 使用上の注意

- ・使用前にノズル・ノズルカバーが本体とが確実に接続されていることを確認すること。
- ・ノズルにゴミ等が詰まっていないかを確認し、詰まっていることが確認された場合には使用を中止すること。
- ・一日の最初に使用する際には、30 秒ほどエアー及び水を噴射し本機器内を洗浄すること。
- ・ノズルが口腔内に接触しないよう注意すること。
- ・本機器を使用する際は、接続している機器及び患者の状態も常に監視し、異常が確認された場合は直ちに使用を中止すること。

5. 保管および有効期限等

5.1 輸送及び保管条件

周 辺 温 度	10 ～ 40℃
気 圧	700 ～ 1060hPa


結露の無い所に保管すること。

5.2 耐用期間

正規の保守点検を行って使用した場合に限り 7 年間とする。

6. 保守点検に係る事項

- ・本機器は 134℃でのオートクレーブ滅菌が可能で、4 分間を推奨している。
- ・本機器の表面の汚れは、アルコールを染み込ませた柔らかい布で清拭すること。
- ・ノズル先端部分は、アルコールを染み込ませた綿棒やガーゼなどの柔らかいもので優しく清拭すること。
- ・本体とノズルカバーの接続部にある O リングに破損がないかを確認すること。破損がある場合は使用者が取り替えること。

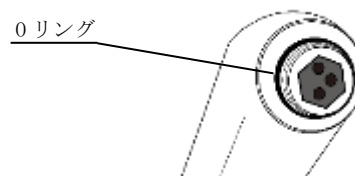

7. 廃棄

本機器を廃棄する場合は、特別管理産業廃棄物の取得許可を取得している業者に処理委託を行うか、購入先又は当社に連絡すること。

8. 業者による保守点検事項

本機器が正常に作動しない場合、又は修理点検を要すると判断された場合は製造販売業者の保守点検を受けること。

9. 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等

製造販売業者の名称：

株式会社チームフォーチュン

0120-992-301

受付時間 9:30～17:00（土日・祝祭日を除く）

TEL：03-5327-4100

FAX：03-5327-4081

製造業者名称：

株式会社チームフォーチュン デンタル事業部

使用説明書を必ずご参照ください