

製品番号: FT-806

販売名称: アルプケイツー 新生児用聴診器

一般医療機器 JMDN: 13755000

日本製

【形状・構造等】 * 右図参照

- ・新生児用ダブルヘッド(採音部): 真鍮
: 2種類の採音部
 - ・ベル型 直径21.2mm
 - ・ダイアフラム型 直径24mm
 - ・シャフトの回転による切り替え
- ・耳金具(外パネ式): プラス パイプ径 5mm
: 巾 97 × 長さ 171 mm
: クロムメッキ
* カラータイプの耳金具はアルミ製
- ・Yチューブ: 塩化ビニール
: 内径 4mm
: 長さ 60cm




DX耳金具(内パネ式)
との組合せも可能

・カラー構成

部品	ヘッド	耳金具	Yチューブ
タイプ			
スタンダード	クロム	クロム	グレー/黒
カラータイプ	クロム	グレー(シルバー)、ブラック、レッド ブルー、グリーン、イエロー、ピンク	

セット図

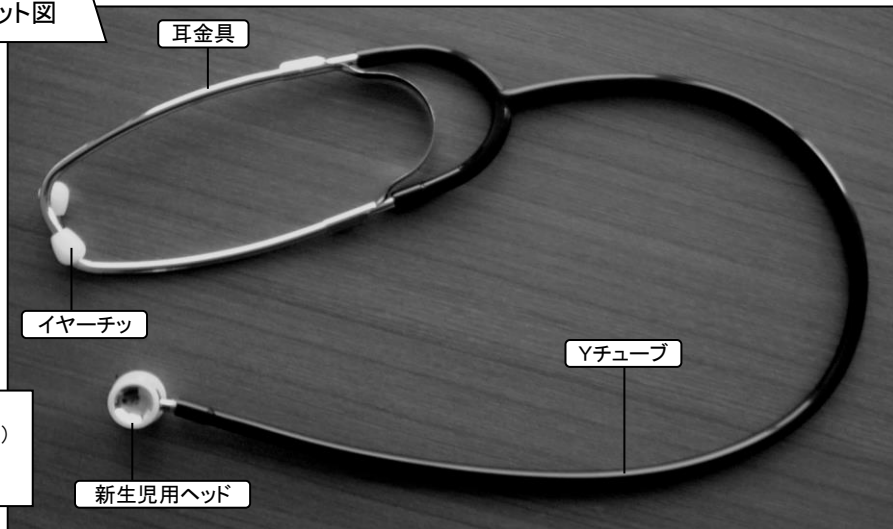

ノンチルリング: プラスティック樹脂

振動板: プラスティック樹脂
: 直径 19.5mm
: リムにより固定



ヘッド部


【性能・使用目的】

1. 性能
 - ・ベル型: 低周波音の聴診
: 第Ⅲ・第Ⅳ音、僧帽弁ランブルなど
 - ・ダイアフラム型: 高周波音の聴診
: コロコフ音など

2. 使用目的
人体各部の生体音の聴診

【使用方法】

1. チューブを新生児用ヘッドのシャフトおよび耳金具のパイプに接続する。
(右図参照)
2. イヤーチップを両耳に当てる。
3. シャフトの回転により ベル・ダイアフラム どちらかを選択する。
4. 選択した面を測定部位に当て聴診する。

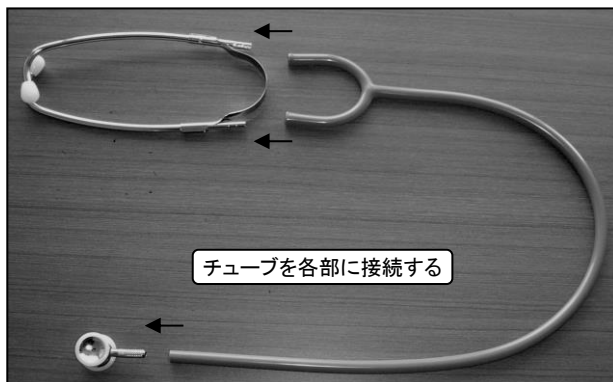

チューブを各部に接続する

【使用上の注意】

1. 使用中(イヤーチップを耳に当てた状態)、採音部に衝撃や音を加えると耳に傷害をきたす恐れがあります。
使用中は、採音部をぶつけたりしないよう注意してください。
 2. 採音部およびイヤーチップは人体と接触する部品です。
 - ・汚れは消毒綿でふきとる等の衛生管理をしてください。
 - ・部品の破損等で人体を傷つけたりしないよう安全管理をしてください。
- * 振動板・ノンチルリング・イヤーチップは交換が可能です。

【取り扱い上の注意】

1. 聴診器を振り回したりしないでください。
2. 耳金具の巾を無理に広げようとすると、連結パネが破損する恐れがあるので
おやめください。
3. 各部品を接続する際は、手をすべらせて怪我等しないよう注意してください。

【保守・点検等】

1. 聴診器は繰り返し使用される医療用具です。
衛生上および安全上の適切な管理をお願いします。
2. 部品交換の際は、当社純正部品をお使いください。
3. 本製品の耐用年数は 3年 です。(自己認証)

【製造業者／製造販売業者】

田中産業株式会社 東京都荒川区荒川 6-26-5
TEL: 03-3892-4481 FAX: 03-3892-4450

【アフターサービス等の問合せ先】

田中産業株式会社 東京都文京区本郷 3-16-3
TEL: 03-3814-7181 FAX: 03-3814-7177