

製品番号: R-10026E


販売名称: アルプケイツー ライト付額帯反射鏡

一般医療機器 JMDN: 34637000

日本製

【形状・構造等】 * 右図参照

- ・ミラー本体 92φ×107mm(ブラケットを含む)
材質: アルミ JIS A-1070P
ミラーブラケット: リベット止め
- ・ミラー: 90φ
鏡面: 300R アルミ蒸着
- ・観察孔: 12.4φ
- ・ミラーカバー: 92.5φ×3.6 板厚0.3mm
材質: アルミ JIS A-1070P
- ・ヘッドバンド: 巾21mm
材質: ABS樹脂+PVC
調節可能範囲: 直径112~200mm
バンドブラケット: リベット止め
- ・アジャスター: 各ブラケットの先端を挟み蝶ネジで固定する
- ・ライト: ニップル 2.2V-0.25A
- ・乾電池: 単3 2本
- ・重量: 200g

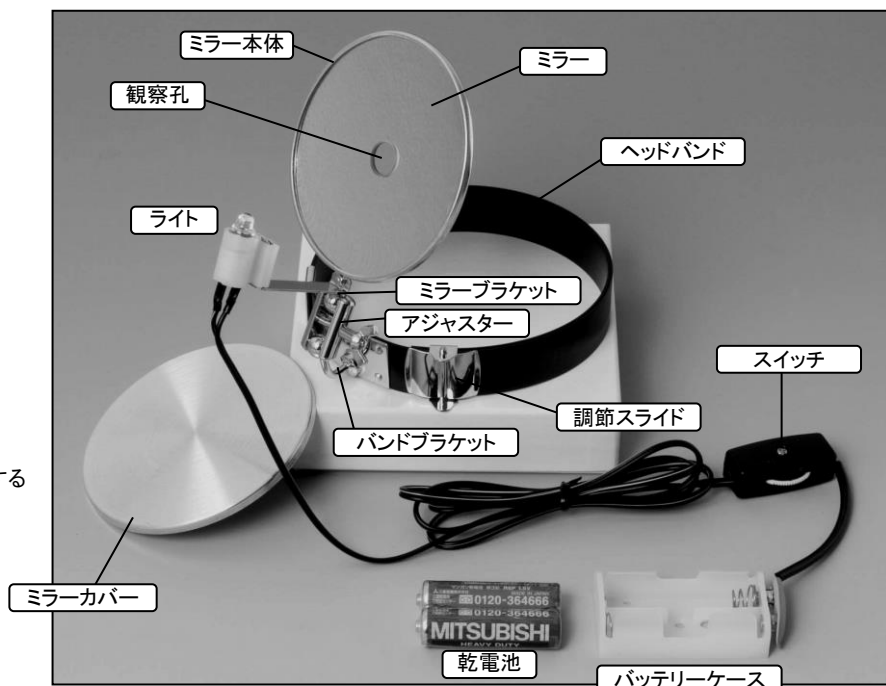

【性能・使用目的】

1. 性能


: 焦点距離 300mm

2. 使用目的

凹面鏡の反射光による口腔内、鼻腔内および内耳の観察・診断

【使用方法】

1. ヘッドバンドを調節し頭部に装着する。
(調節方法は右図を参照してください)
2. ミラーを眼前にもってくる。
3. スイッチをONにしてライトを点灯する。
4. 観察孔をのぞき診断部位を観察する。

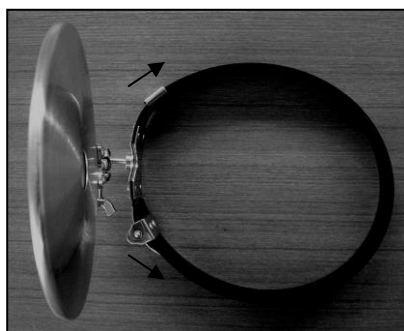

調節スライドを矢印の方へ移動させる



【使用上の注意】

1. 診断に支障のないよう確実に装着してください。
2. 鏡ですので落としたり、ぶつけたりしないでください。
3. 乾電池は正しくセットしてください。

【取り扱い上の注意】

1. 本器は上記に記述した目的以外の使用はしないでください。
2. 乱暴な取り扱いはしないでください。
3. 本器を長期間使用しない場合は、乾電池を抜いてください。

【保守・点検等】

1. 保管は高温・多湿・直射日光を避け、常温で適切な管理をしてください。
2. 本器は繰り返し使用される医療用具です。観察孔は常に清潔な状態を保ち、鏡面の汚れは乾布で拭き取るなど、衛生上および安全上の適切な管理をお願いします。
3. 部品交換の際は、当社純正部品をお使いください。
4. 本製品の耐用年数は3年です。(自己認証)

【製造業者／製造販売業者】

田中産業株式会社 東京都荒川区荒川 6-26-5
TEL: 03-3892-4481 FAX: 03-3892-4450

【アフターサービス等の問合せ先】

田中産業株式会社 東京都文京区本郷 3-16-3
TEL: 03-3814-7181 FAX: 03-3814-7177