

製品番号: K2-Kit(5)

販売名称: アルプケイツー アネロイド血圧計 5点キット


一般医療機器 JMDN: 16156000

日本製

* アネロイド血圧計の添付文書

【形状・構造等】 * 右図参照

- ・メーター本体: 亜鉛ダイキャスト
直径53mm×全長74 mm
前面はアクリルカバー
- ・スケール板: 20 ~ 300mmHg
白地に黒目盛プリント
20mmHg毎に数値表示
(80 ~ 160赤色表示)
* 中央下部にシリアルナンバー刻印
- ・ゴム球: ラテックス
加圧・減圧 部品
- ・エンドバルブ(逆止弁): プラス
・コントロールバルブ: プラス

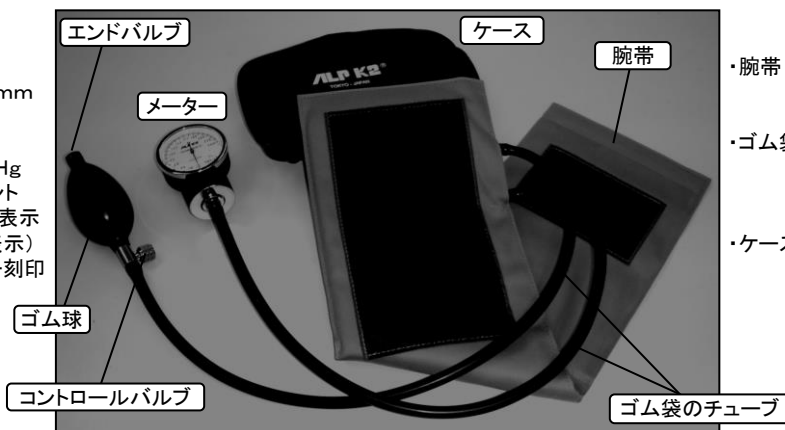


- ・腕帯: コットン 及び マジックテープ
大人用標準サイズ: 14. 5×50cm
- ・ゴム袋: ラテックス(腕帯に内蔵)
大人用標準サイズ: 12×22. 5cm
- ・ケース: ビニールレザー製、チャック付

【性能・使用目的】

1. 性能
 - ・測定範囲: 20 ~ 300 mmHg
 - ・測定精度: ±3 mmHg
 - ・減圧率 : 2 ~ 3mmHg/秒 可能
 - ・上腕適正サイズ: 22 ~ 32cm

* JIS T 4203:2012 に 適合

2. 使用目的
非観血式聴診法による人体血圧の測定

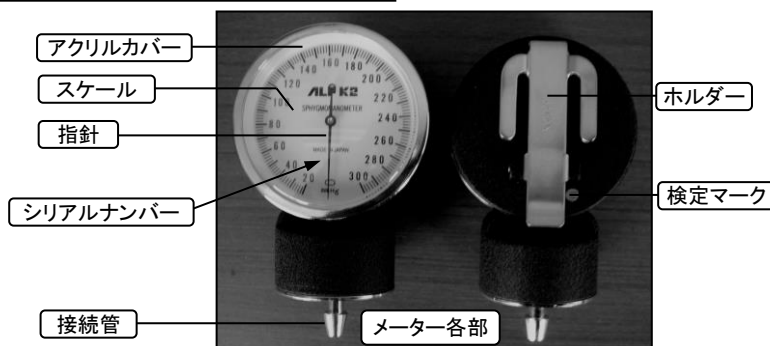

【使用方法】

1. 腕帯内蔵のゴム袋チューブをメーターの接続管に接続する。
2. ゴム袋の一方のチューブとゴム球のコントロールバルブを接続する。
3. 腕帯を上腕に巻きつけマジックテープでとめる。
4. コントロールバルブを右に廻して締める。
5. ゴム球をポンプ操作して加圧する。
6. コントロールバルブをゆるめて少しずつ減圧する。
7. 聴診器でコロコフ音を聞き取り、最高・最低血圧を測定する。

【使用上の注意】

1. メーターは衝撃に弱い精密機器です。

場合によっては精度に誤差が生じますので、測定の際は落したり、ぶつけたりしないよう充分に気をつけてください。
2. 300mmHg 以上の圧力はかけないでください。
3. 付属品の腕帯は大人用標準品で、上腕周り 22~32cm が適正サイズです。

正確な測定のために腕帯は対象者および測定部位に合わせて小児用、肥満用、大腿部用 など適切な選択をしてください。
4. この製品は天然ゴムを使用しています。天然ゴムは、かゆみ、発疹、むくみ、発熱、呼吸困難、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状を起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。

【取り扱い上の注意】

1. 本器は血圧測定以外の目的には使用しないで下さい。
2. 精密測定機器ですので乱暴な取扱いはしないでください。
3. メーター保護のために、使用後はメーターを腕帯でぐるんで付属のケースに収納し保管してください。
4. アクリルカバーをはずして指針をさわる等の分解はしないでください。

【保守・点検等】

1. 保管は高温・多湿・直射日光を避け、常温で適切な管理をしてください。
2. 測定器ですので定期的に点検を行い、精度と安全性を保ってください。
3. 腕帯・ゴム球は繰り返し使用され、また人体に接触する付属品です。汚れた腕帯は洗浄する等、衛生上の管理をお願いします。
4. ゴム部品は、長期間使用すると劣化(亀裂など)を起こします。劣化したゴム部品は交換してください。
5. 他社部品の使用は事故・トラブルの原因となる場合があります。修理や部品の交換等は、当社純正部品を使用してください。
6. 本製品の耐用年数は 3年 です。(自己認証)

製品番号:K2-Kit(5)

日本製

*ダブルヘッド聴診器の添付文書

【形状・構造等】 *右図参照


- ・ダブルヘッド(採音部):アルミ
 - :2種類の採音部
 - ・ベル型 直径30mm
 - ・ダイアフラム型 直径47mm
 - ・シャフトの回転による切り替え

* カラー:シルバー

- ・耳金具(外バネ式):ブラス パイプ径 5mm
 - :巾 97 × 長さ 171 mm
 - :クロムメッキ

- ・Yチューブ:塩化ビニール
 - :内径 4mm
 - :長さ 60cm

* カラー:ブラック又はグレー

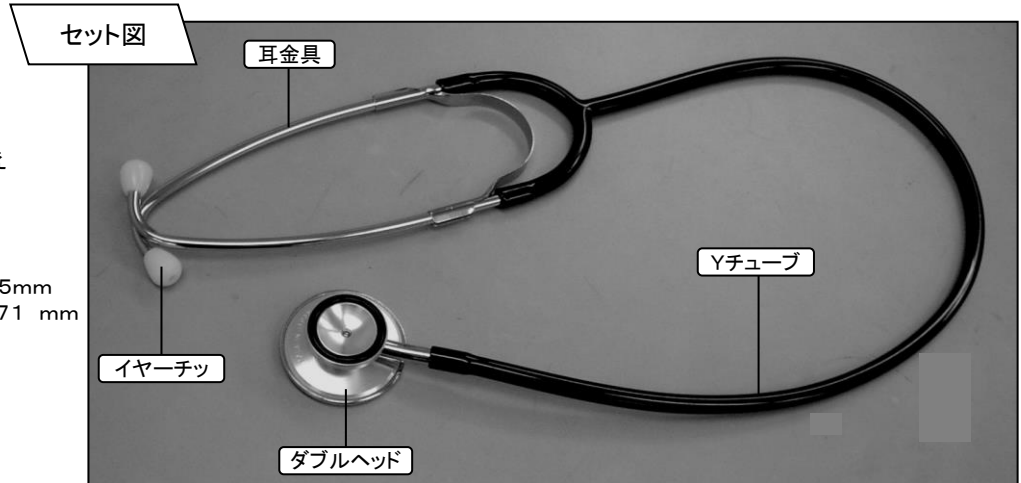

ノンチルリング:ゴム

振動板:プラスチック樹脂
:直径 44mm
:リムにより固定




ヘッド部

【性能・使用目的】

- 性能
 - ・ベル型:低周波音の聴診
 - :第Ⅲ・第Ⅳ音、僧帽弁ランブルなど
 - ・ダイアフラム型:高周波音の聴診
 - :コロトコフ音など
- 使用目的
 - 人体各部の生体音の聴診

【使用方法】

- チューブをダブルヘッドのシャフトおよび耳金具のパイプに接続する。
(右図参照)
- イヤーチップを両耳に当てる。
- シャフトの回転により ベル・ダイアフラム どちらかを選択する。
- 選択した面を診断部位に当て聴診する。

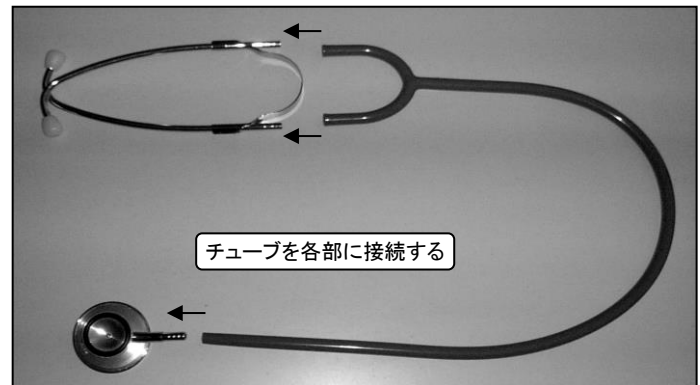

【使用上の注意】

- 使用中(イヤーチップを耳に当てた状態)、採音部に衝撃や音を加えると耳に傷害をきたす恐れがあります。
使用中は、採音部をぶつけたりしないよう注意してください。
- 採音部およびイヤーチップは人体と接触する部品です。
 - ・汚れは消毒綿でふきとる等の衛生管理をしてください。
 - ・部品の破損等で人体を傷つけたりしないよう安全管理をしてください。

* 振動板・ノンチルリング・イヤーチップは交換が可能です。

【取り扱い上の注意】

- 聴診器を振り回したりしないでください。
- 耳金具の巾を無理に広げようとすると、連結バネが破損する恐れがあるのでおやめください。
- 各部品を接続する際は、手をすべらせて怪我等しないよう注意してください。

【保守・点検等】

- 聴診器は繰り返し使用される医療用具です。
衛生上および安全上の適切な管理をお願いします。
- 部品交換の際は、当社純正部品をお使いください。
- 本製品の耐用年数は 3年 です。(自己認証)

製品番号:K2-Kit(5)

日本製

*ミニペンライトの添付文書

【形状・構造等】 *右図参照

- ・ペンライト本体:真鍮ボディー
 - :クリップスイッチ(ポケットクリップ部)
 - :11.5φ×139.5mm
 - :重量 約48g(乾電池を含む)

- ・乾電池:単4 2本

【性能・使用目的】

1. 性能
 - :電球 2.2V-0.25A ニップル
2. 使用目的
 - ライト光照射による瞳孔の観察・診断



【使用方法】

1. 本体先端部を廻して取り外す。
2. 乾電池をセットし、先端部を取り付ける。
3. クリップスイッチを ON にし点灯する。
(ポケットクリップ先端を本体に接触させると ON になる)
4. ライト光により瞳孔を観察する。

【使用上の注意】

乾電池は正しくセットしてください。

【取り扱い上の注意】

1. 本器は上記に記述した目的以外の使用はしないでください。
2. 本器を長期間使用しない場合は、乾電池を抜いてください。
3. 乱暴な取り扱いはしないでください。


【保守・点検等】

1. 保管は高温・多湿・直射日光を避け、常温で適切な管理をしてください。
2. 衛生上および安全上の適切な管理をお願いします。
3. 部品交換の際は、当社純正部品をお使いください。
4. 本製品の耐用年数は 3年 です。(自己認証)

*巻尺の仕様

【形状・構造等】 *右図参照

- ・測定範囲:2m
- ・ロータリー式

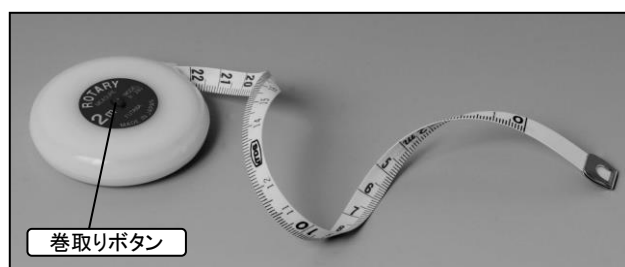

*体温計の添付文書

シチズン電子体温計(CT-412)は別添の添付文書及び取扱説明書に従ってご使用ください。

【製造業者／製造販売業者】

田中産業株式会社 東京都荒川区荒川 6-26-5
TEL: 03-3892-4481 FAX: 03-3892-4450

【アフターサービス等の問合せ先】

田中産業株式会社 東京都文京区本郷 3-16-3
TEL: 03-3814-7181 FAX: 03-3814-7177