


製品番号:1006-M

販売名称: **アルプケイツー 胎児用聴診器**

一般医療機器 JMDN:32659000

日本製

【形状・構造等】 * 右図参照

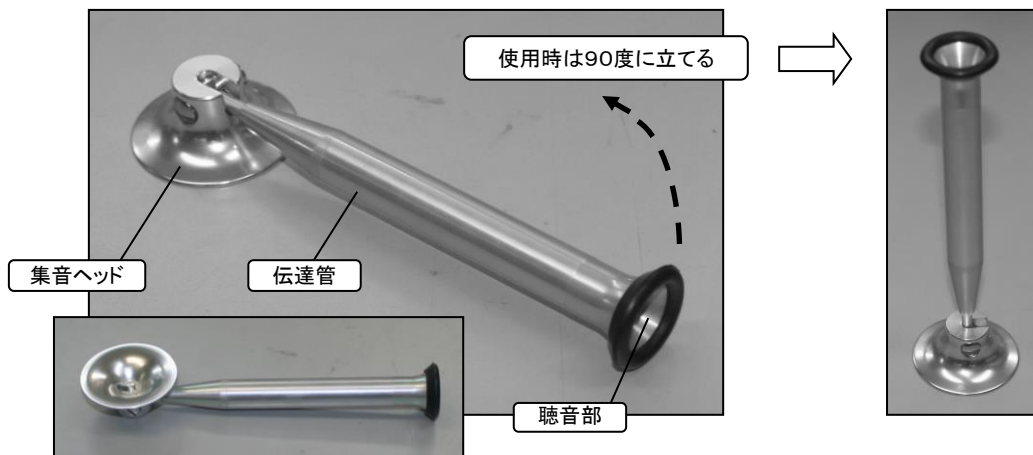

・集音ヘッド : アルミニウム製
: 直径 50mm

・伝達管 : アルミニウム製
: パイプ径 16mm
: 使用時は90度に立てる

・聴音部 : アルミニウム製
: カバーはゴム製
: 直径 30mm(カバーリング外径)

・全長 : 175mm(使用時)
・重量 : 58g

【使用目的】
胎児の心音の聴診

【使用方法】

1. 伝達管を90度に立てる
2. 集音ヘッドを妊婦の腹部に当てる
3. 聴音部に耳を当てて胎児の心音を聴診する

【使用上の注意】
人体(皮膚)に接触する集音ヘッド及び聴音部は、消毒綿で拭き取るなど適切な衛生管理をしてください。

【取り扱い上の注意】
1. 本器は上記に記述した目的以外の使用はしないでください。
2. 乱暴な取り扱いはしないでください。

【保守・点検等】
1. 保管は高温・多湿・直射日光を避け、常温で適切な管理をしてください。
2. 本器は繰り返し使用される医療用具です。
衛生上および安全上の適切な管理をお願いします。
3. 本製品の耐用年数は 3年 です。(自己認証)

【製造業者／製造販売業者】
田中産業株式会社 東京都荒川区荒川 6-26-5
TEL: 03-3892-4481 FAX: 03-3892-4450

【アフターサービス等の問合せ先】
田中産業株式会社 東京都文京区本郷 3-16-3
TEL: 03-3814-7181 FAX: 03-3814-7177