


【形状・構造等】 * 右図参照

- ・ダブルヘッド(採音部): ステンレス
- ・2種類の採音部
 - ・ベル型 直径32mm
 - ・ダイアフラム型 直径45mm
 - ・シャフトの回転による切り替え

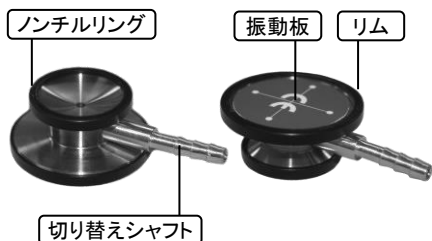

ノンチルリング: PVC(塩化ビニール)

振動板: PET(ポリエチレンテレフタレート)
: 直径 43mm
: リムにより固定

- ・チューブ: PVC(塩化ビニール)
 - : 内径 4.5mm
 - : 長さ 58cm(一体全長74cm)
 - * カラー: 黒、グレー、バーガンディー、オレンジ、ネイビー、シーグリーン、コーラル

- ・内パネ式耳金具: プラス パイプ径 5mm
 - : 巾 60 × 長さ 160mm

- * 交換用付属部品
 - : 振動板 1枚
 - : イヤーチップ 1組

【性能・使用目的】

- 性能
 - ・ベル型: 低周波音の聴診
 - ・ダイアフラム型: 高周波音の聴診
- 使用目的
 - 人体各部の生体音の聴診

【使用方法】

- イヤーチップを両耳に当てる。 * 右図参照
- シャフトの回転により ベル・ダイアフラム どちらかを選択する。
- 選択した面を測定部位に当て聴診する。

【使用上の注意】

- 使用中(イヤーチップを耳に当てた状態)、採音部に衝撃や音を加えると耳に傷害をきたす恐れがあります。
使用中は、採音部をぶつけないよう注意してください。
 - 採音部およびイヤーチップは人体と接触する部品です。
 - ・汚れは消毒綿でふきとる等の衛生管理をしてください。
 - ・部品の破損等で人体を傷つけないよう安全管理をしてください。
- * 振動板・ノンチルリング・イヤーチップは交換が可能です。

【取り扱い上の注意】

- 聴診器を振り回したりしないでください。
- 耳金具の巾を無理に広げようとすると、チューブ内の連結バネが破損する恐れがあるのでおやめください。
- 極度の高温・低温場所及び溶剤等の近くでの保管は避けてください。

【製造業者／製造販売業者】


田中産業株式会社 東京都荒川区荒川 6-26-5
TEL: 03-3892-4481 FAX: 03-3892-4450

【禁忌・禁止】

本製品を曲げたり、刻印する等の加工・改造は、不具合の原因となるので絶対に行わないでください。



耳金具の装着方法

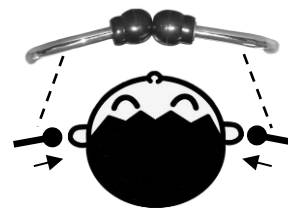

耳金具は外耳道に合わせて標準的な角度に調節済みです。
図のような向きで装着して下さい。

【保守・点検等】

- 聴診器は繰り返し使用される医療機器です。
衛生上および安全上の適切な管理をお願いします。
- 部品交換の際は、当社純正部品をお使いください。
- 本製品の耐用年数は3年です。(自己認証)

【アフターサービス等の問合せ先】

田中産業株式会社 東京都文京区本郷 3-16-3
TEL: 03-3814-7181 FAX: 03-3814-7177