

製品番号:500-W-2


販売名称: **MMI 大型アネロイド血圧計 壁掛け型**

一般医療機器 JMDN:16156000

日本製

【形状・構造等】 * 右図参照

- ・メーター本体:プラスチック
160×160×80mm
前面はアクリルカバー
- ・スケール板:20 ~ 300mmHg
青地に白目盛プリント
20mmHg毎に数値表示
- ・腕帯:ナイロン 及び マジックテープ
大人用標準サイズ:14.5×54cm
(部品番号:NC-4)
- ・ゴム袋:ラテックス(腕帯に内蔵)
大人用標準サイズ:12×22.5cm
- ・コイルチューブ:ラテックス
- ・ゴム球:ラテックス
加圧・減圧 部品
- ・エンドバルブ(逆止弁):プラス
- ・コントロールバルブ:プラス

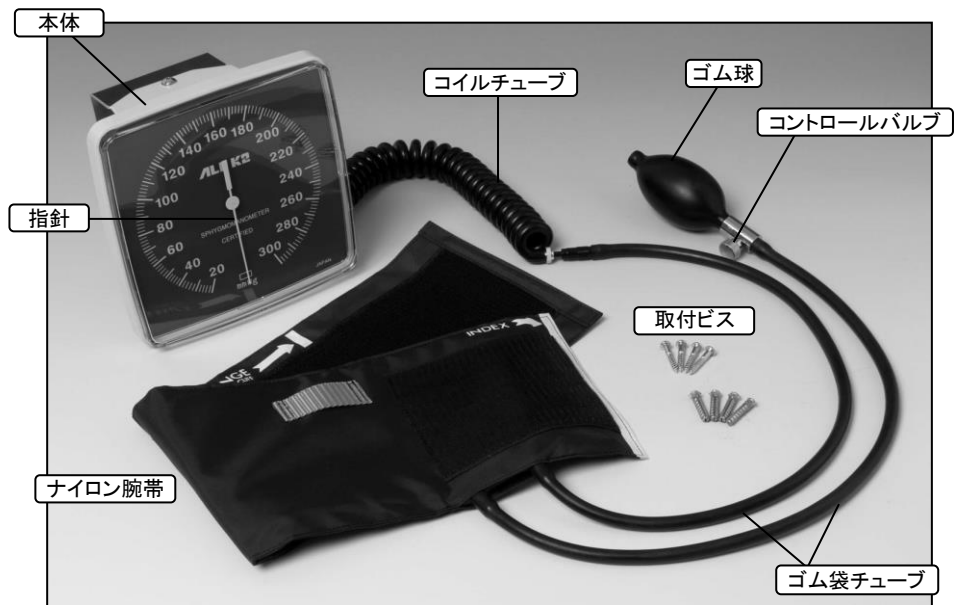

【性能・使用目的】

1. 性能

- ・測定範囲: 20 ~ 300 mmHg
- ・測定精度: ±3 mmHg
- ・減圧率 : 2 ~ 3mmHg/秒 可能
- ・上腕適正サイズ: 22 ~ 32cm

* JIS T 4203:2012 に 適合

2. 使用目的

非観血式聴診法による人体血圧の測定

【使用方法】

1. コイルチューブを本体下部の接続管に接続する。
2. 腕帯内蔵のゴム袋チューブとコイルチューブを接続する。
3. ゴム袋の一方のチューブとゴム球のコントロールバルブを接続する。
4. 腕帯を上腕に巻きつけマジックテープでとめる。
5. コントロールバルブを右に廻して締める。
6. ゴム球をポンプ操作して加圧する。
7. コントロールバルブをゆるめて少しずつ減圧する。
8. 聴診器でコロトコフ音を聞き取り、最高・最低血圧を測定する。
(本器に聴診器は含まれていません)

【取り扱い上の注意】

1. 本器は血圧測定以外の目的には使用しないで下さい。
2. 精密測定機器ですので乱暴な取扱いはしないでください。
3. アクリルカバーをはずして指針をさわる等の分解はしないでください。

【使用上の注意】

1. メーターは衝撃に弱い精密機器です。

場合によっては精度に誤差が生じますので、取付の際は落としたり、ぶつけたりしないよう充分に気をつけてください。

2. 300mmHg 以上の圧力はかけないでください。

3. 付属品の腕帯は大人用標準品で、上腕周り 22~32cm が適正サイズです。

正確な測定のために腕帯は対象者および測定部位に合わせて小児用、肥満用、大腿部用 など適切な選択をしてください。

4. この製品は天然ゴムを使用しています。天然ゴムは、かゆみ、発疹、むくみ、発熱、呼吸困難、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状を起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。

【保守・点検等】

1. 保管は高温・多湿・直射日光を避け、常温で適切な管理をしてください。
2. 測定器ですので定期的に点検を行い、精度と安全性を保ってください。
3. 腕帯・ゴム球は繰り返し使用され、また人体に接触する付属品です。汚れた腕帯は洗浄する等、衛生上の管理をお願いします。
4. ゴム部品は、長期間使用すると劣化(亀裂など)を起こします。劣化したゴム部品は交換してください。
5. 他社部品の使用は事故・トラブルの原因となる場合があります。修理や部品の交換等は、当社純正部品を使用してください。
6. 本製品の耐用年数は 3年 です。(自己認証)

【製造業者／製造販売業者】

田中産業株式会社 東京都荒川区荒川 6-26-5
TEL: 03-3892-4481 FAX: 03-3892-4450

【アフターサービス等の問合せ先】

田中産業株式会社 東京都文京区本郷 3-16-3
TEL: 03-3814-7181 FAX: 03-3814-7177