

機械器具（58）整形用機械器具
一般医療機器 測定機能付自力運動訓練装置（JMDNコード 70612000）
かかトントン

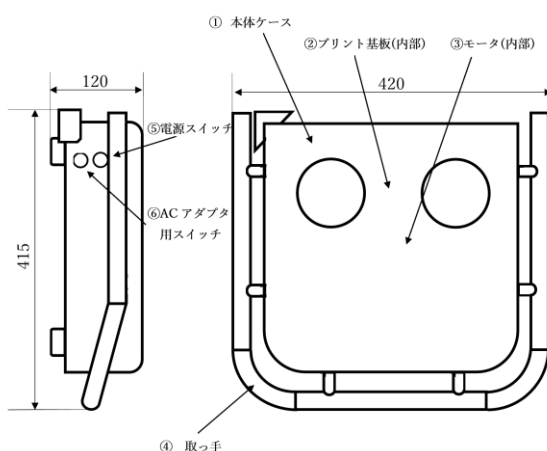
【禁忌、禁止】

適用対象（次の患者に使用しないこと）

新生児・低出生体重児への使用：〔妊婦、産婦、授乳婦および小児等への適用〕の項参照

【形状・構造及び原理等】**＜形状・構造＞****(1) 形状**

かかトントン本体 単位：mm±10%

**＜原理＞**

人体の両足の踵部に機械的な刺激を加えることを目的に、立位または臥位にて断続的な振動刺激を与えて、自然歩行時と同等効果が得られる装置である。

【使用目的又は効果】

患者の踵に機械的な刺激を与えることにより、下肢の筋力維持、強化を目的として、歩行訓練と同等効果を得るために使用する。

【使用方法等】**1. 準備**

- 1) 取扱説明書を熟読し、使用上の注意事項を理解する。
- 2) かかトントン本体、ACアダプタ、タブレット端末を用意する。
- 3) 必要に応じ、補助手すりや臥位時スタンドを用意する。

2. 使用

- 1) ACアダプタをかかトントン本体に接続し、電源スイッチをONにするとパイロットランプが点灯する。
- 2) タブレットを立ち上げ、時間・回数をセットする。
- 3) 患者の踵がかかトントン本体の所定の位置に来るように立

たせ、タブレットのスタートを押す。この場合、補助手すりが必要な場合、それでサポートする。また、臥位で行う場合は、臥位スタンドを利用する。

3. 使用後

- 1) 終了後、タブレットをシャットダウンする。
- 2) かかトントン本体の電源スイッチをOFFにする。

【使用上の注意】**＜重要な基本的注意＞**

- (1) 使用前に取扱説明書をよく読み、本品を正しく使用してください。
- (2) 本品には、振動、衝撃などを与えないでください。

【不具合・有害事象】**＜不具合・有害事象＞**

- (1) 有害事象
・刺激過多にならないよう設定すること。
- (2) 妊婦、産婦、授乳婦および小児等への適用
本品は、新生児および低出生体重児には対応していないため使用できない。

【保管方法及び有効期間等】**＜保管方法＞**

- (1) 水濡れに注意し、直射日光及び高湿多湿を避けて保管すること。
- (2) 蛍光灯下やオゾンが発生する機器の周辺等に保管しないこと。
- (3) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

＜保存環境温度/湿度＞

温度：25±10℃

湿度：80%以下

＜有効期間＞

包装又は箱の使用期限を参照すること。

【保守・点検に係る事項】

本品使用前に劣化や破損がないかチェックを行うこと。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等氏名又は名称（製造販売業の種別）】

株式会社 小沢医科器械
第2種医療機器製造販売業

取扱説明書を必ずご参照ください