

一般医療機器

機械器具 13 聴診器
機械式聴診器

JMDN13755000

エンジェルナーススコープⅡ

【警告】

- イヤーチップを耳管からはずした状態で使用しないでください。
（耳管の金属部分が耳の内部を傷つける恐れがある）

【禁忌・禁止】

- 本製品は、乾熱又は高圧蒸気滅菌を行わないこと。
（熱による変形、劣化の恐れがある）
- 本製品を振り回すなどの扱いをしないこと。
（ヘッド部分の脱落やチューブの断裂により周囲に危害を及ぼす恐れがある）
- 本製品の二次的加工や、溶剤、オイルと接触させないこと。

【形状・構造及び原理等】

- 本品はイヤーチップ、耳管並びにチューブからなるバイノーラル部と生体に直接接触して生体音を拾うチェストピース部から構成される聴診器であり、チェストピース部両側で音を拾うことができます。

（代表的な外観）



（材質）

チェストピース、耳管
ステンレス
イヤーチップ
プラスチック
チューブ
ポリ塩化ビニル
ダイヤフラム
ファイバークラス
（原理）

- チェストピース（集音部）で振動（もしくは音）を集めてチューブを介してユーザーの耳に挿入する部分に伝える。

【使用目的又は効果】

- 生体音を直接聴診するために用いる機械式の聴音装置である。

【使用方法等】

（使用方法）

- 耳管の向きを確認し、解剖学的に正しい方向になる様にイヤーチップを両耳にはめ、生体にチェストピースを当て、聴診する。
- 下図を参考に正しく装着することにより、より良い感度で聴音することができます。




（正）



（誤）

- チェストピースはベル型とダイヤフラム面の両方を成人用及び小児用に交換が可能です。交換方法は中央の軸に対して反時計回りに緩めて取り外してから、時計回りに回転させて締めてください。

- 低（周波）音を聴診するには、チェストピースを主体に軽く押し当て、高（周波）音を聴診するには、チェストピースを主体に強く押し当てることにより、効率よく聴診が可能です。
（両耳バネ張力の調節）
- 張力を下げる方法：両手を使い両耳管をチューブの「Y」の中心のところでしっかりと握り、親指で押しながらチューブが両側に開くように管を開きます。
欲しい張力が得られるまで両耳管を曲げます。（下図左側）
- 張力を上げる方法：両耳管を交差させ、それぞれの缶を指で掴み、両耳管を外に向かって引っ張ります。（下図右側）

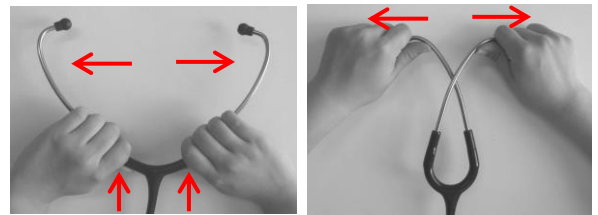

詳細な使用方法は、本製品に付属の取扱説明書を参照のこと

【使用上の注意】

- 本品に体液・血液等が付着した場合は速やかに洗浄または拭き取りのうえ、感染予防のための処置（殺菌・消毒）を行ってください。
- 本体に衝撃を与えないよう取扱いには十分に注意してください。
- チェストピース部は洗浄のため液体に直接浸さないでください。
- 紫外線殺菌灯等の設置された場所に放置すると、金属製以外の部品が劣化する恐れがあります。
- チューブを過度に折り曲げた状態でポケットなどに収納しないでください。
繰り返すとチューブに亀裂が入ることがあります。

【保管方法及び有効期間等】

- 高温、低温、直射日光を避け、清潔で良好な乾燥状態を保てる場所で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

- 本製品が汚れた時は、柔らかい布でからぶきをして下さい。
- 汚れがひどい場合、イヤーチップ、チューブは消毒用エタノールで拭くか、中性洗剤液で洗浄した後、完全に乾燥させる。チェストピース部は消毒用エタノールを含ませた布等で拭いた後、完全に乾燥させる。
- チェストピースのダイヤフラム面は強く圧迫を加えないように清拭する。
- チェストピースのベル型中央部の穴から消毒液等の液体が侵入しないように注意する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者



翼工業株式会社
〒116-0003 東京都荒川区南千住3-11-3
TEL 03-3807-5151

製造業者

翼工業株式会社

